


**機械器具69 歯科用蒸和器及び重合器
**一般医療機器 歯科技工用プレス JMDN 34705000

油圧プレスα - II

**【形状・構造及び原理等】

1) 製品外観図

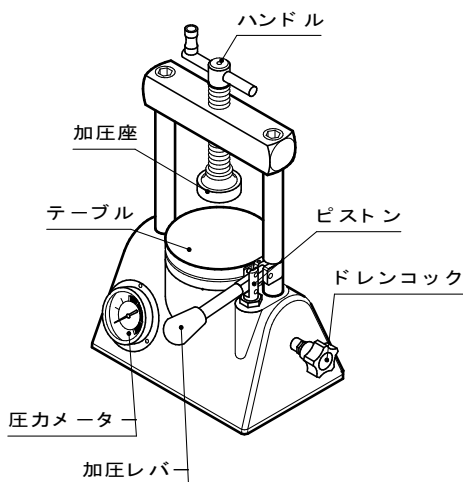

**【使用目的、効能又は効果】

本製品は、歯科技工において重合用フラスコを加圧するプレス装置です。

**【品目仕様等】

- ①最高使用圧力 : 8MPa
- ②最大ストローク : 136mm

**【操作方法又は使用方法等】

詳細については、取扱説明書の4. 使用方法の項をご参照ください。

- 1) ドレンコックを時計方向に回して確実に締めてください。
- 2) テーブルが最下降した位置にフラスコを置き、ハンドルを時計方向に回してフラスコを押えてください。テーブルが最下降の位置にない場合は、ドレンコックを反時計方向に回すとテーブルが最下降の位置まで下がります。
- 3) 加圧レバーを上下させて、加圧してください。
- 4) 圧力の解除は、ドレンコックを反時計方向に回してください。テーブルが最下降の位置まで下がります。

【使用上の注意】

- 詳細については、取扱説明書をご使用前に必ずお読みください。
・本製品を安定した丈夫な台に設置してください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 1) 貯蔵・保管方法
 - ①水のかからない場所に保管すること。

②気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に保管すること。

③傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)などに対する安定状態に注意すること。

④化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

* 2) 耐用期間

製造日から正規の保守点検を行った場合に限り10年間とする。

[自己認証(当社データ)による]

【保守・点検に係る事項】

詳細については、取扱説明書の5. 保守点検の項をご使用前に必ずお読みください。

- 1) 機器及び部品は必ず定期点検を行うこと。
- 2) 暫く使用しなかった機器を再使用するときには、使用前に必ず装置が正 常にかつ安全に作動することを確認すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

株式会社 吉田製作所

住所: 〒130-8516 東京都墨田区江東橋1-3-6

TEL: 03-3631-2191(代表)

FAX: 03-3633-9427

お問い合わせ先

TEL: 06-6783-2755(大阪工場)

FAX: 06-6783-2759(大阪工場)

TEL: 03-3635-1686(顧客情報サービス部)

FAX: 03-3635-8937(顧客情報サービス部)

製造業者

株式会社 吉田製作所

販売業者

株式会社 ヨシダ

住所: 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9

TEL: 03-3845-2941(診療機器部)

FAX: 03-3845-2948(診療機器部)

文書番号 VV添02-012b

取扱説明書を必ずご参照下さい。