


機械器具(49) 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器  
一般医療機器 歯科用ファイル JMDN 31878021

## NiTi Sファイル

### 【禁忌・禁止】

1. 目的以外の使用の禁止: 歯科診療・歯科治療以外には使用しないこと。
2. 改造の禁止: 形態変更や改造等はないこと。
3. 異常時の使用禁止: 本製品に劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。
4. 注意事項の厳守: 本製品の正しい使用のために、使用上の注意を必ず守ること。

### 【形状・構造及び原理等】

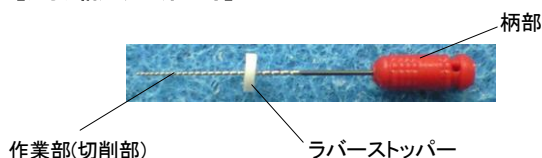

材質: ニッケルチタン合金(ブレード又は金属部)  
長さ: 21mm、25mm、28mm、31mm  
サイズ: 単品は#15～#80、アソート #15～#40、#45～#80

### 【使用目的、効能又は効果】

上下、回転運動により、刃部で根管象牙質を除去して根管を拡大形成する。

### 【品目仕様等】

作業部

| 長さ   | サイズ                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 21mm | #15, #20, #25, #30, #35, #40,<br>#45, #50, #55, #60, #70, #80, |
| 25mm |                                                                |
| 28mm |                                                                |
| 31mm |                                                                |

### 【操作方法又は使用方法等】

上下、回転運動により、刃部で根管象牙質を除去して根管を拡大形成する。

### 【使用上の注意】

1. ニッケルチタン使用: 素材のニッケルチタン合金は、鉄に比較して弾性に富み耐久性に優れた金属ではあるが、使用方法、環境によっては錆びることがある。以下の使用上の注意を守ること。
2. 禁忌の薬剤: 薬剤によっては、金属腐食を起こすおそれがあるので、使用に際して注意すること。
3. 家庭用洗剤の使用禁止: 家庭用洗剤は、金属の劣化の原因になることがあるので、使用しないこと。洗浄には、歯科用防錆洗浄剤を使用すること。
4. 機能水の使用禁止: 超酸化水(超酸性水)などは、金属を腐食させ劣化の原因になることがあるので、使用しないこと。

### 5. 洗浄、消毒の注意:

- ・ 使用後は、防錆洗浄液、精製水を用いて器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
  - ・ 洗浄、消毒には、精製水を使用すること。
  - ・ 薬液消毒を行うときは、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意事項を厳守すること。薬剤の種類によっては、金属又は樹脂素材の劣化の原因になることがある。
  - ・ 洗浄、消毒後の器具は、水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、錆や材質の劣化の原因になることがある。
6. 磨き粉、金属ウール、金ブラシの使用禁止: 錆や腐食の原因となるので、洗浄の際、磨き粉や金属ウール、金ブラシを使用しないこと。
7. 保管上の注意: 「もらいさび」が発生するおそれがあるため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。また、化学薬品と一緒に収納・保管しないこと。
8. 取扱いについて: 器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱いはしないこと。

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

清潔な場所に保管すること。  
作業部が欠損したり、切削力が落ちてきたら使用をやめること。

### 【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後の点検: 使用前・使用後は、刃部に破損、ヒビ、キズ、曲がり、金属疲労痕がないか、また作業部・柄部に大きなキズや腐食などがないか確認すること。これらがあつた場合は、使用せず廃棄すること。

### 【包装】

6本/箱

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

株式会社吉田製作所

住所 : 〒130-8516

東京都墨田区江東橋1-3-6

お問い合わせ先

TEL : 03-3631-2204(海外事業部)

FAX : 03-3635-1060(海外事業部)

製造業者: ボルデント社

【Poldent sp.z o.o.】ポーランド

販売業者

クロスフィールド株式会社

住所 : 〒130-8516

東京都墨田区江東橋1-3-6

TEL : 03-5625-3306

FAX : 03-3635-1060

文書番号 ZZ 添 049-3