

医療用品3 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 歯科用手袋 JMDN 70911000

N-DEXグローブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】


1. 再使用の禁止
2. 目的以外の使用の禁止: 歯科診療・歯科治療以外には使用しないこと。
3. 改造の禁止: 形態変更や改造等はないこと。
4. 異常時の使用禁止: 本品の使用で炎症などのアレルギー症状が起きた場合は、直ぐに使用を中止すること。また、孔や亀裂があった場合は、使用しないこと。
5. 注意事項の厳守: 本品の正しい使用のために、使用上の注意を必ず守ること。

【使用上の注意】

1. 本品は、歯科用ディスポーザブル手袋のため、再使用はしないこと。
2. 薬品(モノマー、溶剤、油脂など)によっては、本品が膨張したり、薬品が浸透したりする場合がありますので、使用に際しては十分な注意をすること。
3. 本品の使用で炎症などのアレルギー症状が起きた場合は、直ちに使用を中止し、適切な処置をすること。
4. 孔や亀裂が発生した場合、直ぐに使用を止め、交換すること。

【形状・構造及び原理等】

1) 寸法

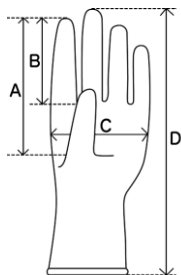

(単位:mm)

サイズ	A	B	C	D
XS	86	56	76	241
S	94	66	79	241
M	110	71	84	241
L	112	76	96	241
XL	121	77	104	241

両手兼用

サイズ:XS、S、M、L、XL

【使用目的、効能又は効果】

歯科の診療、治療及び処置の際、用いる。

【品目仕様等】

外観試験:本品の包装に、著しいキズ、使用上差支えを生じるような欠点がないこと。目視検査を行う。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

品質保持のため、直射日光や高温の場所は避け、湿気の少ない、通気の良い場所に保管すること。

【包装】

100枚(50双)／箱

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

株式会社吉田製作所

住所 : 〒130-8516

東京都墨田区江東橋1-3-6

お問い合わせ先(特殊機器事業部)

TEL : 03-3631-2204

FAX : 03-3635-1060

製造業者:ショーワ ベスト グローブ社

(ファイエット ディビジョン)

【SHOWA BEST GLOVE, INC. (FAYETTE DIVISION)】

アメリカ合衆国

販売業者

クロスフィールド株式会社

住所 : 〒130-8516

東京都墨田区江東橋1-3-6

TEL : 03-5625-3306

FAX : 03-3635-1060

文書番号 ZZ 添 002-4

【操作方法又は使用方法等】

歯科の診療、治療及び処置の際、手に装着して使用する。