

機械器具 61 歯科用ハンドピース
管理医療機器 特定保守管理医療機器 ストレート・ギアードアングルハンドピース JMDN70692000
YWハンドピース
型式: SV200MLX、SV200MI、SV40MLX、SV40MI、SV40SI、SV200MLXS、SV40MLXS

【警告】

- * ①本製品は未滅菌です。感染防止のため、初めて使用する際は必ずハンドピースおよびバーストッパの滅菌を行うこと。
- ②感染防止のため、使用者および近傍にいる者は必ずマスク、グローブ、ゴーグル等適切な保護具を着用すること。
- ③感染防止のため、患者ごとに必ず清掃および滅菌を行うこと。
- ④感染防止のため、清掃は外装部やチャック内に付着した異物が乾燥する前に行うこと。
- ⑤ハンドピースの注油およびお手入れは使用後速やかに行うこと。ハンドピースの注油やお手入れを怠るとケガや火傷の原因となります。
- ⑥ハンドピースの注油およびお手入れを怠るとベアリングが焼き付き、回転不良、異音、芯ブレ、振動などさまざまなトラブルの原因となります。
- ** ⑦バーは、JIS T 5504 歯科用回転器具一軸一に合致するバーで以下の条件のものを使用すること。

i. コントラアングルハンドピース(SV200MLX, SV200MI, SV200MLXS)

バーのタイプ	FG(スタンダードバー)
シャンク径長さ	φ 1.59~φ 1.60mm・11mm以上
全長	25mm以下
作業径	φ 2.5mm以下

ii. コントラアングルハンドピース(SV40MLX, SV40MI, SV40MLXS)

バーのタイプ	CA
シャンク径長さ	φ 2.334~2.350mm・11mm以上
全長	34mm以下
作業径	φ 35mm以下

iii. ストレートハンドピース(SV40SI)

バーのタイプ	HP,CA
シャンク径長さ	φ 2.334~2.350mm・30mm以上
全長	50mm以下(HP) 34mm以下(CA)
作業径	φ 35mm以下

上記以外のバーは使用しないこと。

また、バーは、バーごとに指定されている回転速度を確認し、指定を超える回転速度で使用しないこと。また、曲がっているもの、芯のでいていないもの、傷のあるものは使用しないこと。バーが抜け、口腔内に飛び出すおそれがあります。

- ⑧バーが突き当たるまで確実にチャックに挿入すること。バーが突き当たるまでチャックに挿入しないと、チャック部がバーを確実に保持することができず、バーが抜け口腔内に飛び出すおそれがあります。
- ⑨バーを着脱しているときに歯科用マイクロモータを回転させないこと。回転が完全に止まるまでバーおよび回転部位に触れないこと。また、回転中にバーおよび回転部位に触れないこと。ケガをするおそれがあります。
- ⑩バーを着脱しているとき以外はプッシュボタンを押したり、ストレートハンドピースグリップ部やチャック部を動かしたりしないこと。バーが抜け口腔内に飛び出すおそれがあります。
- ⑪診療前にヘッドおよびプッシュボタンのネジ部に緩みや摩耗または損傷がないことを必ず確認すること。そのまま放置すると、プッシュボタン等が脱落・飛散するおそれがあります。それらは強い衝撃や振動により発生する場合があります。
- ** ⑫回転中に異常な発熱を感じた場合、直ちに使用を中止してください。火傷をするおそれがあります。

- ⑬診療の際、安全のためラバーダムを使用すること。また、ハンドピースを回転させるときは、使用者および近傍にいる者はゴーグル等で顔を保護する手段を講ずること。チャックの摩耗や過度の負荷、金属冠などの切削時、また、バーを抜く方向での切削(かき上げ使用など)により、バーの弾かれや抜けが起き、口腔内を傷付けたり、患者が飲み込むおそれなどがあり大変危険です。

- ** ⑭異常な振動や音、発熱、バーの芯ブレなどを感じた場合は、直ちに使用を中止し、ご購入のディーラまたは株式会社ニッポンデンタルへご連絡してください。
- ⑮回転中にプッシュボタンに触れないこと。プッシュボタンが押されて回転中のチャックと接触し、発熱して火傷をしたり、バーが抜け口腔内に飛び出すおそれがあります。またこの接触により、プッシュボタンが摩耗した場合、バーが抜けなくなるおそれがあります。
- ⑯ストレートハンドピースを回転させる際はチャックを閉じること。開いたまま回転させると、ハンドピースが破損したり、マイクロモータが異常をきたして発熱し、火傷をするおそれがあります。
- ** ⑰歯髄抜歯術等においてハンドピースを使用すると、皮下気腫等の偶発症が起きることがあるので注意すること。生じた場合はただちに操作を止め、適切な処置を行うこと。
- * ⑱薬液による浸漬は行わないこと。
- ⑲診療時以外は、幼児・子供を本製品へ絶対に近づけないこと。


【形状・構造及び原理等】

1) 製品外観図

図 1. 外観図

型式	構造
SV200MLX	ヘッド部、プッシュボタン、ハンドピース本体、ファイア部、チャック部、ゲイト部、フランジ受部
SV200MI	ヘッド部、プッシュボタン、ハンドピース本体、チャック部、フランジ受部
SV40MLX	ヘッド部、プッシュボタン、ハンドピース本体、ファイア部、チャック部、ゲイト部、フランジ受部
SV40MI	ヘッド部、プッシュボタン、ハンドピース本体、チャック部、フランジ受部
SV40SI	ストレートハンドピースグリップ部、チャック部、フランジ受部、ストレートハンドピース後部
SV200MLXS	ヘッド部、プッシュボタン、ハンドピース本体、ファイア部、チャック部、ゲイト部、フランジ受部

取扱説明書を必ずご参照下さい。

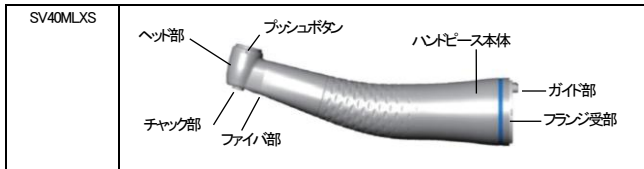

** 2) 構造

表 1. 構造

	SV200MLX	SV200MLXS	SV200MI	SV40MLX	SV40MLXS	SV40MI	SV40SI
冷却噴霧 空気流量	1.5NL/min 以上						
ギア比	1:5(5倍速)			1:1(等速)			
入力側最高回転速度	40,000min ⁻¹ (r/min)						
注水方式	五方			一方			
照明用ファイバ	あり		なし	あり		なし	
チャック方式	プッシュチャック						ツイスト テンション

3) 使用環境・条件

供給空気圧 0.20±0.01MPa

4) 原理

本製品内にあるギアまたはスピンドルが、歯科用マイクロモータから伝達される回転駆動力によって回転し、チャック部に保持された歯科用回転器具を回転させる。

【使用目的又は効果】

駆動源からの回転を等速又は変速して、歯又は義歯等を切削又は研磨する歯科用バー、リーマー等に伝達すること。

【使用方法等】

1) 使用方法

取扱説明書「3. 使用方法」の項をご参照ください。

【使用上の注意】

詳細については、取扱説明書をご参照ください。

- 1) ハンドピースに歯科用マイクロモータを接続する際、ロック音がして、確実に固定されていることを確認すること。ロックが不十分だと、使用中にハンドピースが抜けたり、水漏れするおそれがあります。
- 2) 回転中に歯科用マイクロモータのロック解除ボタンを押さないこと。空気の圧力によりハンドピースが抜けるおそれがあります。切削している場合は特に危険です。
- 3) 注水は規定の供給水圧 0.20±0.01MPa で行うこと。規定の水圧以下で使用すると注水不足を招き、切削部位が発熱します。また、規定の水圧以上で使用すると、水漏れの原因になります。
- 4) ゴミ等の混入によりチャックが開放状態になった場合、バー挿入側からヨシダスプレーで洗浄後、きれいなバーを奥まで押し込み、動作が回復したことを確認してから使用すること。
- 5) 機器の使用中は次の事項に注意すること。
 - ① 機器全般および患者に異常のないことを絶えず監視すること。
 - ② 機器全般および患者に異常が発見された場合には患者に安全な状態で機器の作動を停止するなどの適切な処置を講ずること。
 - ③ 機器に患者が触れることのないよう注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

* 1) 保管方法

本製品はオートクレーブで滅菌を行ってください。

- ① 滅菌後、滅菌バッグに入れたまま横向きで保管すること。
- ② 水のかからない場所に保管すること
- ③ 気圧、温度、湿度、風通し、日光およびほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響が生ずるおそれのない場所に保管すること
- ④ 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと

2) 耐用期間

製造の日から、正規の保守点検を行った場合に限り7年間とする。

[自己認証(当社データ)による]

【保守・点検に係る事項】

詳細については、取扱説明書をご参照ください。

** 「使用者による保守点検事項」

- 1) 本製品は診療開始前、午前・午後にも必ず点検を行うこと。

表 2. 日常の点検リスト

No.	点検項目	点検頻度
1	プッシュボタンの緩み(SV40SI 以外)	患者ごと
2	バーの振れ	患者ごと
3	バーの保持力	患者ごと
4	回転時の異音、振動、発熱(ヘッド部)	随時
5	スプレオイル(注油時)の汚れ	注油ごと

- 2) 使用後は取扱説明書「4. お手入れ」の項に従い、速やかにハンドピース、ノズルクリーナ、テストバー、パーストップ、スクリーツール、チャック清掃用ブラシのお手入れを行うこと。

- 3) 本製品に故障が発生した場合は、取扱説明書「5. 故障かな? と思ったら」の項に従い、トラブルシューティングを行うこと。

- 4) 製品の特性上、錆びる可能性があるため、錆びた部品は速やかに使用を中止し、交換修理を行うこと。

** 「業者による保守点検事項」

1) 消耗部品

表 3. 消耗部品リスト

No.	部品名
1	ギア(内部構成部品)
2	ボールベアリング(内部構成部品)
3	Oリング(内部構成部品)

・消耗具合はご使用条件により異なります。

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 吉田製作所 TEL : 03-3635-1686(CS部) FAX : 03-3635-8937(CS部)
製造業者 ダブリューアンドエイチ デンタルウェルク ビルムース ジーエムビーエイチ (W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH) オーストリア
販売業者 株式会社 ヨシダ 住所 : 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 TEL : 0800-170-5541(コンタクトセンター) ※携帯電話からは03-6880-2155におかけください。

文書番号 DH24-添付-08

取扱説明書を必ずご参照下さい。