


*機械器具 58 整形用機械器具
*一般医療機器 歯科用インプラント手術器具（JMDN:70965001）
ガイドピン

***【形状・構造及び原理等】**

〔形状〕

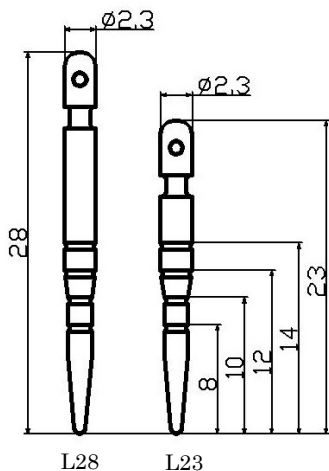

〔材質〕 純チタン

【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの外科手術に用いる器具であり、インプラント窩の方向性と深度を確認するために使用する。

***【使用方法等】**

1. 使用方法

- (1) 通法に従って手術野の消毒、麻酔、歯肉および骨膜の切開剥離ののち、ガイドドリルでドリリングを行います。
- (2) ガイドドリルによるホール形成後、ガイドピンを手指で挿入し、意図した方向、深度にホールが形成されているかどうか確認します。

****【使用方法に関連する使用上の注意】**

本品は未滅菌品ですので、使用前にオートクレーブで滅菌を行って下さい。 滅菌条件 121℃ 30 分間

【使用上の注意】

****1. 重要な基本的注意**

- (1) 誤飲防止のため、縫合糸やフロスなどを深度ゲージの孔に通して使用して下さい。
- (2) 術前には必ず十分な術前診査を行って下さい。
- (3) 使用前に十分な滅菌を行って下さい。
- (4) 使用後は、血液などの凝固を防ぐため、直ちに拭き取るか、防錆滅菌液入りのシャーレ等に入れて下さい。
- (5) 流水下にて血餅、切削片などの有機物をブラシなどで洗いおとします。
- (6) 超音波洗浄の際、金属を腐食させる恐れのある洗浄液、酸性水などは使用できません。
- (7) 本製品は純チタン製です。洗浄・乾燥時はステンレス製のドリル等、他の金属材料のツールと分け、また 1 本ずつガーゼで巻くなど取り扱いには十分ご注意下さい。
- (8) 洗浄液使用後は充分水洗し、洗浄後の乾燥は充分に行ってください。また、洗浄後は極力素手で扱わないようにして下さい。

***【保管方法及び有効期間等】**

直射日光及び高温多湿を避け、水漏れにもご注意の上保管して下さい。

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元

株式会社 ヨシオカ
長野県駒ヶ根市下平 2 9 3 4 - 5 7 7
TEL 0265-82-5959 FAX 0265-82-6353

販売元



株式会社プラトンジャパン フリーダイヤル 0120-36-8950
東京都町田市大蔵町 5 6 鶴川アカデメイアビル
TEL 042-734-8088(代) FAX 042-737-6708