

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント補綴用器具 (JMDN:70722000)
クワトロヘッドホルダー

***【禁忌・禁止】**

1. 併用医療機器


(1) 併用禁忌

- ・当社が指定する製品以外とは組み合わせて使用しないこと。[「相互作用」の項参照]

【形状・構造及び原理等】

〔形状・構造〕

インナースクリュー

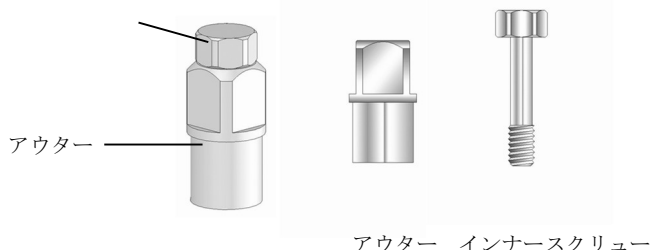

本品はアウターとインナースクリューから構成されます。
クワトロヘッドのカット面にあわせてアウターをセットし、インナースクリューにより装着します。

〔サイズ〕

S サイズ 全長 11.1 mm
L サイズ 全長 15.6 mm

〔材質〕 ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの補綴物の装着に用いる器具で、顎骨内に埋入されたインプラントボディにクワトロヘッドを装着するために用いる。

****【使用方法等】**

- (1) 通法によりインプラント埋入・治癒期間後、封鎖キャップをはずします。
- (2) クワトロヘッドホルダーをクワトロヘッドに装着します。ホルダーのインナースクリューの締め付けは手指で固定します。
- (3) 口腔内へキャリーし、インプラントボディにクワトロヘッドを装着します。
- (4) トルクラチェット (又はラチェット+トルクレンチ) を使用し、締め付けトルクのコントロールを行います。
(推奨締め付けトルク 25Ncm~30Ncm)
- (5) 手指でインナースクリューを解除し、クワトロヘッドからホルダーをはずします。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- (1) 本品は未滅菌製品ですので、使用前にオートクレーブで滅菌を行って下さい。滅菌条件 121℃ 30 分
- (2) 本品をクワトロヘッドに装着する際は、アウター内部の 4 面とクワトロヘッドのカット面を正しい位置で嵌合させて下さい。
- (3) 本品はプラチンインプラントシステムのクワトロヘッド専用器具です。他の製品には使用できませんのでご注意ください。
- (4) 中間歯欠損症例等で隣在歯に干渉する場合は、エクステンションを併用して下さい。

***【使用上の注意】**

1. 重要な基本的注意

- (1) 素材のステンレス鋼は、使用方法、環境によっては錆びることがありますので洗浄、乾燥、保管には十分ご注意ください。
- (2) 洗浄、滅菌には、なるべく精製水を使用して下さい。水道水を使用すると、塩素イオンの影響で腐食することがあります。
- (3) 「もらい錆び」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないで下さい。

2. 相互作用 (他の医療機器との併用に関すること)

〔併用禁忌・禁止〕 (併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
当社が指定する以外の製品	本製品は当社が指定する製品と組み合わせて使用するよう設計されています。指定外の製品とは組み合わせて使用しないこと。	形状が異なるため、適切な組み合わせが得られず、想定外の不具合が起こる恐れがある。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び高温多湿を避け、水漏れにもご注意の上保管して下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

株式会社 ヨシオカ
長野県駒ヶ根市下平 2 9 3 4-5 7 7
TEL 0265-82-5959 FAX 0265-82-6353

販売元



株式会社プラトンジャパン フリーダイヤル 0120-36-8950
東京都町田市大蔵町 5 6 鶴川アカデメイアビル
TEL 042-734-8088(代) FAX 042-737-6708