


*機械器具 58 整形用機械器具
*一般医療機器 歯科インプラント補綴用器具 (JMDN:70722000)
ヘッドホルダー I タイプ

【形状・構造及び原理等】

〔形状・構造〕

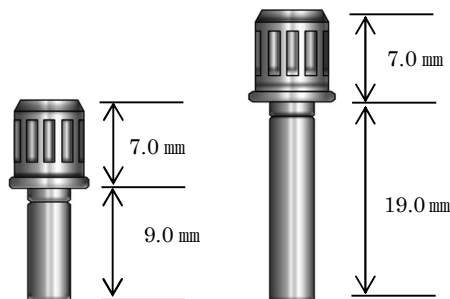

〔サイズ〕

S サイズ	全長	16.0 mm
L サイズ	全長	26.0 mm

〔材質〕 ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの補綴物の装着に用いる器具で、顎骨内に埋入されたインプラントにアバットメント（ヘッド）を装着するために用いる。

***【使用方法等】**

1. 使用方法

- (1) 通法によりインプラント埋入・治癒期間後、封鎖キャップをはずします。
- (2) 本品をアバットメント（ヘッド）に装着します。
- (3) 口腔内へキャリーし、手指でインプラントにアバットメント（ヘッド）を回転挿入します。
- (4) ラチェットおよびガイドキーを使用してアバットメント（ヘッド）が止まる位置まで回転挿入します。
- (5) トルクコントロールデバイスを使用して増し締めを行います。

****〔使用方法に関連する使用上の注意〕**

- (1) 本品は未滅菌製品ですので、使用前にオートクレープで滅菌を行って下さい。滅菌条件 121℃ 30 分
- (2) 本品は Straumann 社製のラチェットを使用して、プラトンインプラントシステムのアバットメント（ヘッド）を装着するための器具です。プラトンインプラントシステムのラチェットを使用する場合は、専用のヘッドホルダーをご使用下さい。
- (3) 使用前に、Straumann 社製のラチェットと本品の装着確認を行って下さい。
- (4) 本品はプラトンインプラントシステムの FMヘッド (S, M, L)、AMヘッド (φ4.2/φ5.5) の装着に使用します。プラトンインプラントシステムのその他のアバットメント（ヘッド）の装着にはヘックスドライバー又はクワトロヘッドホルダーを使用して下さい。
- (5) 誤って患者の口腔内に落下させ、誤飲、誤嚥させないように注意して下さい。
- (6) ヘッドの締め付け時に適正な締め付けトルクが管理されていないと、最終補綴後に補綴物の脱落等を招いたり破損等の恐れがあります。(推奨トルク 25～30Ncm)

***【使用上の注意】**

**** 1. 重要な基本的注意**

- (1) 素材のステンレス鋼は、使用方法、環境によっては錆びることがありますので洗浄、乾燥、保管には十分ご注意下さい。
- (2) 洗浄、滅菌には、なるべく精製水を使用して下さい。水道水を使用すると、塩素イオンの影響で腐食することがあります。
- (3) 「もらい錆び」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないで下さい。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び高温多湿を避け、水濡れにもご注意の上保管して下さい。

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元

株式会社 ヨシオカ
長野県駒ヶ根市下平 2 9 3 4 - 5 7 7
TEL 0265-82-5959 FAX 0265-82-6353

販売元



株式会社プラトンジャパン フリーダイヤル 0120-36-8950
東京都町田市大蔵町 5 6 鶴川アカデメイアビル
TEL 042-734-8088(代) FAX 042-737-6708