

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科用インプラント手術器具(JMDN:70965001)
プラトンシステム ホルダーキー


【禁忌・禁止】

1. 使用方法

本製品はインプラントホルダーの保持に使用する器具ですので、スパナとしてロック解除には使用しないで下さい。破損のおそれがあります。

【形状・構造及び原理等】

〔形状〕

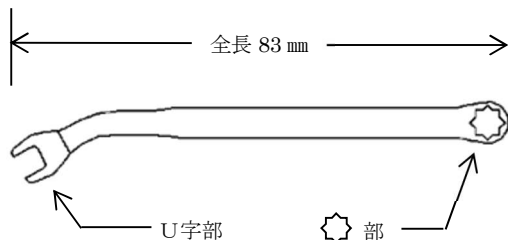

〔材質〕 ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの外科手術に用いる器具であり、インプラント埋入後、インプラントホルダーのロックを解除する際に、隣接歯とのスペースの不足により、ラチェットでのインプラントホルダーの保持ができない場合に使用する。

****【使用方法等】**

1. 使用方法

- (1) 通法に従ってインプラントを埋入する。
- (2) 本品のU字部または☆部でインプラントホルダーを保持する。
- (3) インナースクリューをスパナ又はリリースドライバーで逆回転（反時計回り）させ、ロックを解除する。
- (4) 手指でインナースクリューを緩め、インプラントホルダーをインプラントから取りはずす。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- (1) 本品は未滅菌品ですので、使用前にオートクレープで滅菌を行って下さい。滅菌条件 121℃ 30 分間
- (2) 本製品は、インプラントホルダーのロックを解除する際に、隣接歯とのスペースの不足によりラチェットでのインプラントホルダーの保持が出来ない場合に使用するため、厚さが2mmとなっております。本製品をスパナとしてインナースクリューの固定・解除に使用すると破損の原因となりますので、正しい用途で使用して下さい。

***【使用上の注意】**

1. 重要な基本的注意

- (1) 素材のステンレス鋼は、使用方法、環境によっては錆びることがありますので洗浄、乾燥、保管には十分ご注意ください。
- (2) 器具に対する曲げ、切削等の改造は折損等の原因となりますので絶対に行わないで下さい。
- (3) 洗浄、滅菌には、なるべく精製水を使用して下さい。水道水を使用すると、塩素イオンの影響で腐食することがあります。
- (4) 「もらい錆び」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないで下さい。

【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管方法

- (1) 本製品は湿った状態に置かれまゝと短時間で錆びることがあります。使用後は、充分な洗浄と乾燥をしてから保管して下さい。
- (2) 直射日光及び高温多湿を避け、水濡れにもご注意の上保管して下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

株式会社 ヨシオカ
長野県駒ヶ根市下平 2 9 3 4-5 7 7
TEL 0265-82-5959 FAX 0265-82-6353

販売元

PLATON JAPAN

株式会社プラトンジャパン フリーダイヤル 0120-36-8950
東京都町田市大蔵町 5 6 鶴川アカデメイアビル
TEL 042-734-8088(代) FAX 042-737-6708