

*機械器具 58 整形用機械器具
*一般医療機器 歯科インプラント補綴用器具（JMDN:70722000）
ショルダーレプリカ

****【禁忌・禁止】**


1. 併用医療機器

(1) 併用禁忌

- ・当社が指定する製品以外とは組み合わせて使用しないこと。〔「相互作用」の項参照〕

****【形状・構造及び原理等】**

〔形状〕

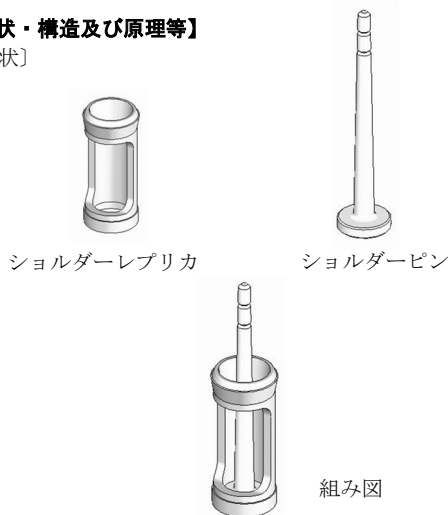

ショルダーレプリカ		
径	PF φ 4.4	PF φ 4.8
適応	Type I・II の φ 3.3 φ 3.7 φ 4.0 用	Type I・II の φ 4.5 用
カラー	黄色	赤紫色

〔材質〕 チタン合金 （陽極酸化処理）


【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの補綴物の設計・製作に用いる器具で、口腔内でのインプラント及びアパットメント位置関係を作業模型上に再現するためのトランスファー印象に用いる。

***【使用方法等】**

****1. 使用方法**

- (1) 通法に従って術前診査・インプラント埋入・治癒期間終了後、FMヘッドを装着し形成を行います。
- (2) トランスファーコーピング CL を使用し印象採得します。
- (3) ショルダーレプリカを印象面のトランスファーコーピング CL に固定します。
- (4) ショルダーレプリカにショルダーピンを装着し、FMヘッドのサイズにあわせてカット位置を決定し、カットします。

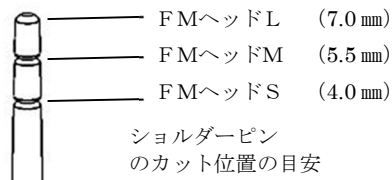

- (5) ショルダーピンに石膏をつけ、ゆっくり回転させながら石膏を充填したショルダーレプリカに差込み、通法に従って作業用模型を作製します。
- (6) 通法に従って補綴物を作製します。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- (1) 使用前にあらかじめ口腔内に植立されているインプラントボディ（フィクスチャ）のタイプとサイズを確認して下さい。
- (2) 本品は、プラチンインプラント Type I・II 用です。埋入されているインプラント径により、以下のサイズを御使用下さい。
PF φ 4.4（インプラント径 φ 3.3、φ 3.7、φ 4.0 用）
PF φ 4.8（インプラント径 φ 4.5 用）
- (3) トランスファーコーピング CL への装着時はしっかり嵌合していることを確認して下さい。
- (4) 本品は FMヘッド（S・M・L）を形成した場合にのみ使用します。FMヘッド（S・M・L）の形成を行わない場合は、ヘッドオンレプリカを使用して下さい。
- (5) フィクスチャのマーゲン部を形成した場合及び FMヘッド（S・M・L）以外のヘッドを使用した場合、本品は使用できません。

【使用上の注意】

1. 相互作用（他の医薬品・医療機器との併用に関すること）

〔併用禁忌・禁止〕（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
当社が指定する以外の製品	本製品は、当社が指定する製品と組み合わせて使用するよう設計されています。指定以外の製品とは組み合わせて使用しないこと。	形状が異なるため、適切な組み合わせが得られず、想定外の不具合が起こる可能性がある。

【保管方法及び有効期間等】

高温、多湿、直射日光を避けて保管して下さい。

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称所等】**

製造販売元

株式会社 ヨシオカ

長野県駒ヶ根市下平 2 9 3 4-5 7 7

TEL 0265-82-5959 FAX 0265-82-6353

販売元



株式会社プラトンジャパン フリーダイヤル 0120-36-8950

東京都町田市大蔵町 5 6 鶴川アカデメイアビル

TEL 042-734-8088(代) FAX 042-737-6708