

*機械器具 58 整形用機械器具
*一般医療機器 歯科用インプラント手術器具（JMDN:70965001）
プラトンシステム スパナ

****【禁忌・禁止】**


1. 併用医療機器

(1) 併用禁忌


- ・当社が指定する製品以外とは組み合わせて使用しないこと。
〔「相互作用」の項参照〕

***【形状・構造及び原理等】**

〔形状〕

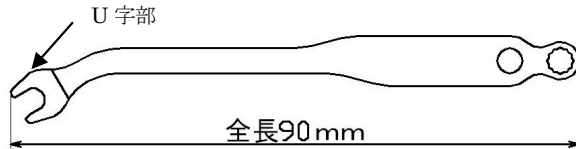

拡大図

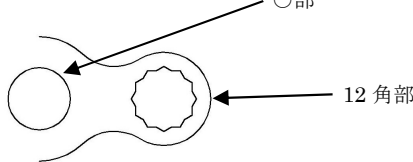

〔材質〕ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの外科手術に用いる器具であり、フィクスチャ埋入後、インプラントホルダーを解除する際に使用する。本品は再使用可能である。

***【使用方法等】**

1. 使用方法

- (1) 通法に従ってフィクスチャを埋入する。この時、軸ぶれを防ぐため、本品の○部で(トルク)ラチェットの上からインプラントホルダーを保持しながら埋入操作を行う。
- (2) (トルク)ラチェット又はホルダーキーでインプラントホルダーの四角部を保持する。
- (3) 本品のU字部又は12角部でインナースクリューを逆回転〔反時計回り〕させ、ロックを解除する。
- (4) 手指にてインプラントホルダーをフィクスチャから取り外す。

****【使用方法に関連する使用上の注意】**

本品は未滅菌製品ですので、使用前にオートクレープで滅菌を行って下さい。滅菌条件 121℃ 30 分

***【使用上の注意】**

**** 1. 重要な基本的注意**

- (1) 素材のステンレス鋼は、使用方法、環境によっては錆びることがありますので洗浄、乾燥、保管には十分ご注意ください。
- (2) 器具に対する曲げ、切削等の改造は折損等の原因となりますので絶対に行わないで下さい。
- (3) 洗浄、滅菌には、なるべく精製水を使用して下さい。水道水を使用すると、塩素イオンの影響で腐食することがあります。
- (4) 「もらい錆び」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないで下さい。

2. 相互作用(他の医療機器との併用に関すること)

〔併用禁忌・禁止〕(併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
当社が指定する以外の製品	本製品は、当社が指定する製品と組み合わせて使用するよう設計されています。指定以外の製品とは組み合わせて使用しないこと。	形状が異なるため、適切な組み合わせが得られず想定外の不具合が起こる可能性がある。

【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管方法

- (1) 本製品は湿った状態に置かれまますと短時間で錆びることがあります。使用後は、十分な洗浄と乾燥をしてから保管して下さい。
- (2) 直射日光及び高温多湿を避け、水濡れにもご注意の上保管して下さい。

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元

株式会社 ヨシオカ

長野県駒ヶ根市下平 2 9 3 4 - 5 7 7

TEL 0265-82-5959 FAX 0265-82-6353

販売元



株式会社プラトンジャパン フリーダイヤル 0120-36-8950

東京都町田市大蔵町 5 6 鶴川アカデメイアビル

TEL 042-734-8088(代) FAX 042-737-6708