

機械器具器 58 整形用機械
一般医療機器 歯科インプラント補綴用器具（JMDN:70722000）
プラトンシステム セットスクリュー

****【禁忌・禁止】**

1. 併用医療機器

(1) 併用禁忌


- ・当社が指定する製品以外とは組み合わせて使用しないこと。[「相互作用」の項参照]

2. 使用方法

- (1) 他のスクリューとの混同に注意すること。

【形状・構造及び原理等】

〔形状〕

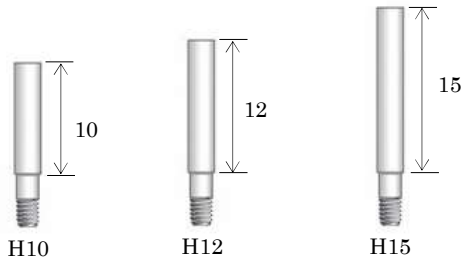

〔材質〕 チタン合金製

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの補綴物の設計・製作に用いる器具で、印象採得を行う際、印象コーピングの装着に使用する。また、ラボサイドにおいて、補綴物の作製をする際に、模型上のレプリカにアバットメントを装着する際に使用する。

【使用方法等】

**** 1. 使用方法**

ヘックスドライバーを用いてスクリューを装着します。

**** 【使用方法に関連する使用上の注意】**

- * (1) 本品は未滅菌製品ですので、口腔内で使用する際は、使用前にオートクレーブで滅菌を行って下さい。
滅菌条件 121℃ 30 分
- (2) 口腔内で使用する際に患者の開口量が十分でない場合はサイズの短いスクリューを使用するか、あるいはヘックスドライバー S S を使用して下さい。
- (3) 開口量不足によりトランスファーコーピング N E、P r o (O P) 又は、クワトロ印象キャップの装着が困難な場合セットスクリューを短いものに交換して下さい。そのためセットスクリューは各サイズ用意しておくことをお勧めします。
- (4) 本品でトランスファーコーピングを装着する際、ヘックスドライバーでセットスクリューがとまるまで軽く回して下さい。ラウンドドライバー等により、強く締め付けないようにご注意下さい。[インプラントやトランスファーレプリカと強く嵌合し、外れなくなる場合があります。]

【使用上の注意】

1. 相互作用（他の医薬品・医療機器との併用に関すること）

〔併用禁忌・禁止〕（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
当社が指定する以外の製品	本製品は当社が指定する製品と組み合わせて使用するよう設計されています。指定外の製品とは組み合わせて使用しないこと。	形状が異なるため、適切な組み合わせが得られず、想定外の不具合が起こる恐れがある。

【保管方法及び有効期間等】

開封せずに保管し、直射日光のあたる場所や高温多湿の場所は避けて下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

株式会社 ヨシオカ

長野県駒ヶ根市下平 2 9 3 4 - 5 7 7

TEL 0265-82-5959 FAX 0265-82-6353

販売元



株式会社プラトンジャパン フリーダイヤル 0120-36-8950

東京都町田市大蔵町 5 6 鶴川アカデメイアビル

TEL 042-734-8088(代) FAX 042-737-6708