

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント補綴用器具（JMDN:70722000）
ヘックストライバー

****【禁忌・禁止】**

1. 併用医療機器


- (1) 併用禁忌
・当社が指定する製品以外とは組み合わせて使用しないこと。〔「相互作用」の項参照〕

2. 使用方法

- (1) 本医療機器を用いてヘッド等を締め付ける際は、適切なトルクコントロールを行い、締め付けトルクが過重にかからないように注意して下さい。〔捻れや破損のおそれがあります。〕

【形状・構造及び原理等】

〔形状・構造〕

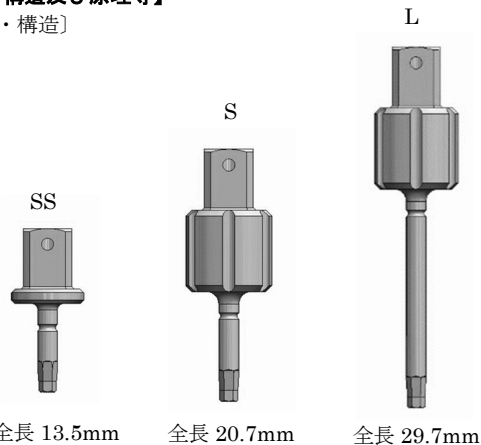

〔材質〕 ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの補綴物の装着に用いる器具で、顎骨内に埋入されたインプラントにアバットメント、キャップ、スクリューを装着するために用いる。

***【使用方法等】**

アバットメント、キャップ、セットスクリュー上端に付与されているヘックス（六角構造）部に本ドライバを挿入して装着、除去に使用する。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- (1) 本品は未滅菌製品ですので、必要に応じて使用前にオートクレーブで滅菌を行って下さい。
滅菌条件 121℃ 30 分
- (2) 開口量不足により装着しにくい場合は、サイズの短いものを使用して下さい。
- (3) ヘッド、キャップを誤って患者の口腔内に落下させ、誤飲、誤嚥させないように注意して下さい。
- (4) ヘッド・スクリューの締め付け時に適正な締め付けトルクが管理されていないと、最終補綴後に補綴物の脱落等を招いたり破損等の恐れがあります。（推奨締め付けトルクは、25～30N・cmです。）
- (5) 本品の使用時は、アバットメント、キャップ、セットスクリュー上端のヘックス部と本品の嵌合状態に注意して下さい。（嵌合が不十分の場合、破損等の原因となる恐れがあります）
- (6) 本品はプラトンインプラントシステム専用です。なお、プラトンシステムのφ3.0 シリーズには、専用ドライバをご使用下さい。

***【使用上の注意】**

****1. 重要な基本的な注意**

- (1) 洗浄、滅菌には、なるべく精製水を使用して下さい。水道水を使用すると、塩素イオンの影響で腐食することがあります。
- (2) 「もらい錆び」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないで下さい。

2. 相互作用（他の医療機器との併用に関すること）

〔併用禁忌・禁止〕（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
当社が指定する以外の製品	本製品は、当社が指定する製品と組み合わせで使用するように設計されています。指定以外の製品とは組み合わせで使用しないこと。	形状が異なるため、適切な組み合わせが得られず、想定外の不具合が起こる可能性がある。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び高温多湿を避け、水濡れにもご注意の上保管して下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

株式会社 ヨシオカ

長野県駒ヶ根市下平 2 9 3 4-5 7 7

TEL 0265-82-5959 FAX 0265-82-6353

販売元



株式会社プラトンジャパン フリーダイヤル 0120-36-8950

東京都町田市大蔵町 5 6 鶴川アカデメイアビル

TEL 042-734-8088(代) FAX 042-737-6708