

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科用インプラント手術器具（JMDN:70965001）
ラチェットドライバー S D

****【禁忌・禁止】**

1. 併用医療機器

(1) 併用禁忌


- ・当社が指定する製品以外とは組み合わせて使用しないこと。[「相互作用」の項参照]

2. 使用方法

- (1) 本品でインプラントの口腔内へのキャリーは行わないこと。[本品にキャリー機能は付与されていないため、インプラントが不潔域あるいは口腔内に落下する恐れがあります。]

***【形状・構造及び原理等】**

〔形状〕

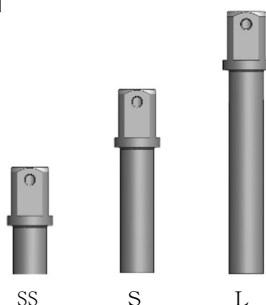

〔材質〕 ステンレス鋼

	全長
SS	11.0mm
S	19.0mm
L	27.0mm

【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの外科手術に用いる器具であり、プラチンインプラント S D の植立に使用する。本品は再使用可能である。

【使用方法等】

**** 1. 使用方法**

- (1) 通法に従い手術野の消毒、麻酔を行います。
- (2) 通法に従いドリリングを行い、インプラント床の形成をします。このとき、必要に応じてメス又はサーキュラーパンチ等で粘膜の切開剥離を行います。
- (3) インプラント S D の滅菌パッケージを開封し、中のアンプルケースを取り出します。
- (4) アンプルケースのキャップごとインプラント S D を取り出します。
- (5) キャップを保持しながらそのまま口腔内にキャリーし、インプラント S D を形成したホールに回転挿入し仮固定します。
- (6) キャップを外し、本品を口腔内のインプラント S D に装着し、トルクラチェットを使用してインプラント S D の植立を行います。（植立時のトルク値は 30Ncm 以下を目安とします。）

****【使用方法に関連する使用上の注意】**

- (1) 本品は未滅菌品のため、使用前に十分に洗浄の上、オートクレーブで滅菌を行ってください。滅菌条件 121℃ 30 分
- (2) 本品を使用してインプラント S D を口腔内へキャリーすることはできません。
- (3) 術中に誤って患者の口腔内に落下させ、誤飲、誤嚥させないように注意して下さい。

【使用上の注意】

**** 1. 重要な基本的注意**

- (1) 本品を使用する際は、術式を十分に理解した上でインプラント治療を行ってください。
- (2) 使用後、流水下にて付着した血液などの有機物をブラシなどで洗い落とします。このとき、本品の内側などもよく洗浄して下さい。
- (3) 超音波洗浄の際は他のツール類と接触しないよう保護が必要です。金属を腐食させる恐れのある洗浄液、酸性水などは使用できません。
- (4) 洗浄液使用後は十分に水洗いし、洗浄後の乾燥は十分に行ってください。また、洗浄後は極力素手で扱わないようにして下さい。
- (5) 素材のステンレス鋼は、使用方法、環境によっては錆びることがありますので洗浄、乾燥、保管には十分ご注意ください。
- (6) 洗浄、滅菌には、なるべく精製水を使用して下さい。水道水を使用すると、塩素イオンの影響で腐食することがあります。
- (7) 「もらい錆び」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないで下さい。

2. 相互作用（他の医薬品・医療機器との併用に関すること）

〔併用禁忌・禁止〕（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
当社が指定する以外の製品	本製品は当社が指定する製品と組み合わせて使用するよう設計されています。指定外の製品とは組み合わせて使用しないこと。	形状が異なるため、適切な組み合わせが得られず、想定外の不具合が起こる恐れがある。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び高温多湿を避け、水濡れにもご注意の上保管して下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

株式会社 ヨシオカ

長野県駒ヶ根市下平 2 9 3 4 - 5 7 7

TEL 0265-82-5959 FAX 0265-82-6353

販売元



株式会社プラトンジャパン フリーダイヤル 0120-36-8950

東京都町田市大蔵町 5 6 鶴川アカデメイアビル

TEL 042-734-8088 (代) FAX 042-737-6708