

スクリーインジェクター

再使用禁止


【禁忌・禁止】

使用方法

- 再使用禁止
- 造影剤等の高圧圧入には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

本品はシリンジ本体、プランジャー、ガスケット、フランジからなる。

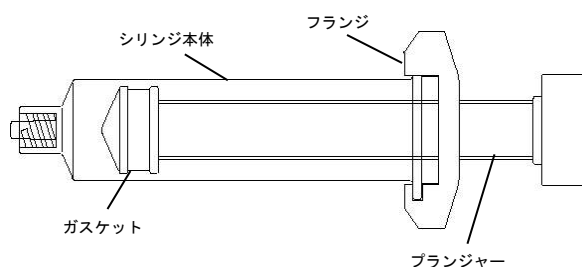

【使用目的又は効果】

本品は液体等を注射・注入するか引き抜くために用いる器具であり、プラスチック製で、目盛付の容器、プランジャー、及び脱着可能なフランジから成る。多くの場合、注射針等を用いて液体等を注入する際用いる。

【使用方法等】

1. 必要に応じて、あらかじめ手袋を着用する。
2. 本品を包装から取り出す。
3. 注射針等を使用する場合は、確実に接合し使用する。
4. 穿刺部位を消毒する。
5. 穿刺部位に穿刺し注射又は採血等を行う。
6. 穿刺針を抜去後、必要であれば止血を行う。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- ・ 注入する場合はフランジをシリンジ本体にセットしプランジャーを時計回りに回転すること。
- ・ 吸引する場合はフランジをシリンジ本体から外し、まっすぐ引くこと。(プランジャーを逆回転(反時計回り)させるとフランジが破損する恐れがあります。)
- ・ 他の医療機器等との接合部分に緩みがないことを確認してから使用すること。また、使用中は定期的に緩み、外れがないことを確認すること。
- ・ シリンジ本体に延長管を接続する場合は過度な締め付けをせず横方向の力を加えないこと。(本体の破損、液漏れが生じる可能性があります。)
- ・ 延長管を接合する際、接合部分に液体等が付着した場合は、液体等を拭取った後に接合すること。
接続部からの液漏れ等の異常が認められた場合は使用を中止すること。
- ・ 使用中は破損、接続部の緩み及び液漏れ等について確認すること。
- ・ 吸引する場合はフランジをシリンジ本体から外しまっすぐ

引くこと。(斜めに引くとガスケットとシリンジ本体密着性が悪くなり液漏れ、空気混入又はガスケットの外れが生じる可能性がある。)

- ・ シリンジ本体の目盛を超えてプランジャーを引かないこと。
シリンジ本体からプランジャーが外れ液漏れ、空気混入が生じる可能性がある。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ・ 包装を開封したらすぐに使用すること。

＜不具合・有害事象＞

1. 重要な不具合
破損
2. その他の不具合
液漏れ、空気混入、ガスケットの外れ、プランジャーの外れ

【保管方法及び有効期間等】

1. 使用方法
水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。
2. 有効期間
外箱に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称等】

＜製造販売業者及び製造業者＞

吉川化成株式会社

住所：大阪市鶴見区横堤 5 丁目 6 番 3 4 号

＜お問い合わせ先（販売業者）＞

** ゲンゼメディカル株式会社 東京営業所

住所：東京都港区東新橋 1 丁目 9 番 1 号

東京汐留ビルディング 15 階

電話番号：03-4485-0020