

ファインアトマイザー (ネイザル)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

使用方法

■再使用禁止


- 本品のシリンジを IV 用として使用する事を禁止する。
[未滅菌であり汎用のシリンジと混同しやすいため]

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本品の構造を以下に示す。

- (1) シリンジ (外筒)
- (2) プランジャ (押し子)
- (3) アトマイザー
 - (3-1) キャビティプラグ
 - (3-2) ルアーアダプタ
 - (3-3) ダブルルーメンチューブ
 - (3-4) ノズル

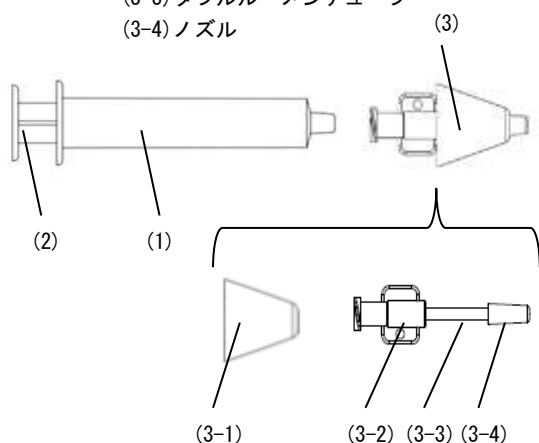

2. 原理

シリンジに注入した麻酔薬等を、アトマイザーを接続することで霧状に放出する。

【使用目的又は効果】

本品は麻酔薬を局所に噴霧するために用いる器具であり、プラスチック製で、目盛付のシリンジ、及び脱着可能なプラグ付きアトマイザーから成る。

【使用方法等】

1. 必要に応じて、あらかじめ手袋を着用する。
2. 本品を包装から取り出す。
3. シリンジに麻酔薬を充填または吸引する。
4. アトマイザーをシリンジに接続する。
5. 局所にアトマイザーのノズルを向け、噴霧する。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- ・ アトマイザーがシリンジから外れないようにしっかりと接続されていることを確認すること。
- ・ アトマイザーを接合する際、接合部分 (ルアーアダプタ) に液体等が付着した場合は、液体等を拭取った後に接合すること。

- ・ 接続部からの液漏れ等の異常が認められた場合は使用を直ちに中止すること。
- ・ 麻酔薬を充填または吸引する際は、アトマイザーを外すこと。
- ・ ノズルから、正常に噴霧されるか、確認すること。
- ・ 包装を開封したらすぐに使用すること。
- ・ シリンジの目盛を超えてプランジャを引かないこと。
- ・ 使用中は本品の破損、接続部の緩み及び薬液の漏れ等について、定期的に確認すること。
- ・ 接液部を汚染させないこと。
- ・ シリンジ印刷部を擦らないこと。また、印刷部に薬液がついた状態で放置しないこと。(目盛が消えるおそれがある)

【使用上の注意】

<不具合・有害事象>

1. 重要な不具合
破損
2. その他の不具合
漏れ、印刷目盛の消失
3. 重要な有害事象
感染

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。
2. 有効期間
外箱に記載。

*

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

吉川化成株式会社

<お問い合わせ先 (販売業者)>

株式会社フジメディカル

住所: 東京都新宿区四谷 4 丁目 - 1 細井ビル 5F

電話番号: 03-3356-8377