


器具器械 50 開創又は開孔用器具
一般医療機器 歯科用開口器 JMDN70949000


スマーティース バイトブロック

【形状・構造及び原理等】

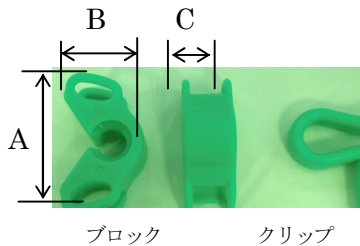

寸法：

ブロック S サイズ A= 36mm, B= 21mm, C= 13mm
ブロック M サイズ A= 40mm, B= 23mm, C= 14mm

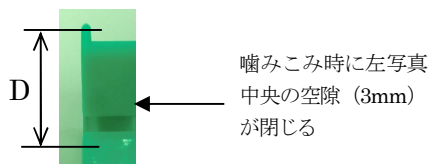

上下歯牙間（噛み合わせ部）距離：上図 D
ブロック S 最大（安静時）27mm, 最小（噛みこみ時）24mm
ブロック M 最大（安静時）27mm, 最小（噛みこみ時）24mm

公差：±2mm

材料：シリコンゴム

原理：本製品を患者の上下顎の歯牙間に噛ませ、治療中に開口状態を保つ。

【使用目的又は効果】

治療中、患者の開口状態を保つ。

【使用方法等】

- 1) 患者の開口量に応じたサイズを選択する。
- 2) クリップをブロック中央の穴に差し込む
- 3) 口角にU字形のクリップを差込セットし、ブロックを上下臼歯の間に置き患者に噛ませる。
- 4) 開口状態の維持が確認できたら診療を開始する。

【使用上の注意】

- 1) 本製品は未滅菌であるため、使用前に洗浄・消毒を行う。
- 2) 薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守る事。薬剤の種類によっては、樹脂素材に影響を及ぼすことがある。
- 3) オートクレーブ滅菌は可能であるが、乾燥工程はさける。
[滅菌温度（121℃）]

- 4) 使用後は、直ちに洗浄し付着した血液、体液、組織片等を速やかに除去すること。
- 5) 洗剤の残留がないように十分にすすぎをすること。
- 6) アルコールを使用した高圧滅菌、乾熱滅菌は、劣化の原因になるため使用しないこと。
- 7) 洗浄、消毒、滅菌後は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、シミ等の原因となる事がある。
- 8) 治療中、患者の誤飲を防止するため翼部の穴にデンタルフロス等を通して使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

（保管方法）

化学薬品と一緒に保管、収納しないこと。

【保守・点検に係わる事項】

使用前・使用後に、破損、ヒビ及びキズ等、異常がないことを確認する。

長時間の薬液への浸漬は行わないこと。

変形や劣化を防ぐため、オートクレーブ滅菌後の乾燥工程は行わないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名：株式会社ヨシオカ

住所：〒131-0034

東京都墨田区堤通1-7-13

電話番号：03（3614）1917

ファックス：03（3614）1918

製造業者名：株式会社ヨシオカ