

## レメイト 単回使用ストリッパ

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

1. 本品は、滅菌済みの単回使用製品です。再滅菌、再使用しないこと。
2. 「ステンレススチール」での過敏症を有する患者には使用しないこと。
3. 動脈瘤、重度の石灰化病変、冠動脈、頸動脈及び中心循環系血管には使用しないこと。

#### 【使用上の注意】\*


1. 本品はX線透視下で確認しながら慎重に操作すること。
2. 本品の血管内での操作中に過剰な力を加えて使用しないこと。

#### 【保管方法及び有効期間等】\*

直射日光および高温多湿を避けて保管すること。  
有効期間は製品ラベルに記載。〔自己認証（当社データ）による〕  
※有効期間の切れる前に使用すること。

#### 【形状・構造及び原理等】

本品は、ステンレススチール製のリング付きシャフトとトルクハンドル、及び樹脂製のTハンドルで構成されている。

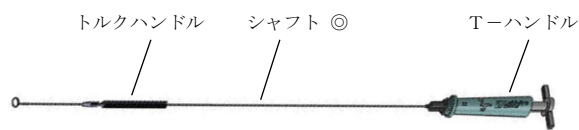

#### ＜原材料＞

シャフト：ステンレススチール

◎血液等の接触箇所

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】\*\*、\*

製造販売業者  
レメイト・バスキュラー合同会社  
〒102-0082  
東京都千代田区一番町 16-1 共同ビル一番町 1 階  
問い合わせ窓口／電話番号：03-5215-5681  
FAX 番号：03-5215-5682

製造業者  
海外製造所及びその所在地の国名：LeMaitre Vascular, Inc. (USA)  
レメイト・バスキュラー・インク（米国）

| カタログ<br>番号 | リングの<br>内径 (mm)<br>±0.2mm | リングの<br>外径 (mm)<br>±0.2mm | シャフト<br>直径 (mm)<br>±0.2mm | 有効長<br>(cm)<br>±2cm |
|------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 4500-03    | 3.5                       | 5.5                       | 2.0                       | 55                  |
| 4500-04    | 4.5                       | 6.5                       |                           |                     |
| 4500-05    | 5.5                       | 7.5                       |                           |                     |
| 4500-06    | 6.5                       | 8.5                       |                           |                     |
| 4500-07    | 7.5                       | 9.5                       |                           |                     |
| 4500-08    | 8.5                       | 10.5                      |                           |                     |
| 4500-09    | 9.5                       | 11.5                      |                           |                     |
| 4500-10    | 10.5                      | 12.5                      |                           |                     |

#### ＜原理＞

本品を血管内に挿入して、閉塞部末端まで前進させて、閉塞部を切除する。

#### 【使用目的又は効果】\*

本品は、下肢における血管の一部である閉塞物を切除等に用いるための、血管手術用ストリッパである。

#### 【使用方法等】\*

1. 本品はディスポーザブル製品です。1 回限りの使用のみで再使用しないこと。
2. 滅菌包装から丁寧に取り出し、破損等がないことを確認する。
3. カットダウン法により皮膚を切開し、血管を露出させる。
4. シャフトにトルクハンドルを取り付けた後、本品を血管内に挿入して、閉塞部末端までゆっくりと押し進め、閉塞部を切除する。
5. さらに閉塞部の切除が必要な場合、シャフトからトルクハンドルを外し、ハブの末端にTハンドルを取り付けた後、TハンドルのT部分を回転させ、「ポジション1」から「ポジション2」へ移動させ、閉塞物を切除する。
6. 閉塞部切除後、TハンドルのT部分を回転させ、「ポジション2」から「ポジション3」に移動して、先端のリングで閉塞物末端を把持する。その状態で閉塞部を引っ張り抜去する。