

添付文書

※※2023年 8月(第3版)

医療機器届出番号 13B3X10309000002

※2021年 12月(第2版)

機械器具 80

はり又はきゅう用器具

一般医療機器 非侵襲式家庭向け鍼用器具(JMDNコード:34675001)

アイスウェーブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
＜使用方法＞
・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 構造

粘着テープ、パッド、セパレータ(剥離紙)

2. 原理

身体に刺入せず、パッドによる刺激によりこりや張り、筋肉の緊張に伴う等の不快感を緩和する。

【使用目的又は効果】

一般家庭での非侵襲式の鍼用治療に使用する。

【使用方法等】

1. 皮膚を清浄します。
2. 本体の剥離紙をはがします。
3. こりのある箇所に貼付します。
※※ツボ*の場所については別途説明書をご参照ください。
※※*こりのある箇所

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 医師の治療を受けている方や下記に該当する方は専門家とご相談の上で使用ください。
 - (1) 皮膚に創傷や感染症がある方。創傷面の悪化や二次感染の可能性があります。
 - (2) 妊娠中または授乳中の方。
 - (3) 心臓ペースメーカーや植え込み型除細動器を装着している方。
 - (4) 他の治療機器をご使用の方。

※※2. 足裏等、強い圧力がかかる箇所への使用時は粘着テープやパッドによる滑りにご注意ください。

3. パッチは12時間を目安にはがしてください。長時間の皮膚への刺激を避けるためです。

4. 身体に異常を感じた場合はすぐに使用を中止してください。

5. 貼付部位に発疹、発赤、かゆみ等の症状が現れたときは直ちに使用を中止してください。

6. 適宜、水分の補給をしてください。鍼灸やマッサージ後は血流やリンパの流れがよくなるといわれていますので、適切に水分を摂るようにしてください。

＜不具合・有害事象＞

1. その他の不具合
包装破損、汚染
2. その他の有害事象
発疹、発赤、かゆみ、皮膚症状

● その他の注意

医師の治療を受けている人は医師に相談の上で使用ください。
禁忌は確認されていませんが、ペースメーカーを装着している方は医療関係者にご相談ください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。
2. 有効期間
本品の被包に記載

【包装】

円形パッチ 30個／パウチ

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞ LifeWave 合同会社

※ 〒160-8336

※ 東京都新宿区西新宿3-2-9

電話:050-3198-1108 FAX:03-5669-0957

※ ＜製造業者＞ LifeWave Europe Ltd
VLV Associates Inc.

ライフウェーブパッチの貼り方

使用方法

パッチを清潔で乾いた肌に貼ってください。パッチは最大12時間使用が可能です。
使用したパッチは再利用せずに捨ててください。パッチ使用中は十分に水分を補給してください。

貼付位置＜使用例＞

クロック/クロス法

パッチの粘着面の紙を半分だけはがし、パッチを貼りながら楽になる位置を探します。正しい位置を見つけたら、もう半分の紙をはがしてお使いください。

ステップ 1



ステップ 2



ステップ 3



ステップ 4



ステップ 5



茶色のパッチを最もツライと感じる部分に直接貼ります。ステップ2で白色パッチを茶色パッチから約5cm上の位置に貼ります。または、次のステップに進んでください。

ステップ 6

白色パッチを茶色パッチの反対側に移動させ、ツライ部分をパッチではさみます。または、ステップ7に進んでください。



ステップ 7

白色パッチをツライ部分に貼ったまま、茶色パッチを移動します。この全プロセスをステップ1から繰り返してください。



＜使用例＞全身

ステップ 1




ステップ 2



ステップ 3



ステップ 4

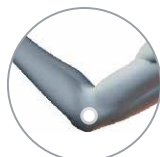

ステップ 5



茶色のパッチを左足の裏、そしてステップ1のように白色パッチを右足の裏の同じ位置に貼ります。パッチをさらに2枚取り出し、ステップ2に進みます。茶色パッチを左、白色パッチを右の同じ位置に貼ります。または、次のステップに進んでください。

＜使用例＞上半身

ステップ 1



ステップ 2



ステップ 3



白色パッチを右手に、そして茶色パッチを左手の同じ位置に貼ります。ここは親指と人差し指の付け根にあるみずかき部になります。または、次のステップに進んでください。ステップに従って、茶色パッチを左、白色パッチを右の同じ位置に貼ってください。

ステップ 4



ステップ 5



ステップ 6



＜使用例＞膝周辺

ステップ 1



ステップ1のように白色パッチを膝の外側に、そして茶色パッチを膝の内側に貼ります。または、ステップ2に進んでください。

ステップ 2



＜使用例＞背中周辺




茶色のパッチをツライ部分に、そして白色パッチをその上部に貼ります。または、クロック/クロス法のステップ3から6をお試しください。

＜使用例＞腰周辺



白色のパッチをツライ部分の右側に、そして茶色パッチをツライ部分の左側に貼り、はさみます。

＜使用例＞下半身

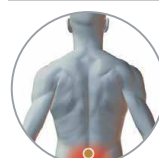

茶色パッチをツライ部分に、そして白色パッチを足のツライ部分に貼ります。