

類別：機械器具73補聴器

管理医療機器

JMDNコード：34671000

一般的名称：耳かけ型補聴器

販売名：補聴器 ND-B8T

【禁忌・禁止】

補聴器や電池は飲み込むと危険です。

幼児の手の届かないところに保管すること。

大きな音で聞かないでください。

大きな音で聞き続けると耳を傷めることがある。

他人に補聴器を貸さないでください。

他人の耳を傷めることがある。

かゆみやかぶれに注意してください。

体質によって、かゆみ・かぶれを生じる場合がある。

皮膚に異常を感じたときは使用を中止し、専門医にご相談ください。


大きな音にご注意ください。

この補聴器の出力は、出荷時にお客様の聞こえに合わせて調整されているこの状態で補聴器によっては125dB SPLを超える出力が出るので、試聴に際しては十分に注意する。

【使用上の注意】

- 次の場合、補聴器の使用前、あるいは使用中は中止して、耳鼻咽喉科医師の診察を受けること。
耳漏、耳の中の痛み、難聴の進行、めまい、頭痛、
耳の皮膚にかゆみやかぶれなどが認められるとき。
- MRI（磁気共鳴画像診断装置）の診断を受けるとき
やマイクロ波治療器などの電磁波を利用した装置を
使用して治療する場合は補聴器を外すこと。
- 洗面所や道路など、落とすと壊れやすい場所での
補聴器のつけ外しをしないこと。
- ヘヤースプレーや香水等、気化する物を使用しない
こと。
- ストープのそば、直射日光の当たる場所、車の中など
の温度の高くなる場所や、浴室、加湿器のそば
など湿度の高くなる場所に置かないこと。
- 内部をハリ、ピン、ペン先などでつつかないこと。
- 取扱説明書に従い、指定の電池を使用すること。

【形状・構造及び原理等】

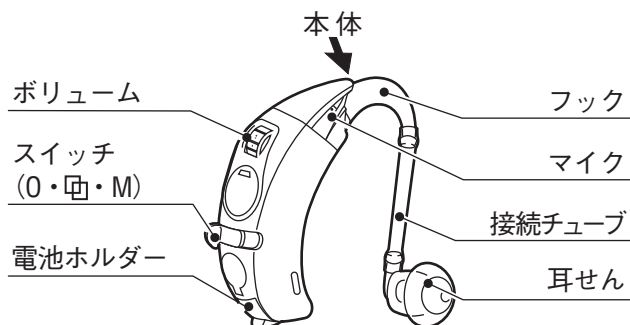

寸法／質量：4.67×1.62×0.97cm／約6.7g

材質：本体 ABS樹脂

フック ポリエチレン

接続チューブ ビニール

耳せん シリコンゴム

空気電池：PR44P 1.4V 1個

原理：音を適切な大きさに増幅して耳に伝えることにより
聴力を補う

【使用目的、効能又は効果】

身体に装着して、難聴者が音を増幅して聞くことを可能
とする耳かけ型補聴器。

【品目仕様等】

90dB最大出力音圧レベル（ピーク値）144dB以下

最大音響利得（標準周波数）：69dB±5dB

【操作方法又は使用方法等】

本体を耳に装着します。スイッチを入れます。

聞きやすい音の大きさにボリュームを回して調整します。

使用を終えるときは、スイッチを切って、耳から外します。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

直射日光の当たる場所、高温・多湿の場所を避け、
室温で保存すること。

電池寿命 約180時間

電池寿命は、使用条件によって異なる場合がある。

耐用期間 【自己認定（当社データ）による】

本体 5年

【保守・点検に係わる事項】

補聴器本体や電池を、タオル等を使用してお手入れを
してください。詳細は、取扱説明書の「いつまでも
お使いいただくために」の章を参照してください。

【包装】

片耳／1箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

リオン株式会社

〒185-8533 東京都国分寺市東元町3-20-41

TEL:042-359-7880(代表) FAX:042-359-7441

製造業者

リオン株式会社

武蔵リオン株式会社

アルファリオン株式会社

お問合せ先（発売元）

株式会社 ニコン・エシロール

ヒアリングエイドセールス イズム販売

〒130-0026 東京都墨田区両国2-10-8 住友不動産両国ビル

TEL:03-5600-3528(代表) フリーダイヤル:0120-312-507

取扱い説明書を必ず参照してください