

類別：機械器具 73 補聴器 管理医療機器 JMDN コード：41209000 一般的名称：カナル型補聴器

販売名：補聴器 NLC-11P

【禁忌・禁止】

幼児などの手の届かないところに保管すること。
補聴器や電池は飲み込むと危険である。


大きな音で聞き続けられないこと。
大きな音で聞き続けると、さらに聞こえを悪くすることがある。また、補聴器からピーピー音が発生するハウリング状態で使用し続けると、聞こえを悪くすることがある。

他人に補聴器を貸さないこと。
他人の耳を傷めることがある。

かゆみやかぶれに注意すること。
体質によって、かゆみ・かぶれを生じる場合がある。皮膚に異常を感じたときは使用を中止し、専門医に相談すること。

大きな音にご注意ください。
この補聴器の出力は、出荷時にお客様の聞こえに合わせて調整されている。この状態で補聴器によっては 125 dB SPL を超える出力が出るので、試聴に際しては十分に注意する。

【形状・構造及び原理等】*

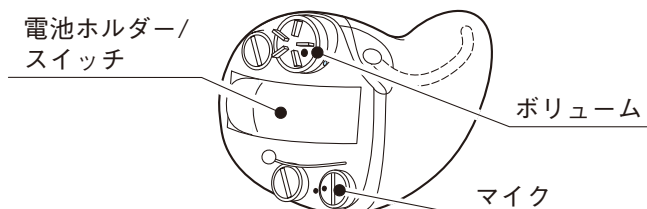

材質： シェル アクリル
空気電池： PR41 1.4 V 1 個
原理： 音を適切な大きさに増幅して耳に伝える
 ことにより聴力を補う

【使用目的、効能又は効果】

耳に差し込んで使用し、難聴者の聴力を補うオーダーメイドタイプ補聴器。

【品目仕様等】

90 dB 最大出力音圧レベル (ピーク値)：133 dB 以下
最大音響利得 (規準周波数)： 36～52 dB ± 5 dB

【操作方法又は使用方法等】

補聴器を耳に着けて、スイッチを入れます。
聞きやすい音の大きさにあわせませす。
(相手の声や周囲の音の大きさに応じてこまめに調整してください。)
この補聴器の出力は出荷時にお客様の聞こえに合わせて調整されています。試聴に関しては十分にご注意ください。

【使用上の注意】

- 次の場合は補聴器の使用を中止すること。
耳漏、耳垢、耳の中の痛み、難聴の進行、めまい、頭痛、痒み、湿疹が認められるとき。
- 取扱説明書に従い、指定の電池を使用すること。
- MRI (磁気共鳴画像診断装置) の診断を受けるときやマイクロ波治療器などの電磁波を利用した装置を使用して治療する場合は補聴器を外すこと。
- 大きな音で聞き続けると耳を傷めることがある。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

直射日光の当たる場所、高温・多湿の場所を避け、室温で保存すること。

電池寿命 約 140～370 時間

電池寿命は、電池の種類または使用条件によって異なる場合がある。

耐用期間 [自己認証 (当社データ) による]*

本体 5 年

【保守・点検に係る事項】

補聴器本体や電池を、タオル等を使用してお手入れをしてください。詳細は、取扱説明書の「いつまでもお使いいただくために」の章を参照してください。

【包 装】

片耳／1 箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

リオン株式会社

〒185-8533 東京都国分寺市東元町 3-20-41

TEL：042-359-7880 (代表) FAX：042-359-7441

製造業者

リオン株式会社

リオンテクノ株式会社

武蔵リオン株式会社*

お問い合わせ先 (販売元)

株式会社ニコン・エシロール

ヒアリングエイドセールス イズム販売

〒130-0026 東京都墨田区両国 2-10-8

住友不動産両国ビル

TEL：03-5600-3528 (代表) フリーダイヤル：0120-312-507

取扱説明書を必ず参照してください