

機械器具 68 印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器 歯科印象採得用トレー 16350000


フロンティア 印象用トレー

【形状・構造及び原理等】



大人 / 子供用上下顎

片顎上下顎

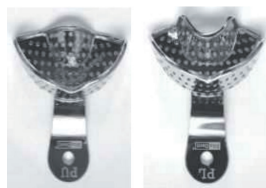

前歯上下顎

材質：銅

【使用目的又は効果】

印象採得時に、本トレー内に印象材を盛って保持し、口内に圧接する為に用いる。

【使用方法等】

- ① 口腔内のサイズに合わせ適切なトレーを選択する。
- ② 本トレーに印象材を盛る。
- ③ 口腔内に圧接する。
- ④ 印象材が硬化したら、本品のハンドルを掴み口腔内から印象材ごとトレーを外す。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) 患者の口腔内の大きさに応じて、最適なサイズを選択すること。
- 2) 使用前、使用中に本品の損傷有無を確認すること。

【使用上の注意】

1. 使用注意
 - 1) 本品は未滅菌な為、使用前に必ず滅菌を行うこと。その際なるべく 134℃ 以上にならないようにすること。
 - 2) 本品の使用後は、付着している血液や組織などが乾燥しないように洗浄液などに浸漬させること。
 - 3) 洗浄液、消毒液等を使用する際は、必ずその説明書等に従うこと。
 - 4) 強アルカリ、強酸性の洗浄液や消毒液は、本品を腐蝕、変色させる恐れがあるので、使用を避けること。また、金属たわし、クレンザー等は、本品の表面が破損するので使用しないこと。
 - 5) 本材は、[使用目的] に記載されている以外の目的で使用しないこと。
 - 6) 本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
 - 7) 本品を廃棄する場合は、「廃棄物処理に関する法律」に従い、適切に処理すること。
2. 重要な基本的注意
 - 1) 本品の使用により、眼、皮膚、呼吸器に炎症又は皮膚接触によりアレルギーが発症した患者及び術者は、直ちに使用を中止

し、医師の診断を受けさせること。

- 2) 本品は、患者毎に滅菌を行い、感染防止に十分配慮すること。
- 3) 本品の使用後は、できるだけ早く血液、組織等の異物を除去し、洗浄、滅菌すること。また、洗浄、滅菌の際は、必ずラテックスグローブ等を使用すること。

【取扱上の注意】

1. 本品の寿命を著しく低下させるため、粗雑な取扱はしないこと。
2. 使用による消耗によって極端に変形した器具は使用しないこと。
3. 洗浄、滅菌することにより、複数回数使用可能である。
4. [使用方法に関連する使用上の注意] にも記載したように、使用前、使用中に本品の損傷有無を確認すること。
5. 定期的に確認し、トレーの器が極端に変形して的確な印象が取れないと術者が判断したトレーは廃棄すること。
6. 本品が損傷、汚染した場合は、廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 本品は、直射日光を避け、清潔な場所に保管すること。
2. 保管する場合は他のサイズと混ざらないよう保管すること。
3. 本品は、歯科医療関係者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。
4. 本品は予告無く改良されることあるため、在庫品の先入れ先出しを励行すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：**リニカイ株式会社**

住 所：東京都新宿区南元町 19 番地 信濃町外苑ビル 3 階
電 話：03 (3359) 4321

製 造 業 者：DiaDent Group International

製 造 国：大韓民国