


歯科材料 3 義歯床材料
一般医療機器 歯科用パターンレジン 70833000

ドゥルフォレン

【形状、構造及び原理等】

ポリプロピレン製のHタイプとポリエチレン製のWタイプの二種類があり、H、W共に薄い板状で、円板型と正方形がある。寸法及び色調は以下のとおり

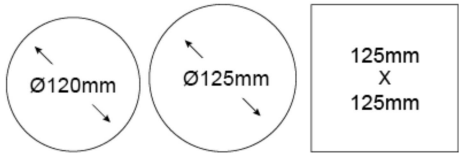

	商品名	寸法	色調	厚み
①	Hタイプ	直径：120/125mm 一辺の長さ：125mm	乳白色	0.6mm、0.8mm
②	Wタイプ	直径：120/125mm	青	0.65mm、0.8mm
			乳白色	0.45mm、0.65mm、0.8mm、1mm

【使用目的又は効果】

インレー、クラウン等、鋳造用パターンの作製に用いるレジン材料

【使用方法等】

1. 模型を加圧成型器にセットする。
2. 本品を成型器にセットする。
3. 併用の成型器の取扱説明書及び添付文書に従い、成型する。
加熱時間等は下記の表のとおり。
4. 加圧成型後、本材を模型から取り外し、マージン部分を削除して通例のとおり埋没鋳造する。

Hタイプ

厚さ	加熱時間	放冷時間
0.6mm	1 分 30 秒	1 分 30 秒
0.8mm	1 分 40 秒	1 分 40 秒

Wタイプ

厚さ	加熱時間	放冷時間
0.45mm	1 分 10 秒	1 分 30 秒
0.65mm	1 分 15 秒	2 分 00 秒
0.80mm	1 分 25 秒	2 分 00 秒
1.00mm	1 分 40 秒	2 分 00 秒

【併用する医療機器】

- 加圧成型器（一般的名称：歯科技工用成型器 70750010）
 - 1) 販売名：ドゥルフォマット スキャン
医療機器届出番号：13B2X00065000159
 - 2) 販売名：ドゥルフォスマート
医療機器届出番号：13B2X00065000258
- 1) 2) 共、製造販売業者：リンカイ株式会社
製造業者名：Dreve Dentamid GmbH

【使用上の注意】

1. 併用の成型器の添付文書及び取扱説明書に従って成型すること
2. 本品を切断する際は、表面が滑るため、よく熱したメス等で注意深く切ること。
3. 本品を直接炎にかざさないこと。
4. 本品を切り出し又は研磨する際は、保護メガネ等を着用し、目の損傷を防ぐこと。
5. 本品又は類似の成分に過敏症の既往歴のある術者は、本品を使用しないこと。
6. 本品の使用や皮膚接触により、眼、皮膚、呼吸器、口腔内外に炎症やアレルギーが発症した患者又は術者は、使用をすぐに中止し、専門医の診断を受けること。
7. 本材を廃棄する場合は、「廃棄物処理に関する法律」に従い、適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 1) 多湿、火気及び直射日光を避け、室温で保管すること。
- 2) 購入時のパッケージに入れて保管すること。

【有効期間】

包装に表示された日付までに使用すること。
（表示の使用期限は製造元による。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業：リンカイ株式会社

住 所：東京都新宿区南元町19番地 信濃町外苑ビル3階
電 話：03（3359）4321

製 造 業 者：Dreve Dentamid GmbH

製 造 国：ドイツ