

**2019 年 11 月 (第 3 版 付属品削除)

*2019 年 3 月 (第 2 版)

医療用品 06 視力表及び色盲検査表
一般医療機器 視力表 JMDN コード 16800000

LCD チャート LCD-1000


【形状・構造及び原理等】

**1. 本品構成

(1) 本体

付属品構成

- (1) リモートコントローラー
- (2) 電源コード
- (3) AC アダプター
- (4) LCD 取り付け板
- (5) レッド/グリーンガラス
- (6) 取扱説明書
- (7) リモートコントローラーラベル

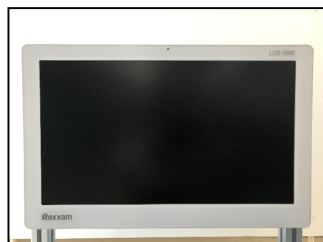

2. 機器の分類

電撃に対する保護の型式：クラス I 機器

3. 電氣的定格

定格電圧：DC12V 3.4A

*4. 寸法及び重量

本体

寸法：572mm±3mm (W) × 46mm±3mm (D) × 361mm±3mm (H)

重量：約 5kg

5. 原理

検査用視標の文字、記号、絵、イメージなどの視標データをソフトウェアにより任意の大きさや配列に制御して画面上に表示させ、被検者に解答させることにより、視力や視覚機能を検査する装置である。視標データを制御及び処理するために、内蔵のコンピュータとコンピュータソフトウェア並びにそれに指示信号を送るためのリモートコントローラーを用いる。

詳細は「取扱説明書」の「各部の名称」を参照のこと。

【使用目的又は効果】

視力検査に用いる視力表。

【使用方法等】

1. 環境条件

温度：10℃～40℃

湿度：30%～90% (結露なきこと)

気圧：800hPa～1060hPa

2. 使用方法

1. 本体の電源を入れる。
2. 本体の検査距離の設定が正しいことを確認します。
3. 希望の視標のタイプを選択する。視力値を指定する。
4. 終了するには、本体の電源を切ります。

【使用上の注意】

基本的注意事項

- ・適用電源電圧が不安定な場所では使用しないこと。
- ・温度、湿度変化の激しい場所では使用しないこと。
【水蒸気が露となり、製品に影響を及ぼすため。】
- ・3P-2P 変換プラグは使用しないこと。

医用電気機器の使用上の注意事項

1. 機器を設置する時は、次の事項に注意すること。

- (1) 水のかからない場所に設置すること。
- (2) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより、悪影響を生じる恐れのない場所に設置すること。
- (3) 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など、安定状態に注意すること。
- (4) 化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所に設置しないこと。
- (5) 電源の周波数と、電圧及び許容電流値（又は消費電力）に注意すること。
- (6) アースを正しく接続すること。

2. 機器を使用する前には、次の事項に注意すること。

- (1) スイッチの接続状況などの点検を行い、機器が正確に作動することを確認すること。
- (2) アースが、完全に接続されていることを確認すること。
- (3) すべてのコードの接続が、正確でかつ完全であることを確認すること。
- (4) 機器の併用は、正確な診断を誤らせたり、危険な状態になる恐れがあるので、十分注意すること。
- (5) 患者に直接接する外部回路があるときは再点検すること。

3. 機器の使用中は、次の事項に注意すること。

- (1) 診断、治療に必要な時間・量をこえないように注意すること。
- (2) 機器全般及び患者に異常のないことを、絶えず監視すること。
- (3) 機器及び患者に異常が発見された場合は、患者に安全な状態で機器の作動を止めるなど適切な措置を講ずること。
- (4) 機器に患者が触れることのないよう注意すること。

4. 機器の使用後は、次の事項に注意すること。

- (1) 定められた手順により、操作スイッチなどを使用前の状態に戻した後、電源を切ること。
- (2) 保管場所については、次の事項に注意すること。
 - ① 水のかからない場所に、保管すること。
 - ② 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより、悪影響を生じるおそれのない場所に保管すること。
 - ③ 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など、安定状態に注意すること。
 - ④ 化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所に保管しないこと。
- (3) 付属品、コード、導子などは洗浄したのち、整理してまとめておくこと。
- (4) 機器は次回の使用に支障のないように、必ず清潔にしておくこと。

5. 故障したときは、勝手にいじらず適切な表示を行い、修理は専門家にまかせること。

6. 保守点検

しばらく使用しなかった機器を再使用するときは、使用前に必ず機器が正常にかつ安全に作動することを確認すること。

取扱説明書を必ずご参照ください

廃棄

装置を廃棄する場合は、廃棄、リサイクルに関する自治体の条例に従うこと

その他、「取扱説明書」の「安全に使用していただくために」や「使用上の注意事項」を熟読し、遵守すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

1. 水のかからない場所に保管すること。
2. 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分等を含んだ空気により、悪影響の生じる恐れのない場所に保管すること。
3. 傾斜、振動、衝撃等のないところに保管すること。
4. 化学薬品の保管場所等には、保管しないこと。
5. 環境条件
 - ・ 温度：－10° ～＋55°
 - ・ 湿度：10～95%（結露のないこと）

2. 耐用期間

正規の保守点検を行った場合に限り、納入されたときから7年（自己認証[当社データ]による）

その他、「取扱説明書」の「装置の保管」や「安全に使用していただくために」を熟読し、厳守すること。

【保守・点検に係わる事項】

＜使用者による保守点検事項＞

1. 日常の手入れ

- 1) 長時間使用しないときは、電源コードをコンセントから抜いてください。
- 2) 液晶パネルに、指紋、ホコリなどが付着した場合、検査の精度に影響します。絶対に指で触れないようにし、またホコリの付かないよう気をつけてください。
- 3) 液晶パネルが汚れた場合は、脱脂綿あるいは柔らかい布等で拭き取って下さい。汚れのひどい時は、中性洗剤を使って拭き取ってください。この場合、取り扱いには十分に気をつけ、キズがつかないようにして下さい。
- 4) カバーが汚れた場合は、カラ拭きを行って下さい。汚れのひどい時は、少量の水か中性洗剤を使って拭いて下さい。

その他、保守・点検の詳細は、「取扱説明書」の「使用上の注意事項」や「保守保管」を参照のこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社レクザム 香川工場
TEL:087-879-3131

製造業者

株式会社レクザム 香川工場

取扱説明書を必ずご参照ください