

リチャードウルフ 把持鉗子

【禁忌・禁止】

適用対象(患者)

クロイツフェルド・ヤコブ病、変異型クロイツフェルド・ヤコブ病、牛海綿状脳症(狂牛病)などの伝染性海綿状脳症の患者。[病気感染の危険をさけるため。]


【形状・構造及び原理等】

1. 構造


本品は、鉗子部とハンドルから構成される。鉗子部とハンドルは一体型である。鉗子先端部の形状は、把持鉗子、把持鉗子マウスツース型及び三つ爪鉗子の 3 種類ある。三つ爪鉗子は、先端部が交換できる。

2. 形状及び寸法


(1) 把持鉗子

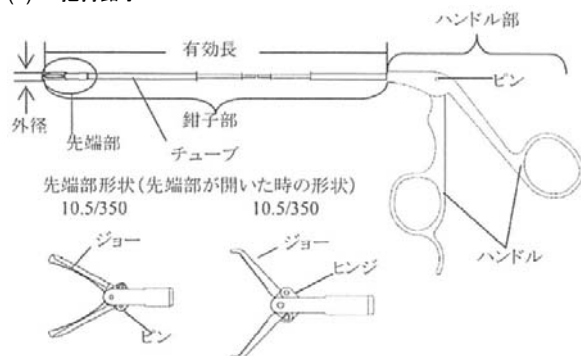


(2) 把持鉗子マウスツース型

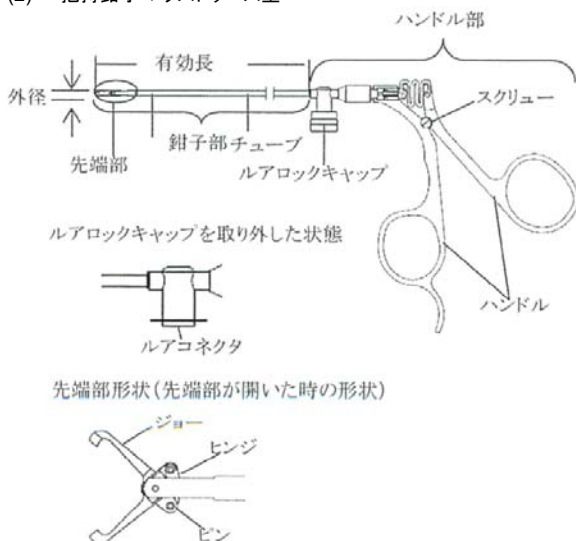

(3) 三つ爪鉗子

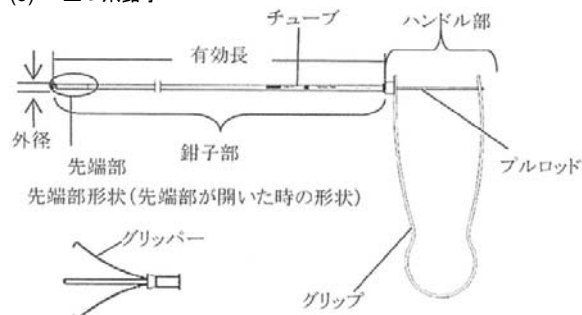

インナーユニット(交換用)

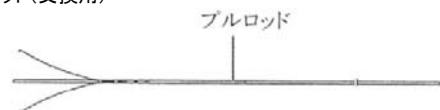

<血液・体液に接触する部分の原材料>
ステンレススチール

<鉗子部の寸法>

先端部形状	製品番号	有効長	外径
把持鉗子 10.5/350	8962.61	350mm	3.5mm
把持鉗子 10.5/350	8964.601	350mm	3.5mm
把持鉗子マウスツース型	8968.601	365mm	2.0mm
三つ爪鉗子 10.5/350	8964.671	350mm	3.5mm
三つ爪鉗子 6/365	8968.671	365mm	2.0mm

【使用目的又は効果】

<使用目的>

内視鏡治療時に専用の内視鏡とともに使用する器具で、結石を把持及び除去するために用いるものである。細長い柄と、摘出するために結石を収集(採取)する先端のワイヤバスケットから構成される。本品は再使用可能である。

【使用方法等】

<使用方法>

● 組立

1. 本品は硬性内視鏡(本品に含まれない)に挿入し、内視鏡下にて使用する。
2. 本品を用いて、結石又は異物を把持、摘出する。

ご使用前に取扱説明書を必ずご一読ください。

● 再処置及びメンテナンス

<用手による洗浄>

下記の手順で洗浄及び滅菌する。

- ・把持鉗子マウスツース型は、ルアロックキャップを取り外す。
- ・三つ爪鉗子は、グリップからブルロッドを取り外し、チューブからインナーユニットを引き抜く。

1. ジョー、ヒンジを適切な洗浄ブラシ(本品に含まれない)を用いて洗浄する。
2. 把持鉗子マウスツース型は、ルアコネクタを介して洗浄ガン(本品に含まれない)を用いて洗浄する。

<機械による洗浄>

1. 本品をホルダー(本品に含まれない)又は洗浄用バスケット(本品に含まれない)に入れる。
2. 把持鉗子マウスツース型はルアコネクタを介して洗浄器(本品に含まれない)に接続して、洗浄する。
3. 洗浄後、ジョー等の全可動部分に注油し、余分な油分を取り除く。

<滅菌前の組立>

- ・三つ爪鉗子はインナーユニットをチューブへ挿入し、ブルロッドをグリップへ取り付け。

<推奨滅菌条件(蒸気滅菌)>

滅菌器の使用方法に従い滅菌する

134℃(273F)での蒸気滅菌を推奨する。

温度 : 134±4℃

真空 : 3 回

温度維持時間 : 3～5 分

乾燥時間 : 10～20 分

<使用方法に関する使用上の注意>

- (1) トロカールを介して挿入する際、ジョーが閉じた状態であることを常に確認すること。
- (2) ヒンジ表面の破損、ピンの緩みがないことを確認すること。
- (3) 把持鉗子マウスツース型のルアロックキャップは滅菌前に装着しないこと。使用直前にルアロックキャップを装着すること。[滅菌媒体が十分に流れ込まない可能性がある。]
- (4) 本品は未滅菌製品であるので、初回使用前及び毎使用後は、洗浄、滅菌処理を行うこと。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 過剰な力を加えないこと。[製品が破損したり、性能を損ねたり、患者に傷害を引き起こす可能性がある。]
- (2) 使用の直前及び直後に、破損、部品の緩み及び紛失がないことを確認すること。破損した製品や部品に緩みがある場合は、本品を使用しないこと。
- (3) 患者の体内に部品が残っていないことを確認すること。

2. 不具合・有害事象

有害事象

- (1) 組織の外傷
- (2) 組織穿孔
- (3) 急性出血

3. その他の注意

- (1) 本品を輸送する際は、専用の梱包箱を使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管、輸送条件

温度 : -20℃～60℃

相対湿度 : 10%～90%

気圧 : 700hPa～1060 hPa

【保守・点検に係る事項】

<目視点検>

1. 本品全体について、下記のような状態でないことを確認する。
 - ・破損
 - ・鋭利なエッジ
 - ・部品の緩みまたは紛失
 - ・ざらざらした表面
2. 本品の表示が読み取れることを確認する。

<機能点検>

1. 下記について確認する。
 - ・接合部分
 - ・ジョーが適切に開閉する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

リチャードウルフ株式会社

〒108-0071 東京都港区白金台 2-26-10 グリーンオーク高輪台

電話番号: 03-6459-3939

外国製造業者:

Richard Wolf GmbH (ドイツ)

ご使用前に取扱説明書を必ずご一読ください。