

類別: 機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管 種別: 一般医療機器
 一般的名称: 排気用チューブ (JMDN コード: 70354000)

R. Wolf 排煙用器具


再使用禁止

【禁忌・禁止】
<使用方法>
 再使用禁止


【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造等

(フィルタ付吸引チューブ)

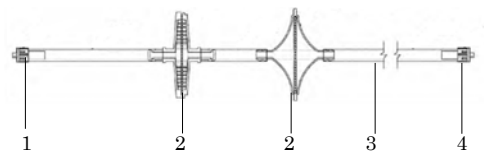

(フィルタ)

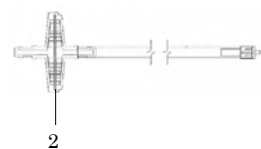

1: 装置側コネクタ 2: フィルタ 3: チューブ 4: 器具側コネクタ

2. 原理

本品を気腹装置と内視鏡用処置具又はトロカールスリーブに接続することで、フィルタを通して不純物を除去した炭酸ガスを体内から吸引することができる。

【使用目的又は効果】

本品は柔軟性のあるチューブで、気腹装置の排気装置と内視鏡用処置具又はトロカールスリーブと接続し、炭酸ガスの吸引を行うことを目的とする。

【使用方法等】

- 使用前に、包装の封緘が完全で包装に穴や裂け目が無いのか、使用期限内であるか、本品に異常がないかを確認する。
- 本品に接続する気腹装置・機器類は、本品に適したものを使用する。
- 装置側コネクタを気腹装置の炭酸ガス吸引用チューブのコネクタに、器具側コネクタを内視鏡用処置具又はトロカールに接続する。
- 全ての接続が確実であるかを確認し、炭酸ガスの吸引を開始する。
- 使用後は、接続機器類を全て気腹装置から取り外す。


【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 損傷や不具合が生じるおそれがある為、必要以上の力は加えないこと。
- 手術中に本品が故障した場合に備えて、手術を滞りなく継続できるように、予備を用意しておくことを推奨する。
- 本品と装置・機器類が使用中に緩みや外れが生じないよう、接続

されていることを確認すること。

- トロカールスリーブに本品を接続する場合、吸引と送気を間違えないようにすること。
- 本品は炭酸ガス吸引専用であり、液体吸引のために使用しないこと。
- 気腹装置がハイフローモードにおいてのみ、炭酸ガスを吸引することができる。
- 気腹装置がベビーモードの時は、炭酸ガス吸引の使用はできない。
- 炭酸ガス吸引のポンプは、圧力<3mmHg になると、スイッチが入り、圧力>3mmHg の場合は、自動的にスイッチが切れる。
- 炭酸ガス吸引は、気腹装置の排気ボタンあるいはフットスイッチで、開始/停止の切り替えを行う。
- 炭酸ガス吸引を動作する代わりとして、使用しているトロカールの 1 つにフィルタを直接接続して使用することもできる。

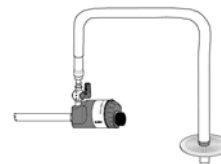

- 本品使用後は、破損・損傷・脱落・変形等異常がないかを確認すること。
- 使用後に、本品のいかなる部分も患者体内に遺残していないことを確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 使用期限は直接の包装及び外箱に記載。
- 本品の移動や保管に際し、衝突や落下などの機械的衝撃にさらさず、乾燥し清潔で埃のない環境で保管すること。

【主要文献及び文献請求先】

リチャードウルフ株式会社
 TEL 03-6459-3939

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:
 リチャードウルフ株式会社
 TEL 03-6459-3939

外国製造業者:
 リチャード・ウルフ GmbH (ドイツ)
 Richard Wolf GmbH

ご使用前に取扱説明書を必ずご一読ください。