

機械器具 12 理学診療用器具
一般医療機器 冷却パック 37240020

アイスバンド ユニバーサルショルダー

【禁忌・禁止】

- ・ 本品に破損、汚損が認められる場合は使用しないこと。
- ・ 寒冷アレルギー、レイノー現象（寒さなどが誘因となり起こりうる一時的な血行障害）、或いはクリオ（寒冷）グロブリン血症の患者には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

IB 4006 アイスバンド ユニバーサルショルダー



アイスバンドには保冷剤（2個×2セット）が付属しています。



IB4007 アームスリング



【使用目的、効能又は効果】


消炎鎮痛処置（寒冷治療）を行うパックをいう。冷却装置等で冷却媒体の入ったパックを冷却し、患部に当てるものである。

【操作方法又は使用方法等】

＜アイスバンド ユニバーサルショルダー＞

本品は、両肩に適用します。

1. 保冷剤を冷凍庫で凍結させます。3時間程で中の水は凍ります。
2. 本品のポケットに保冷剤を一つずつ入れます。残り 2 つは冷凍し、最初の 2 つが溶けた後使用して下さい。
3. 下図の様に、矢印マークを合わせるようにマジックテープで留め、肩の形を作ります。

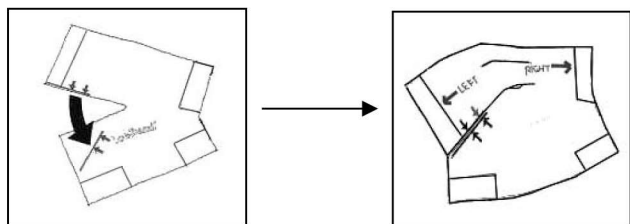

4. 右肩に装着する場合は、RIGHT FRONT と記載のある方を前に、左肩に装着する場合は、LEFT FRONT と記載のある方を前にして肩に装着します。各バンドは、後側（背中側）のマジックテープに貼付しておきます。
5. 肩に装着し、バンドを腕に回し、固定します（図 1）
6. バンドを矢印の方向に回しマジックテープを留めます。体型にあわせバンドの長さを調節して下さい。（図 2）

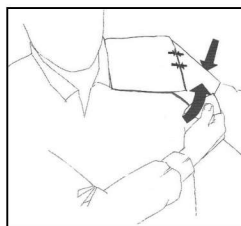


図 1

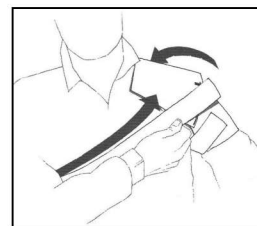


図 2

7. 本品は、1 回につき 45 分から最長 60 分まで使用することが出来ます。
8. 保冷剤の氷が全て解けた場合、或いは冷却効果が薄れた場合は取り外して下さい。

＜アームスリング＞

1. 腕を固定する必要がある場合は、アームスリングをアイスバンド ユニバーサルショルダーにマジックテープで留め、輪の部分に腕を入れ使用します。（図 3）

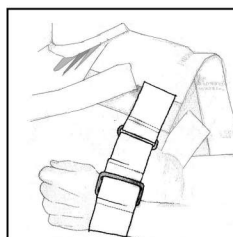


図 3

【使用上の注意】

●重要な基本的注意

- ・ 【使用目的、効能又は効果】に記載されている使用目的以外の用途で使用しないこと。
- ・ 本品を使用して、痛み等の異常を伴った場合、使用を中止すること。
- ・ 本品はパーソナルユーズです。複数の患者で共有して使用しないこと。
- ・ プレースを洗浄しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

●保管方法

- ・ 高温、多湿、直射日光及び水濡れを避け、風通しの良い清潔な場所に保管すること。
- ・ 化学薬品の保管場所やガスが発生する場所に保管しないこと。
- ・ 包装に記載されている使用期限を確認し、使用期限を過ぎたものは廃棄すること。

●使用回数

- ・ 30 回の使用を目安に廃棄すること。

【保守・点検に係る事項】

＜洗浄＞

- ・ 保冷剤は、表面を消毒剤で清拭することが出来ます。ブレースは洗浄出来ません。

【包装】

アイスバンド ユニバーサルホルダー 1セット/袋
アームスリング 1本/袋

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

●製造販売業者

株式会社 リレート

〒581-0087 大阪府八尾市明美町1丁目1番24号

TEL:072-940-6804

●外国製造業者

製造業者：IB メディカル社 (IB Medical AB)

国 名：スウェーデン