

機械器具 12 理学診療用器具
一般医療機器 冷却パック 37240020

アイスバンド 足首用

【禁忌・禁止】

- ・ 本品に破損、汚損が認められる場合は使用しないこと。
- ・ 寒冷アレルギー、レイノー現象（寒さなどが誘因となり起こりうる一時的な血行障害）、或いはクリオ（寒冷）グロブリン血症の患者には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

IB 4008 アイスバンド 足首用



アイスバンドには保冷剤（2個×2セット）が付属しています。

【使用目的、効能又は効果】

消炎鎮痛処置（寒冷治療）を行うパックをいう。冷却装置等で冷却媒体の入ったパックを冷却し、患部に当てるものである。

【操作方法又は使用方法等】

1. 保冷剤を冷凍庫で凍結させます。3時間程で中のジェルは凍ります。
2. 本品のポケットに保冷剤を一つずつ入れます。残り2つは、冷凍し、最初の2つが溶けた後使用して下さい。
3. 足型マークの上に足を置きます。（図1）

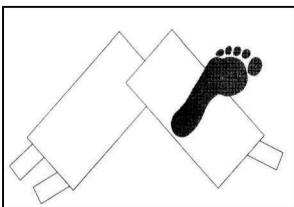


図1

4. 図2、3、4のとおりマジックテープを留め、固定します。

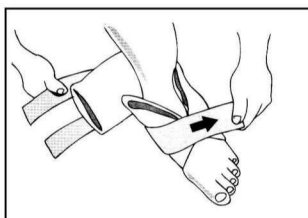


図2

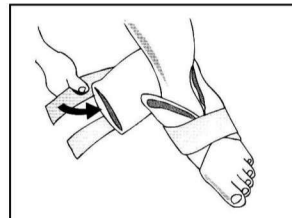


図3



図4

5. 本品は、1回につき45分から最長60分まで使用することが出来ます。
6. 保冷剤が溶けた場合、或いは冷却効果が薄れた場合は取り外して下さい。

【使用上の注意】

●重要な基本的注意

- ・ 【使用目的、効能又は効果】に記載されている使用目的以外の用途で使用しないこと。
- ・ 本品を使用して、痛み等の異常を伴った場合、使用を中止すること。
- ・ 本品はパーソナルユーズです。複数の患者で共有して使用しないこと。
- ・ プレースを洗浄しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

●保管方法

- ・ 高温、多湿、直射日光及び水濡れを避け、風通しの良い清潔な場所に保管すること。
- ・ 化学薬品の保管場所やガスが発生する場所に保管しないこと。
- ・ 包装に記載されている使用期限を確認し、使用期限を過ぎたものは廃棄すること。

●使用回数

- ・ 30回の使用を目安に廃棄すること。

【保守・点検に係る事項】

<洗浄>

- ・ 保冷剤は、表面を消毒剤で清拭する若しくは食器洗浄機（65℃以下）で洗浄することが出来ます。プレースは洗浄出来ません。

【包装】

1セット/袋

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

●製造販売業者

株式会社 リレート
〒581-0087 大阪府八尾市明美町1丁目1番24号
TEL: 072-940-6804

●外国製造業者

製造業者：IB メディカル社（IB Medical AB）
国 名：スウェーデン