


機械器具 76 医療用吸入器
一般医療機器 非加熱式ネブライザ 35457000

エアロライフ2

患者回路セット

【形状・構造及び原理等】

構成

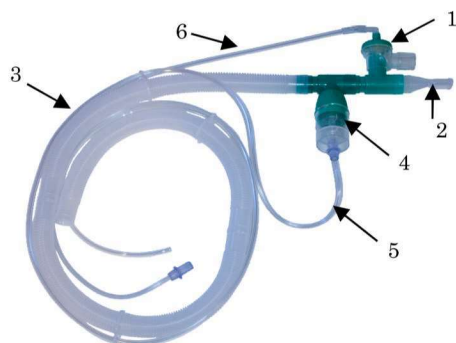

- 医師の処方に従い、薬液を患者回路の薬剤容器に入れる。
- 装置のメインケーブルをコンセントに差し込み、電源スイッチを ON にする。
- 処方パラメータの設定
- 陽圧呼吸の開始
 - ①マウスピースを口にくわえさせる。患者の吸気努力の後に、陽圧調整ノブで設定した陽圧が患者に送気され、その後、装置は呼気の状態に切り替わる。
 - ②患者の鼻からエアが漏れていないことを確認する。漏れているようならノーズクリップを取り付ける。
- 陽圧呼吸の終了
マウスピースを取り外し、装置の電源スイッチを OFF にする。
- 患者回路の取り外し
使用後は直ちに装置から患者回路を取り外す。

No.	名 称	機 能
1	呼気弁	患者の吸気を検出し呼気と切り替える。
2	マウスピース	患者に接続する。
3	チューブ	エアロライフ 2 本体と患者を接続する。
4	薬剤容器	噴霧する薬剤を充填する。
5	噴霧用コントロールチューブ	噴霧用のエアを供給する。
6	呼気弁用コントロールチューブ	患者の呼気を装置に伝達する。

●血液・体液等に接触のある原材料
本品のマウスピースはポリプロピレン（可塑性）でできている。

●原理

本品は患者の吸気努力を検出し、予め設定された圧力の空気を患者の肺に送り込み、換気に必要な圧力に達すると自動的に呼気へと切り替わり、呼吸器系に疾患のある患者は規則的に深く呼吸することが可能となる。これと同時にエアゾールを患者回路中に噴霧し吸入療法を行う。

【使用目的又は効果】

患者に吸入させるため、エアロゾル化した水または医薬品を供給する装置をいう。エアロゾルを発生させる酸素又は空気源、医薬品のリザーバ、バッフル、コンプレッサを内蔵する。

【使用方法等】

本品は、メディキャップ社製エアロライフ 2 と併用する。

●使用方法

1. 患者回路セットの組立

患者回路及び各チューブをエアロライフ 2 の各接続口に接続する。

【使用上の注意】

- 使用方法等に関連する使用上の注意
 - ・全てのコード・チューブなどの接続が完全であることを確認すること。
 - ・機器及び患者に異常が発見された場合には、患者に安全な状態で機器の作動を止めるなど適切な処置を講ずること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・水のかからない場所に保管すること。
- ・気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、硫黄分などを含んだ空気などにより、悪影響の生ずるおそれのない場所に保管すること。
- ・傾斜、振動、衝撃など安定状態に注意すること。
- ・化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所に保管しないこと。

●使用期限

本品の包装に記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

●製造販売業者

株式会社 リレート

〒581-0087 大阪府八尾市明美町1丁目1番24号

TEL：072-940-6804

●外国製造業者

業者名：メディキャップ社 (Medicap Homecare GmbH)

国 名：ドイツ