

管理医療機器

機械器具(06) 呼吸補助器
加熱式加湿器

(12050000)

特定保守管理医療機器

レスメド Lumis HFT の付属品
低圧酸素コネクタ

【警告】

- ・ 本品の使用中は、2m 以内の場所に火を近づけたり、喫煙したりしないこと。[酸素使用中の裸火及び喫煙は、本品への引火、及び着衣への着火の原因となり、火災、火傷及び死亡につながるおそれがあるため。]
- ・ 本品を用いた治療の開始前は、装置本体への酸素供給を停止したままにしておくこと。[装置本体及び本品内に酸素が滞留すると、火災の原因になるおそれがあるため。]
- ・ 装置本体の乾燥モードが開始される前に、装置本体への酸素供給を停止すること。[装置本体及び本品内に酸素が滞留すると、火災の原因になるおそれがあるため。]

【禁忌・禁止】

1. 使用方法

- ・ Lumis HFT との併用時における生命維持目的での使用。[Lumis HFT は生命維持装置として用いることを目的としていないため。]
- ・ Lumis HFT との併用時における自発呼吸のない患者への使用。

【形状、構造及び原理等】

1. 概要

酸素供給源から送気される酸素を、本品を介して装置本体に供給するためのコネクタである。

2. 外観図



型番:24971

【使用目的又は効果】

患者への供給ガスを加温及び加湿すること。

【本品の使用目的】


酸素供給源から送気される酸素を、本品を介して装置本体に供給する。

【使用方法等】


併用する装置本体の注意事項等情報(電子版の医療機器添付文書)を参照。

1. 本品の取り外し方

- 1) 装置本体の低圧酸素接続口下部にある釦を押し上げる。

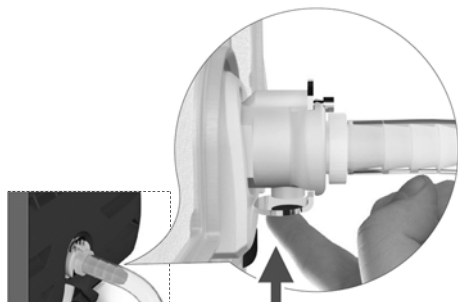

- 2) 本品を引き抜く。

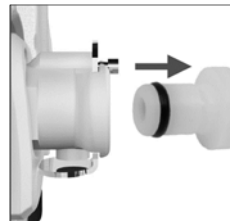

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- ・ 本品に接続する酸素供給源は、医療用のものを使用すること。
- ・ Lumis HFT との併用時、酸素は必ず本品を介して低圧酸素接続口から供給すること。[コネクタ等を利用して他の箇所から供給すると、送気されるエアの流量、温度及び湿度に影響するため。]

【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管上の注意事項

直射日光を避け、乾燥した涼しい場所で保管すること

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:レスメド株式会社

電話番号:03-5829-4410

製造業者:ResMed Pty Ltd (レスメド ピーティーワイ リミテッド)

国名:オーストラリア



社内管理用 (N07P13-1)

装置本体の取扱説明書を必ず参照すること。