

医療用品 04 整形用品

一般医療機器 家庭用遠赤外線血行促進用衣（コード：71105001）

VITA REGENA ORIGINAL（ヴィタ レジーナ オリジナル）

【禁忌・禁止】

- ・着用部位に発疹・紅斑・かゆみ・痛み・しびれなどの異常症状が現れた場合は、直ちに使用を中止してください。
- ・心臓病、アトピー性皮膚炎または金属アレルギーのある方は使用しないでください。
- ・感染部位、出血中または出血リスクのある部位へ使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

男性用長袖シャツ

部位	サイズ	S	M	L	LL
着丈		66	69	72	75
肩幅		43.2	45.6	48.0	50.4
身幅		52	55	58	61
袖丈		58.4	59.2	60.0	60.8



女性用長袖シャツ

部位	サイズ	S	M	L	LL
着丈		62.5	65.0	67.5	70.0
肩幅		45.6	48.0	50.4	52.8
身幅		50.0	53.0	56.0	59.0
袖丈		50.5	52.0	53.5	55.0



男性用半袖シャツ

部位	サイズ	S	M	L	LL
着丈		66	69	72	75
肩幅		43.2	45.6	48.0	50.4
身幅		52	55	58	61
袖丈		23.4	24.2	25.0	25.8



女性用半袖シャツ

部位	サイズ	S	M	L	LL
着丈		61.5	64.0	66.5	69.0
肩幅		44.6	47.0	49.4	51.8
身幅		51	54	57	60
袖丈		22	23	24	25




レディースワンピース

部位	サイズ	S	M	L
着丈		94	100	106
肩幅		46	47	48
身幅		54	56	58
袖丈		19.5	20.0	20.5




男性用長ズボン

部位	サイズ	S	M	L	LL
ウエスト		69	75	81	87
ヒップ		97	103	109	115
股上		29	30	31	32
股下		66	68	70	72
裾幅		20	21	22	23

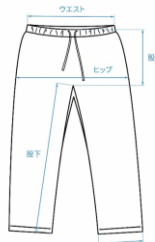

女性用長ズボン

部位	サイズ	S	M	L	LL
ウエスト		62	68	74	80
ヒップ		94	100	106	112
股上		29	30	31	32
股下		63	64	65	66
裾幅		22.5	23.5	24.5	25.5

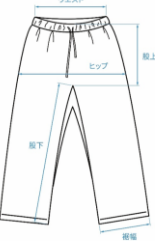

男性用半ズボン

部位	サイズ	S	M	L	LL
ウエスト		68	74	80	86
ヒップ		100	106	112	118
股上		29	30	31	32
股下		22	23	24	25
裾幅		25.9	27.5	29.0	30.6



女性用半ズボン

部位	サイズ	S	M	L	LL
ウエスト		62	68	74	80
ヒップ		100	106	112	118
股上		29	30	31	32
股下		15	16	17	18
裾幅		31.3	33.0	34.7	36.5



2. 原理

本品は、原材料繊維に複合金属、溶岩鉱物等を定着させる加工が施されている。身体から放出される体熱を伝導、吸収して遠赤外線の波長を放出（輻射）し、遠赤外線の血行促進作用により疲労や筋肉のコリ等の症状改善を行うことを目的とした、衣類形状の医療機器である。

3. 原材料

主な材料：リヨセル、ポリエステル

【使用目的又は効果】

遠赤外線の血行促進作用による効果

- ・ 血行促進
- ・ 筋肉のコリ改善
- ・ 疲労の回復、改善
- ・ 筋肉の疲れを軽減

【使用方法等】

1. 使用前

製品に破損（糸のほつれ、破れなど）や異物の付着がないか確認する。異常が見つかった場合は使用しないこと。

2. 使用方法

- (1) 衣類として肌へ直接着用する。
- (2) 日常の活動中、休養中、運動後、または就寝時に着用する。
- (3) 効果は個人差があるため、20 日間以上の長期着用が望ましい。
- (4) 製品が上下に分かれている場合は、セットで着用することを推奨する。
- (5) 睡眠時の着用は、発汗作用を高めるため、十分な水分補給を行うこと。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 使用者の体型に合ったサイズを選択してください。小さすぎるサイズは血流を妨げる過度な圧迫の原因となるため、避けてください。
2. 治療中の方、妊娠中の方（特に妊娠初期・産後間もない方）、原材料にアレルギーのある方、糖尿病による重度の末梢循環障害や知覚障害のある方、発熱（38℃以上）がある方は、使用前に必ず医師にご相談ください。
3. 自力で着脱できない方に使用する場合は、家族または医療従事者が注意深く観察してください。
4. 本製品を使用すると、ペースメーカーや腕時計などの精密機器に影響を及ぼす可能性があります。

＜お手入れに係る注意＞

5. 開封時や初回使用時に、破損など製品の異常を発見した場合は、使用を中止し、販売元へ連絡してください。
6. 洗濯ネットを使用し、プリント面を裏返して洗濯してください。
7. 初回着用前に一度洗濯することをお勧めします。
8. 色落ちする場合があるため、他の衣類と分けて洗濯してください。
9. 中性洗剤を使用し、蛍光増白剤・漂白剤・柔軟剤が含まれる洗剤の使用は避けてください。
10. プリント部分の揉み洗いは避けてください。耐用期間が短くなる原因となります。

11. 洗濯後はすぐに脱水し、形を整えて陰干ししてください。長時間水に浸けたまま放置しないでください。
12. 収縮や毛玉の原因となるため、タンブル乾燥はしないでください。
13. シワを防ぐため、ハンガーにつるして保管してください。
14. プリント・刺繍部分へのアイロンがけは避けてください。アイロンがけまたはスチームアイロンが禁止の製品もございます。
15. 毛玉取りを除き、裁断・加工・自己補修はしないでください。
16. エアコンや暖房機器の風が直接当たる場所への保管は避けてください。変色や変形の原因となります。
17. 引っ掛けによる糸引きを防ぐため、鋭利な物から離して保管してください。

＜取扱い上の注意＞

18. 電子レンジで加熱することは絶対に禁止です。
19. 火気に近づけると繊維が溶けたり、引火するおそれがあるのでご注意ください。
20. 湿気や日光（紫外線）の影響や、長期使用により素材が経年劣化して伸びが生じる場合があるのでご注意ください。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

1. 直射日光、高温および多湿を避けて室温で保管する。
2. 長期間使用しない場合は完全に乾かした後、湿気の少ない場所で保管する。

＜耐用期間＞

2 年（この期間は目安であり、使用状況により異なる）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 Rocket Emergency Solutions 株式会社
電 話 050-3198-5526

製造業者 Green Energy Nano Technology Co., Ltd.（台湾）