

2025年11月(第1版)

医療用品04 整形用品
一般医療機器 家庭用遠赤外線血行促進用衣(71105001)

ワコール & RECOVERY カップ付きTシャツ

【禁忌・禁止】

以下の部位には使用しないでください。

(1) 感染部位

[血管拡張と血流増加が、炎症、かゆみ・かぶれを悪化させる恐れがあります。]


(2) 出血部位又は出血の可能性がある部位

[血管拡張が出血の増大又は出血を引き起こす恐れがあります。]

(3) その他医師が不適当と判断した部位

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造〔寸法(単位:cm)〕

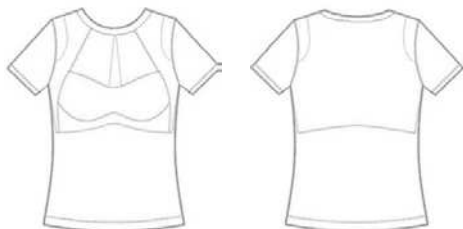

	M	L	LL
バスト	79~87	86~94	93~101

2. 原材料

身生地:ポリエステル*,レーヨン

裏打ち:ポリエステル*,ポリウレタン

*アースメディカルパウダーを含む。

アースメディカルパウダーは、数種類の金属を含む微細粒子です。

3. 原理

ポリエステル繊維に含まれるアースメディカルパウダーが遠赤外線を輻射し、遠赤外線の血行促進作用により疲労や筋肉のこり等の症状改善を行います。

【使用目的又は効果】

遠赤外線の血行促進作用により疲労や筋肉のこり等の症状を改善します。

- ・血行促進
- ・疲労回復
- ・筋肉のこり緩和

【使用方法等】

1. 本品を衣服として直接肌に着用してください。
2. 本品は再使用が可能です。

【使用上の注意】

1. 治療中の方や下記に該当する場合は、必ず医師又は専門家と相談の上ご使用ください。
 - (1) 妊娠初期の不安定期又は出産直後の方
 - (2) 糖尿病等による高度な末梢循環障害および知覚障害のある方
 - (3) 急性損傷や急性炎症がある方
 - (4) 血栓性静脈炎の疑いのある部位
 - (5) 悪性腫瘍組織又はその周辺の部位
 - (6) 局所性刺激製剤を使用した部位
 - (7) 重度の浮腫がある方
 - (8) 体温が38℃以上(有熱期)の方
 - (9) 血行促進作用のある薬を服用している場合
2. 使用中に異常を感じた場合には、直ちに使用を中止してください。
3. 患部に発疹、かゆみ、赤みなどが現れた場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
4. しばらく使用して効果が現れない場合は、医師などの専門家に相談してください。
5. 本品を改造しないでください。
6. お手入れの方法は取扱い表示にしたがってください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
直射日光と高温多湿を避けて保管してください。
2. 耐用期間
3年

【取扱い上の注意】

本品は繰り返し使用可能ですが、素材の特性上、湿気や日光(紫外線)の影響を受けたり、長期の使用による経年劣化が生じたりする場合がありますのでご注意ください。

【保守・点検に係る事項】

使用前の製品に異常が見られた場合は、使用せず、弊社のお客センターまでご連絡ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:株式会社ワコール

お問い合わせ先:ワコールお客様センター

<https://www.wacoal.jp/support/>

フリーダイヤル 0120-307-056

営業時間 9:30~17:00(土・日・祝日・年末年始をのぞく)

〒601-8530 京都市南区吉祥院中島町29

製造業者:株式会社ワコールマニュファクチャリングジャパン
福井坂井ファクトリー