

※2023 年 4 月（第三版）
2017 年 11 月（第二版）[新記載要項に基づく改訂]
2013 年 7 月（初版）


医療機器届出番号：27B1X00122000018

機械器具 68 印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器 歯科印象採得用トレー 16350000

トッテちゃん

【形状・構造及び原理等】

[形状]

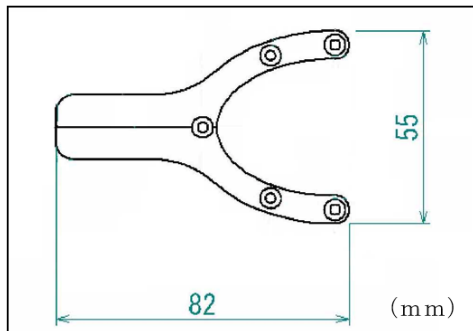

[外観写真]



[材料]

純チタン

【使用目的又は効果】

印象採得時に、印象材を盛り、保持し、圧接するために用いる器具の一部として使用。

【使用方法等】

[使用方法]

1. 常温重合レジン等でトレーのベースを作製



2. ベース上に咬合平面を想定しながら本品を取り付ける



3. 印象材をトレーに乗せ、印象の採得を行う

4. 石膏を注入し模型を作製する
5. 使用後は必ず洗浄、滅菌を行う

【使用上の注意】

1. 歯科医療有資格者以外が使用しないこと。
2. 記載の使用目的以外には使用しないこと。
3. 使用前に外観確認を行い、汚れ、腐食、損傷等の異常がない事を確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

1. 高温・多湿を避け、清潔な場所で保管する。
2. 本品は、歯科の医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

和田精密歯研株式会社
大阪府大阪市東淀川区西淡路 3-15-46
06-6321-8551

取扱説明書を必ずご参照ください。