

・2017 年 7 月（第二版）

2017 年 5 月（初版）

承認番号等：27B1X00122000031

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科用インプラント手術器具 70965001

EZ ストッパー


【禁忌・禁止】

不適切なサイズのドリルストッパーを用いないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 和田精密歯研株式会社
住 所： 大阪府大阪市東淀川区西淡路 5-7-16
製 造 業 者： Applied Dental Inc.
アップライデントタル（アメリカ合衆国）

【形状・構造及び原理等】

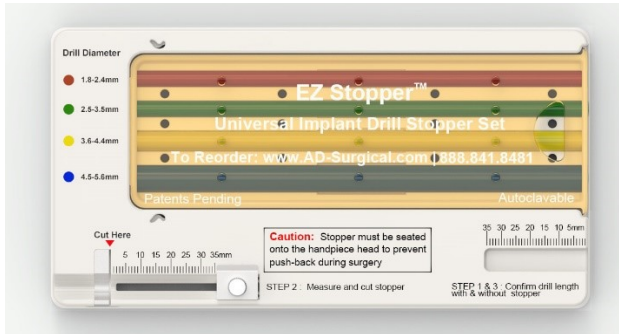

【構成品】

1. 滅菌対応トレイ
2. ドリルストッパー赤（シリコン）φ1.8・2.4mm 用
3. ドリルストッパー緑（シリコン）φ2.5・3.4mm 用
4. ドリルストッパー黄（シリコン）φ3.5・4.4mm 用
5. ドリルストッパー青（シリコン）φ4.5・5.6mm 用

【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの外科手術時に使用し、同一口腔内であれば再使用可能。

【使用方法等】

【使用方法】

1. CT 画像と臨床評価に基づいて正確なドリル深度を決定する。
2. 滅菌対応トレイの左側の測定定規を使用して正確な長さにドリルストッパーを測り、切断する。
3. ドリル上に切断したドリルストッパーを伸ばし合わせる。手術中にドリルストッパーが押し戻されるのを防ぐためにハンドピース上全体に固定されているか確かめる。
4. 滅菌対応トレイの右側の測定定規を使用してドリルストッパーを取り付けたドリルの長さを測り、確認する。インプラント手術時のドリルストッパーとして使用する。

【滅菌方法】

1. オートクレーブ等による滅菌を行う。

【使用上の注意】

2. 使用前に外観確認を行い、汚れ、腐食、損傷等の異常がない事を確認すること。
3. 使用前に必ず洗浄・滅菌すること
4. オートクレーブ等の加熱滅菌は121℃以下の温度で行うこと。
5. インプラント手術時のドリリングは十分な注水下で行うこと。
6. ドリルストッパー装着時であっても、目視にて深度確認を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

高温・多湿・直射日光を避け、清潔な場所で保管すること。

取扱説明書を必ずご参照ください。