

（医 05）副木
一般医療機器 成形型副木（36204000）

ペルビックバインダー

再使用禁止

【警告】


救急処置の訓練を受けた者による使用とする

【禁忌・禁止】

大腿骨大転子等の目印となる骨の認識できない場合または適切な適用ができない場合は使用しない
単回使用のため再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

1. 外観 輪の状態

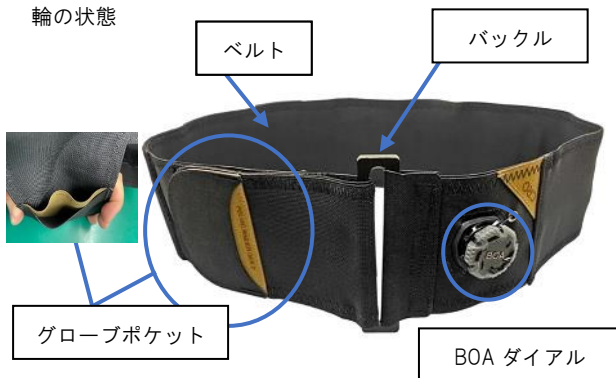

バックルから外した状態のサイズ

長辺：約 108 cm

短辺：約 10 cm

2. 原材料

構成	原材料
バックル	アルマイト処理アルミニウム
BOA ダイアル	プラスチック
ベルト	ラミネートナイロン
ベルト内のワイヤー	コーティングステンレス鋼

3. 原理


ベルトで骨盤を締め付けることで固定し安定させる。BOA ダイアルを締めるとベルト内に通っているワイヤーがベルトの締め付けをすることで、さらに骨盤が安定する。ダイアルを回すことで 33lbs (150 N) に達することが可能。

【使用目的、又は効果】


損傷した身体部位を固定するために用いる器具をいう。身体に合うよう形造る。特に骨盤固定に使用する。

【使用方法等】

使用前にベルト適用付近の患者のポケットからすべての物を取り出す。
グローブポケットに手を入れて操作することでグローブをはめたまま装着の操作が可能。ベルトの調節は 1 か所で調節できる設計。

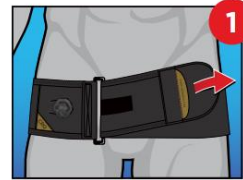

① ペルビックバインダーを大腿骨大転子の位置に滑り込ませる。BOA ダイアルが付いていない側のベルトをバックルに通す。ベルトを可能な限り引っ張り図のように装着する。

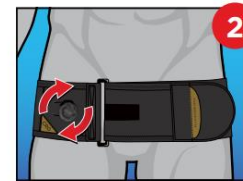

② 患者の状態をみながら BOA ダイアルを右に回す。BOA ダイアルからのカチッという音がゆっくりになるか、音がなくなるまで回す。

③ 膝が動かない様に固定する。



④ 固定を外すときは BOA ダイアルを引き上げる。ワイヤーのテンションが下がりベルトが緩くなる。（写真は引き上げた状態）

【使用上の注意】

- 適用している皮膚の状態を観察する
- MRI（磁気共鳴画像法）で使用する場合はベルトが外れない状態であることを確認する。バックルにより画像取得には影響が出る可能性がある。（CT 検査、X 線検査は可能）
- 小児に適用はできない

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

-20℃から 50℃で保管する

2. 有効期間

耐用年数の制限なし

3. 適用サイズ

ヒップサイズ：81cm ～ 127 cm

（ベルトは伸縮します）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】



〒251-0871 神奈川県藤沢市善行 7-3-5

TEL.0466-84-2485 FAX.0466-84-2484

<https://www.wako-shoji.com>

外国製造業者：CRO, LLC（アメリカ合衆国）