

医療用品 12 理学診療用器具
一般的名称: 再使用可能な止血帯 (JMDN コード: 17230000)

X8T ターニケット

再使用禁止 (訓練用は除く)

一般医療機器

【禁忌・禁止】

- ・本器の使用は、救急処置 (止血方法) の知識を持った医療従事者による使用を前提としています。
- ・血液感染の可能性があるため本品の再使用は行わないで下さい。

【形状・構造及び原理等】

<外観>*



<原理>

ハンドルを回す事で止血帯が巻き上げられ、患部に圧力を加え血流を遮断する。


<寸法・重量及びバリエーション>*



バリエーション	サイズA×B(mm)	重量
X8Tターニケット ブラック/オレンジ/ブルー(訓練用)	1520×30	119g
X8Tターニケット Gen2** ブラック/オレンジ/ブルー	1520×30	119g

誤差範囲±10%

<各部名称>*

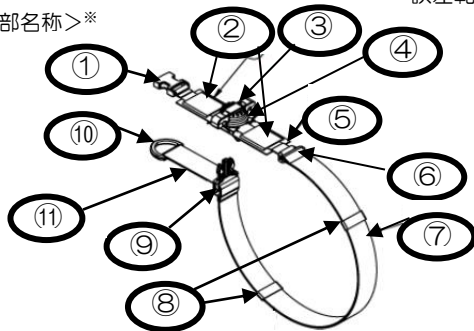

<原材料と各部名称>*

番号	名称	原材料
①	バックル (メス)	アセタール
②	メインストラップカバー	ブラック ナイロン
		オレンジ ポリプロピレン
③	巻取り部 (ハンドル)	ポリアミド66
④	巻取り部 (本体)	ポリアミド66
⑤	メインストラップ	ナイロン
⑥	レデューサーループ	ポリアセタール
⑦	ストラップ	ナイロン
⑧	ストラップキーパー	ポリエステル
⑨	バックル (オス)	アセタール
⑩	Dリング	アセタール
⑪	ラベル (※Gen2のみ) *	ポリエステル

【使用目的又は効果】

バンド状の用具で、上下肢 (腕又は脚) に装着して、循環の抑制及び遠位部への正常血流又は遠位部からの正常血流を遮断する。また、本器は単回使用である。(訓練用は除く)

【使用方法等】

<使用方法>***

- 1.包装から取り出して下さい。
- 2.使用前に本器に破損・汚染が無いか確認を行ってください。
- 3.上肢又は下肢に装着 (輪状態) して下さい。
- 4.Dリングを引っ張り、引けなくなるまで締め上げて下さい。
- 5.出血が止まるまでハンドルを時計回りに回して下さい。
- 6.取り外す際はハンドルを持ち上げて反時計回りにゆっくりと回し緩めて下さい。その後バックルを外して本器を患者から除去します。尚、止血帯の取り外しは医療機関で行うこと。




<太ももに使用する際>

- 1.バックルを分離し、バックルのオスとメスの両端を持ち、ストラップを広げて下さい。
- 2.太ももを覆うように巻付けたら、バックルを再度接続して下さい。
- 3.Dリングを引けなくなるまで引っ張り、上記の手順5に進みます。

<リセット方法>***

ハンドルを回しきったあとに再度巻きなおす場合 (リセット) は下記手順に従ってください。尚、本手順は血液感染防止の観点から訓練時のみ行うようにしてください。

- 1.バックルのハンドル部を持ち上げて外します。
- 2.ねじれがなくなるまで反時計回りに回します。

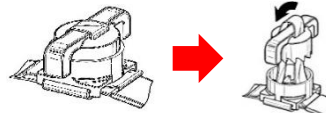

- 3.両端からストラップを引いて、ハンドルをリセットします。



- 4.リセットしても正常に動作しない場合は直ちに新品若しくは別の止血帯を使用してください。

<止血時刻の記入>*

止血を行った際は必ずラベルに止血時刻を記入して下さい。



【使用上の注意】

- 1.本器を使用する際は救急処置の知識を持った医療従事者が使用して下さい。
- 2.本器を装着する際は処置目的以外の固形物を挟まないように注意してください。
- 3.本器は-6℃未満の環境での使用に適していません。
- 4.本器は最大2時間まで連続装着可能。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- ・水濡れに注意して、直射日光をさけて清潔な場所で保管する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

「製造販売業者の名称及び住所」

株式会社 **ワコー商事**
WAKO SHOJI CO., LTD.

〒251-0871 神奈川県藤沢市善行 7-3-5

TEL.0466-84-2485/FAX.0466-84-2484

e-mail info@wako-shoji.com

URL http://www.wako-shoji.com/

「製造業者の名称及び国名」

製造会社名: Spigem Enterprise, LLC

製造先国名: アメリカ

本書は、取扱説明書を兼ねています。必ずお読み頂き大切に保管して下さい。