

類別：機械器具 55 結紮器及び縫合器
一般医療機器 一般名称：手術用創部クリップ 38144000

UPライナーホワイト

再使用禁止

【禁忌・禁止】


- 1.本品は単回使用であり、繰り返し使用しないでください
- 2.真菌感染等の原因によりもろくなった爪には使用しないでください。
- 3.金属や異物に対して重篤なアレルギーがある方には使用しないでください。【不具合、有害事象】の項を参照してください。
- 4.形状が保たれなくなりますので、極端な高温又は低温での使用は避けてください。
- 5.複数回、同じ箇所ですり曲げたりしないでください。折れることがあります。
- 6.ペンチなどで極端に折り曲げないでください。形状が保たれなくなります。
- 7.支持、固定が出来なくなるので、装着後のワイヤーに必要な力を与えないでください。

【形状・構造及び原理等】

1.概要

本品は強力な弾力性を持つ、金属製のワイヤーであり、陥入爪、巻き爪等を金属の弾力性を利用して矯正を行う創部クリップである。

* 2.形状

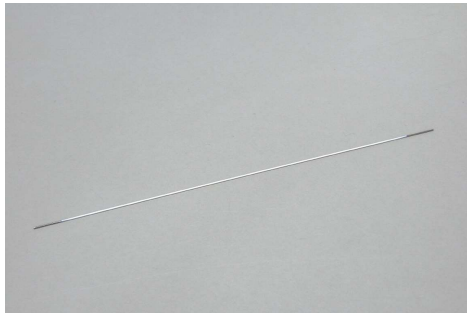

外観：表面に傷、まくれ、研磨ムラが無く滑らかであること。

3.寸法

長さ	径
100～140mm	0.35mm
100～140mm	0.40mm
100～140mm	0.45mm
100～140mm	0.5mm

径 寸法の許容誤差範囲±0.1mm以下

* 長さ 100mm+40mm,-0mm(未塗装部分 両端それぞれ30mm以下)

4.原理

本品は、爪に溝や穴を開けて、そこに通した後、適切な長さに切断し、ワイヤー本体の弾性により、爪を保持・固定する。


*【使用目的又は効果】

本品は、巻き爪または、陥入爪の矯正・補正・改善を目的とし爪を一時的に固定するために使用する。

【使用方法等】

(1.使用前)


- 1.爪(爪先)が2mm以上伸びるのを待つ。

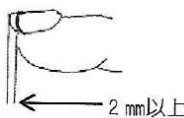

- 2.必要に応じて爪部の洗浄、消毒を行う。

(2.使用方法)

爪(爪先)に穴を2つ開けて本品を装着し、適切な長さに切断を行う。

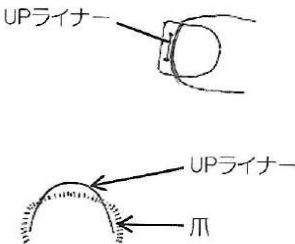

(3.使用后)

- 1～2ヶ月ごとに再装着を行う。

【使用上の注意】

- 1.装着がむずかしい形状の爪には使用しないでください。
- 2.糖尿病の方は皮膚疾患につながる恐れがある為使用しないでください。(貼るタイプのものをおすすめします)
- 3.矯正中の指が圧迫されるような靴を履かないでください。
- 4.少し過矯正になるまでワイヤーをお使いになることをお勧めします。
- 5.爪が硬い場合には、尿素軟膏を爪の表面に塗る、又は湿らす、あるいは、爪をヤスリで削るなどすれば柔らかくなります。
- 6.矯正効果が出てくるとワイヤーが爪郭部よりはみ出し、隣接する指を傷つける危険性があります。爪郭部よりはみ出したワイヤーの切断、又は隣接する指を絆創膏などで保護することをおすすめします。

7.線材を切るときに、端材が飛びやすく、又人に刺さると危険なので注意して取り扱ってください。

8.割れやすい爪の場合には、ジェルコーティングで補強して装着すると爪が割れにくくなります。

【不具合、有害事象】

〈金属、異物アレルギー反応〉

術前に、本品選択のためのアレルギーテストが必要です。異常が認められた場合は直ちに必要な処置を行ってください

【保管方法及び有効期限等】

*〈保管方法〉

常温、常湿

有効期間の設定はありません

本品は単回使用です。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:株式会社若吉製作所

住所 :〒916-0005

福井県鯖江市杉本町36号2番地

電話番号 :0778-51-2815

FAX 番号 :0778-51-1805

製造業者 :株式会社若吉製作所

住所 :同上

電話番号 :同上

FAX 番号 :同上

販売業者:株式会社 ニューヴァレースプリング

**住所 :東京都中央区佃2丁目10-9-2904号

電話番号 :03-3536-3161

FAX 番号 :03-3536-3161