

医療用品 5 副木  
一般医療機器 成形副木 35354000

## ポリネックハード

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 種類・規格


| 種 類 | 規 格         |                |
|-----|-------------|----------------|
|     | 頸 囲         | 高 さ            |
| L   | 35cm ～ 43cm | 8cm ～ 11.5cm   |
| M   | 30cm ～ 38cm | 7.5cm ～ 10.5cm |
| S   | 26cm ～ 32cm | 6.5cm ～ 8.5cm  |

#### 2. 構造

本品を構成する材料は以下の通りです。

| 構 成     | 材 料                      |
|---------|--------------------------|
| カラー（2枚） | ポリエチレン板                  |
| クッション材  | ポリウレタンシートでカバーしたポリエチレン発泡体 |
| 面ファスナー  | ポリエステル                   |
| バイアステープ | ポリエステル、綿                 |

#### <模式図>

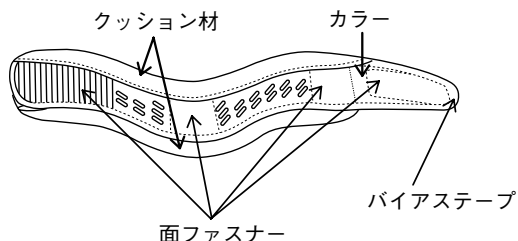

#### 3. 原理

ポリエチレン製カラーを支持体とした本品を頸部挫傷（捻挫）等の患部に沿わせることで、患部を支持する。


### 【使用目的又は効果】

頸部挫傷（捻挫）等の支持に用いられる。


### 【使用方法等】

#### 装着方法

- 1) 頸部の頸囲・高さに応じて適切なサイズの本品を選択します。
- 2) 2枚のカラーは面ファスナーで貼り合せてありますので、カラーをずらし最適な高さに調節してください。このとき2枚のカラーを接着する面ファスナーは1.5cm以上（バイアステープ部分を含む）の重なりができるようにしてください。

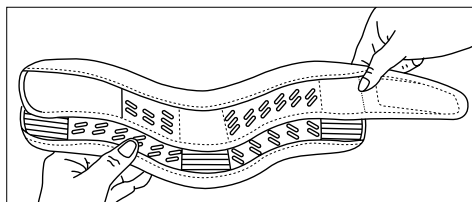

- 3) 本品を頸部に巻くようにして、頸部の後面で面ファスナーを止めてください。

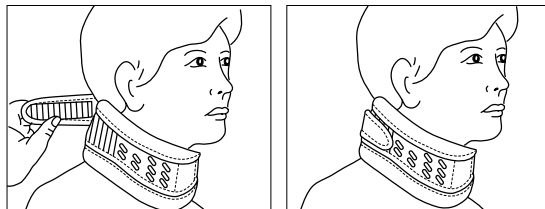

### 【使用上の注意】

#### 1. 重要な基本的注意

- 1) 本品装着時に、面ファスナー部分（2枚のカラー接着部分及び末端固定部分）が確実に固定されていることを確認してください。[本品が使用中にずれたり、外れる可能性があります。]
- 2) 本品が患部に良くフィットしているか十分確認してください。[カラーの高さが最適でない場合や、装着時に過度な締めつけ又はゆるみがある場合には、痛み、しびれ等の症状が発生する原因となります。  
なお、装着状態の調節を行っても、これらの症状に改善がみられない場合は、直ちに使用を中止し、適切な処置をしてください。]
- 3) 本品使用中に皮膚障害と思われる症状が認められた場合は、直ちに使用を中止し、適切な処置をしてください。

#### 2. その他の注意

- 1) 本品に破損、変形、汚染等がある場合は使用しないでください。
- 2) 本品に直接水がかからないようにご注意ください。本品の性能をそこなうことがあります。
- 3) 本品が汚れた場合は、柔らかい布を40℃以下の水に浸し、よく絞ってから汚れを拭き取るようにしてください。決して洗わないでください。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 1. 保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて、室温保管してください。

#### 2. 有効期間

パッケージに表示。（自己認証データによる）

### \*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

#### 1. 製造販売業者

アルケア株式会社

#### 2. 連絡先

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階  
お客様相談室： ☎ 0120-770-175