

****使用に際してはこの電子添文をよくお読みください。
また、必要な時に読めるように保管しておいてください。**

ODX12T

体外診断用医薬品

製造販売承認番号：20800AMZ00205000

**2022年12月改訂（第7版）

*2020年 9月改訂（第6版）

クラスⅢ免疫・内分泌検査用シリーズ
甲状腺ペルオキシダーゼ抗体キット

ルミパルス[®] TPOAb


■全般的な注意

1. 本試薬は、体外診断用であるため、それ以外の目的には使用しないでください。
 2. 診断の際は、本測定値以外に他の検査結果や臨床症状等もあわせて考慮し、総合的に判断してください。
 3. 本書以外の使用方法については保証を致しません。
 4. 本試薬のTPOAbキャリブレーションにはHBs抗原、HCV抗体およびHIV抗体検査陰性の原料を使用しておりますが、感染の危険性があるものとして検体同様十分に注意して取扱ってください。
 5. 本試薬および検体は、感染の危険性があるものとして十分に注意して取扱ってください。
 6. 本試薬には、保存剤としてアジ化ナトリウムが含まれています。試薬が誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合には、水で十分に洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば、医師の手当等を受けてください。
- **7. 本試薬の使用に際しては、本書とあわせ、各試薬の添付文書、使用する測定システムの電子添文および取扱説明書をご参照ください。

■形状・構造等（キットの構成）

1. 抗原結合粒子^{注1)}（使用時液状、250μL/免疫反応カートリッジ）
リコンビナントTPO抗原結合フェライト粒子を含みます。
2. 酵素標識抗体（液状、350μL/免疫反応カートリッジ）
アルカリホスファターゼ（ALP）標識抗ヒトIgGモノクローナル抗体（マウス）を含みます。

免疫反応カートリッジ

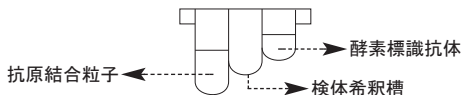

3. TPOAbキャリブレーション：3濃度×1
(1) 0IU/mL TPOAbキャリブレーション（液状、2.0mL×1）
(2) 30IU/mL TPOAbキャリブレーション（液状、2.0mL×1）
(3) 500IU/mL TPOAbキャリブレーション（液状、2.0mL×1）
4. 基質液（液状、100mL×6、50mL×6）
基質としてAMPDP^{注2)}を含みます。
ご使用の測定システムに合わせてご用意ください。
5. 洗浄液（濃縮液、1000mL×1）
6. 検体希釈液（液状、300mL×4、80mL×4）
ご使用の測定システムに合わせてご用意ください。

注1) 15℃以下の温度ではゲル化しています。

注2) AMPDP：3-(2'-spiroadamantane)-4-methoxy-4-(3'-phosphoryloxy)phenyl-1,2-dioxetane disodium salt / 3-(2'-スピロアダマンタン)-4-メトキシ-4-(3'-ホスホリルオキシ)フェニル-1,2-ジオキセタン・2ナトリウム塩


■使用目的

血清又は血漿中の抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体（抗TPO抗体）の測定

■測定原理

本試薬は2ステップサンドイッチ法に基づいた化学発光酵素免疫測定法によるTPOAb測定試薬です。

<反応プロトコール；検体希釈2ステップモード>

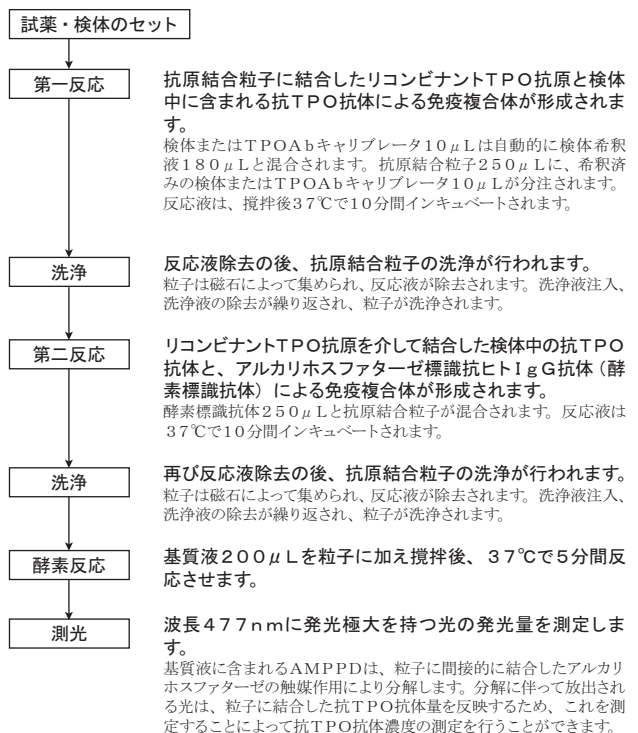

検体中の抗TPO抗体濃度が測定範囲を超えた場合は、必要に応じて検体希釈液を用いて検体を希釈し再測定してください。

■操作上の注意

1. 測定検体の性質、採取法

- ** (1) 検体の採取は使用する採血管の電子添文をよく確認し、指定された方法（採血量、遠心分離方法など）により採取してください。
- (2) 検体は、血清、血漿いずれでも測定できます。
- (3) 可能な限り新鮮な検体を用い、保存する場合は-20℃以下で凍結保存してください。
- (4) 検体を繰り返し凍結融解することは避けてください。
- (5) 赤血球・その他の有形成分、沈殿物、浮遊物が含まれている検体では、測定値に影響を与える場合があります。正しい結果が得られるように遠心または除去した後に使用してください。
- (6) 検体間の汚染が生じないように検体は注意して取扱ってください。
- (7) 非働化した検体は使用しないでください。
- (8) 検体に抗凝固剤（EDTA・ニカリウム、クエン酸ナトリウム、ヘパリンナトリウム）を添加して試験した結果、それぞれ10mg/mL、38mg/mL、100U/mLまで測定値に影響は認められませんが、液状の抗凝固剤を用いる場合は、検体の希釈率にご注意ください。

2. 妨害物質・妨害薬剤

検体にビリルビンF、ビリルビンC、ヘモグロビンを添加して試験した結果、それぞれ18.2mg/dL、19.6mg/dL、460mg/dLまで、測定値に影響は認められませんでした。また、乳ビに関しても、2400ホルマジン濁度まで測定値に影響は認められませんでした。

3. その他

本試薬は全自動化学発光酵素免疫測定システム（代表例：ルミパルス G1200）用試薬です。

■用法・用量（操作方法）

1. 試薬の調製法

- (1) 抗原結合粒子および酵素標識抗体
免疫反応カートリッジには抗原結合粒子および酵素標識抗体が充填されています。カートリッジケースの透明フィルムを剥がし、そのまま使用します。
 - ・免疫反応カートリッジを取扱う際に、振動を加えたり、逆さまにしたりしないでください。
 - ・免疫反応カートリッジを装置にセットする際は、カートリッジケースの透明フィルムを必ず剥がしてください。剥がし忘れや剥がし残りがある場合、装置の動作異常の原因となります。
 - ・試薬項目および試薬ロットはカートリッジケースのバーコードによって管理されています。カートリッジケース間の免疫反応カートリ

ツジの入れ替えは試薬の誤認識に繋がる可能性がありますので行わないでください。

- (2) T P O A b キャリブレータ
- 常温（15～25℃）に戻してから軽く転倒混和して使用します。
- デッドボリュームを考慮して、サンプルカップに必要量を滴下します。
- ・溶液1滴あたりのおよその滴下量は45μLです。滴下量は容器を押す強さや気泡の混入によって変動します。滴下の際に液滴の中に気泡が多量に混入する場合は、残量が僅かですので新しい試薬を使用してください。サンプルカップに泡が残りますとサンプリング不良の原因になる場合があります。
 - ・デッドボリュームはご使用の測定システムによって異なりますので各測定システムの取扱説明書をご覧ください。
 - 一例としてルミパルス G1200でサンプルカップをご使用の場合、デッドボリュームは100μLとなります。
 - ・T P O A b キャリブレータは、免疫反応カートリッジと同一ロットのものを使用してください。

- (3) 基質液
- 冷蔵庫から出してそのまま使用します。
- ・基質液の漏れがないように装置にセットしてください。
 - ・基質液を装置にセットした後は、基質液交換時まで取外しは避けてください。基質液の注ぎ足しはしないでください。基質液がアルカリホスファターゼ（ALP）に汚染されますと使用できません。手指が直接基質液に触れた場合は、廃棄してください。
- (4) 洗浄液
- 濃縮液のため精製水で10倍に希釈し、よく攪拌します。希釈した洗浄液は、常温（15～25℃）に戻してから使用します。
- (5) 検体希釈液
- 15～30℃に戻してからそのまま使用します。
- ルミパルス G1200にセットする場合は、冷蔵庫から出してそのまま使用してください。

2. 必要な器具・器材

- (1) マイクロピペット、サンプリングチップおよびサンプルカップ
- (2) 全自動化学発光酵素免疫測定システム
- ** (3) Sero Lumipulse IA Control（別売品）
- 精度管理用試料として、Sero Lumipulse IA Controlを推奨いたします。使用に際しては、Sero Lumipulse IA Controlの取扱説明書を参照してください。

3. 測定法

- (1) 測定システムの取扱説明書を参照し、検体および測定に必要な試薬を所定の位置にセットしてください。（サンプルの最少必要量は、使用する容器や測定システムによって異なりますので、各測定システムの取扱説明書をご覧ください。）
- (2) T P O A b キャリブレータおよび検体の測定依頼内容をそれぞれ入力します。
- (3) 測定を開始する前に、免疫反応カートリッジ、基質液、洗浄液、検体希釈液、サンプリングチップの残量を確認します。
- (4) スタートキーを押し、測定を開始します。装置内で自動的に実行される動作については測定原理の「反応プロトコル」の項をご参照ください。

4. 濃度の算出法

マスターキャリブレーションデータは、免疫反応カートリッジケースの2次元バーコードに記録されています。検体中の抗TPO抗体濃度は、T P O A b キャリブレータの発光量をもとに校正された検量線から自動的に算出されます。また複数装置をお使いの場合は1台ごとに検量線を作成してください。

T P O A b キャリブレータの測定は以下の場合に行います。

- ・免疫反応カートリッジが、新しいロットに切り替わった場合。
- ・検量線を更新後、30日が経過した場合。

上記以外においても必要が生じた場合は、T P O A b キャリブレータを測定し、検量線を更新してください。

検体中の抗TPO抗体濃度が、500 IU/mLを超えた場合は、必要に応じて検体希釈液を用いて希釈し、再測定してください。

■測定結果の判定法

*1. 参考基準範囲

参考基準範囲（カットオフ値）：3.2 IU/mL未満¹⁾

国内検討結果¹⁾並びに自社データは以下のとおりです。

参考基準範囲（カットオフ値）	
甲状腺組織学的に橋本病所見を認めない48例と橋本病所見を認める48例によるROC解析より求めたカットオフ値は3.2 IU/mL	（文献1）
健康者303例の平均値+1.96 SDは5.2 IU/mL	（自社データ）

2. 判定上の注意

- (1) 基準範囲は、測定条件や検体によって多少異なることがありますので、各施設に適した基準範囲を設定してください。
- (2) 検体中に存在する未同定の特異反応性物質の影響により、まれに測定値が正確に得られない場合がありますので、他の検査結果や臨床症状等もあわせて考慮し、総合的に判断してください。

■臨床的意義

自己免疫性甲状腺疾患として知られるバセドウ病や橋本病の患者血清中には、高頻度に抗サイログロブリン抗体および抗マイクロゾーム抗体が検出され、これらの疾患の診断と経過観察に、臨床上有用な指標となっております。抗マイクロゾーム抗体は、甲状腺濾胞上皮細胞のマイクロゾーム分画に対する自己抗体で、補体結合性、細胞障害性を有し、甲状腺のリンパ球浸潤とよく相関することが報告され、従来より自己免疫性甲状腺疾患の診断に有用な指標とされておりました。一方、マイクロゾーム分画には数多くの抗原性物質が存在し、抗マイクロゾーム抗体検出において、その感度・特異性等の問題が指摘されておりました。近年、その主要対応抗原が、甲状腺ホルモン合成に重要な役割を担っている甲状腺ペルオキシダーゼ（TPO）であることが判明し、抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体（抗TPO抗体）測定は、抗マイクロゾーム抗体検出に代り、自己免疫性甲状腺疾患における診断マーカーとして臨床的に有用であることが報告されております²⁻⁴⁾。

本試薬は化学発光基質（AMP PD）を用いた化学発光酵素免疫測定法⁵⁾（CLEIA；chemiluminescent enzyme immunoassay）に基づく試薬です。

■性能

1. 性能

- (1) 感度
- T P O A b 溶液を所定の操作で測定するとき、30 IU/mL T P O A b キャリブレータと0 IU/mL T P O A b キャリブレータの発光量の比は31以上になります。
- (2) 正確性
- 自家管理検体3例を所定の操作で測定するとき、測定値は各管理値に対して±20%以内になります。
- (3) 同時再現性（併行精度）
- 自家管理検体を所定の操作で6回繰り返し測定するとき、変動係数（CV値）は10%以下になります。
- (4) 測定範囲
- 本試薬の測定範囲は、1 IU/mL～500 IU/mLです。

2. 相関性試験成績

- (1) 血清検体113例を使用し、既存EIA法との相関性を検討した結果、以下に示す成績が得られました。
- 測定例数：n=113
- 相関係数：r=0.938
- 回帰式：y=1.039x+3.40
- （x：既存EIA法、y：ルミパルスI T P O A b）
- (2) 同一人から採取した血清・血漿ペア検体64例（抗凝固剤：ヘパリンナトリウム）を使用し、本試薬にて相関性を検討した結果、以下に示す成績が得られました。
- 測定例数：n=64
- 相関係数：r=0.999
- 回帰式：y=1.019x-0.349
- （x：血清、y：血漿）

3. 較正用の基準物質（標準物質）

T P O A b キャリブレータの値は、NIBSC（National Institute for Biological Standards and Control）の標準物質（ANTITHYROID MICROSOME SERUM NIBSC RESEARCH STANDARD；66/387）を基準に設定されております。

■使用上又は取扱い上の注意

1. 取扱い上（危険防止）の注意

- (1) 検体はHIV、HBV、HCV等の感染の恐れがあるものとして取扱ってください。
- (2) 検査にあたっては感染の危険を避けるため使い捨て手袋を着用し、また口によるビベッティングを行わないでください。
- (3) 基質液はアルカリ性溶液（pH10）です。使用に際しては、液が皮膚に付いたり、目に入らないように注意してください。
- (4) 試薬が誤って目や口に入った場合は、水で十分に洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば、医師の手当等を受けてください。

2. 使用上の注意

- ** (1) 使用に際しては本書、使用する測定システムの電子添文および取扱説明書に従ってください。
- (2) 免疫反応カートリッジセット（抗原結合粒子・酵素標識抗体、T P O A b キャリブレータ）、基質液、洗浄液、検体希釈液は個別に包装されていますので、ご使用の測定システムに合わせ、組み合わせて使用してください。
- (3) 使用期限を過ぎた試薬は使用しないでください。各構成試薬外箱および容器の表示をご確認のうえ使用してください。
- (4) サンプリングチップ、サンプルカップは、使用する測定システム指定のものを使用してください。
- (5) サンプリングチップ、サンプルカップは常に新しいものを使用してください。
- (6) 試薬は保存条件を守って使用してください。特に凍結しないように注意してください。
- (7) 保管に冷蔵庫をご使用の場合、庫内のファンからの風が直接あたる場所および庫内最下部での保管は、温度変化により水分蒸発の原因となりますので避けてください。
- (8) 検体およびT P O A b キャリブレータは蒸発による濃縮を考慮し、サンプルの準備後は速やかに測定を開始してください。
- (9) 正確な測定を行うために、精製水は常に新しいものを使用してください。
- (10) T P O A b キャリブレータはわずかに沈殿が生じる場合がありますが、試薬性能には影響はありません。

- (11) ソーダライムは交換せずに長期間使用を続けると、二酸化炭素の吸収力が低下します。また基質キャップパッキンも交換せずに長期間使用を続けると密閉性が失われ基質液を劣化させる原因となります。ソーダライムと基質キャップパッキンの交換時期についてはご使用の測定システムの取扱説明書をご覧ください。

3. 廃棄上の注意

- * (1) 各試薬には保存剤として以下のとおりアジ化ナトリウムが含まれています。廃棄する際は爆発性の金属アジドが生成されないように多量の水とともに流してください。また、酸と反応して有毒性のガスを発生する恐れがありますので、酸との接触を避けて廃棄してください。
洗浄液：1.0%（希釈調製前）、基質液：0.05%
抗原結合粒子、酵素標識抗体、TPOAbキャリブレータ、検体希釈液：0.1%
- (2) 試薬および容器等を廃棄する場合は、廃棄物に関する規定に従って、医療廃棄物または産業廃棄物等区別して処理してください。
- (3) 廃液の廃棄にあたっては、水質汚濁防止法などの規制に従って処理してください。
- (4) 使用した器具（ビペット、試験管等）、廃液、サンプリングチップ等は、次亜塩素酸ナトリウム（有効塩素濃度1000ppm、1時間以上浸漬）、グルタルアルデヒド（2%、1時間以上浸漬）等による消毒処理あるいは、オートクレーブ（121℃、20分以上）による滅菌処理を行ってください。
- (5) 検体、廃液等が飛散した場合には次亜塩素酸ナトリウム（有効塩素濃度1000ppm、1時間以上浸漬）、グルタルアルデヒド（2%、1時間以上浸漬）等によるふき取りと消毒を行ってください。
- (6) 消毒処理に使用する次亜塩素酸ナトリウム溶液、グルタルアルデヒド溶液が、皮膚についたり、目に入らないように注意してください。

■貯蔵方法・有効期間

抗原結合粒子	2～10℃に保存	有効期間：9ヵ月
酵素標識抗体	2～10℃に保存	有効期間：9ヵ月
TPOAbキャリブレータ	2～10℃に保存	有効期間：9ヵ月
基質液	2～10℃に保存	有効期間：9ヵ月
洗浄液	2～10℃に保存	有効期間：9ヵ月
検体希釈液	2～10℃に保存	有効期間：9ヵ月

使用期限については、各構成試薬の外箱および容器の表示をご参照ください。

■包装単位

個別包装

ご使用の測定システムに合わせてご用意ください。

コードNo.	品名	包装
292884	ルミパルス I TPOAb 免疫反応カートリッジセット (抗原結合粒子・酵素標識抗体・ TPOAbキャリブレータ)	14テスト×3
219973	ルミパルス 基質液 (共通試薬)	100mL×6
292600	ルミパルス 基質液 (共通試薬)	50mL×6
219942	ルミパルス 洗浄液 (共通試薬)	1000mL×1
219935	ルミパルス 検体希釈液 (共通試薬)	300mL×4
292617	ルミパルス 検体希釈液 (共通試薬)	80mL×4

**その他

Sero Lumipulse IA Control
2濃度×6(各3mL×6)(コードNo.206805)

■主要文献

1. 矢野美沙紀, 他. 化学発光酵素免疫測定法によるルミパルス甲状腺関連項目 (TSH-III, FT₃-III, FT₄-N, およびルミパルス I TgAb, TPOAb) の性能評価. 医学と薬学, 77: 805-814, 2020.
2. 戸井田晋, 小林功. サイログロブリン抗体、マイクロゾーム抗体測定の臨床的意義. ホルモンと臨床, 43: 1107 ~ 1115, 1995.
3. Beever K, et al. Highly Sensitive Assays of Autoantibodies to Thyroglobulin and to Thyroid Peroxidase. Clin Chem, 35: 1949 ~ 1954, 1989.
4. 吉村弘, 他. 化学発光酵素免疫測定法による抗サイログロブリン抗体および抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体測定キットの臨床的検討. 医学と薬学, 44: 569 ~ 573, 2000.
5. Nishizono I, et al. Rapid and sensitive chemiluminescent enzyme immunoassay for measuring tumor markers. Clin Chem, 37: 1639 ~ 1644, 1991.

■問い合わせ先

富士レビオ株式会社 お客様コールセンター
TEL：0120-292-832

■製造販売元

富士レビオ株式会社
**神奈川県相模原市中央区田名塩田1丁目3番14号

