*使用に際してはこの電子添文をよくお読みください。

８ＸＸ０５Ｔ

**2026年9月改訂（第3版）
*2023年3月改訂（第2版）

体外診断用医薬品

製造販売認証番号：231AAEZX00009000

２５-ヒドロキシビタミンDキット

ルミパルス® 25-OHビタミンD


■全般的な注意

1. 本試薬は、体外診断用であるため、それ以外の目的には使用しないでください。
2. 診断の際は、本測定値以外に他の検査結果や臨床症状等に基づいて総合的に判断してください。
3. 本書以外の使用方法については保証を致しません。
4. 本試薬および検体は、感染の危険性があるものとして十分に注意して取扱ってください。
5. 本試薬には、保存剤としてアジ化ナトリウムが含まれています。試薬が誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合には、水で十分に洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば、医師の手当等を受けてください。

*6. 本試薬の使用に際しては、本書とあわせ、各試薬の添付文書、使用する測定システムの電子添文および取扱説明書をご参照ください。

■形状・構造等（キットの構成）

1. 抗体結合粒子[注1)]（使用時液状、２５０μＬ/免疫反応カートリッジ）
   抗２５－ＯＨビタミンDモノクローナル抗体（ヒツジ）結合フェライト粒子を含みます。
2. 酵素標識抗体（液状、３２０μＬ/免疫反応カートリッジ）
   アルカリホスファターゼ（ＡＬＰ）標識抗２５－ＯＨビタミンD免疫複合体モノクローナル抗体（ニワトリ）を含みます。

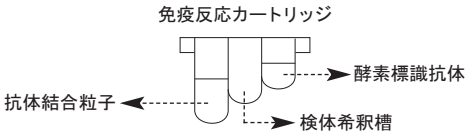

3. 標準２５－ＯＨビタミンD溶液：６濃度×１
   CAL 1 標準２５－ＯＨビタミンD溶液　濃度１（液状、１.５ｍＬ×１）
   CAL 2 標準２５－ＯＨビタミンD溶液　濃度２（液状、１.５ｍＬ×１）
   CAL 3 標準２５－ＯＨビタミンD溶液　濃度３（液状、１.５ｍＬ×１）
   CAL 4 標準２５－ＯＨビタミンD溶液　濃度４（液状、１.５ｍＬ×１）
   CAL 5 標準２５－ＯＨビタミンD溶液　濃度５（液状、１.５ｍＬ×１）
   CAL 6 標準２５－ＯＨビタミンD溶液　濃度６（液状、１.５ｍＬ×１）
   ※濃度は容器ラベルをご参照ください。
4. 基質液（液状、１００ｍＬ×６、５０ｍＬ×６）
   基質としてAMPPD[注2)]を含みます。
   ご使用の測定システムに合わせてご用意ください。
5. 洗浄液（濃縮液、１０００ｍＬ×１）

**6. 洗浄液－Ｎ（濃縮液、１０００ｍＬ×１、２０００ｍＬ×１）
   洗浄液または洗浄液－Ｎをご用意ください。
7. 検体希釈液（液状、３００ｍＬ×４、８０ｍＬ×４）
   ご使用の測定システムに合わせてご用意ください。

注１）１５℃以下の温度ではゲル化しています。
注２）AMPPD：3-(2'-spiroadamantane)-4-methoxy-4-(3''-phosphoryloxy)phenyl-1,2-dioxetane disodium salt / 3-(2'-スピロアダマンタン)-4-メトキシ-4-(3''-ホスホリルオキシ) フェニル-1,2-ジオキセタン・２ナトリウム塩

■使用目的

血清又は血漿中の２５－ヒドロキシビタミンD（２５－ＯＨビタミンD）濃度の測定

■測定原理

本試薬は２ステップサンドイッチ法に基づいた化学発光酵素免疫測定法による２５－ＯＨビタミンD測定試薬です。

＜反応プロトコール；検体希釈２ステップモード＞

試薬・検体のセット

第一反応
抗体結合粒子に結合した抗２５－ＯＨビタミンD抗体と、検体中に含まれる２５－ＯＨビタミンDによる免疫複合体が形成されます。
検体または標準２５－ＯＨビタミンD溶液２０μＬは自動的に検体希釈液１８０μＬと混合されます。抗２５－ＯＨビタミンD抗体が結合した抗体結合粒子２５０μＬに、希釈済みの検体または標準２５－ＯＨビタミンD溶液２０μＬが分注されます。反応液は、撹拌後３７℃で１０分間インキュベートされます。

洗浄
反応液除去の後、抗体結合粒子の洗浄が行われます。
** 粒子は磁石によって集められ、反応液が除去されます。洗浄液または洗浄液－Ｎの注入と除去が繰り返され、粒子が洗浄されます。

第二反応
２５－ＯＨビタミンD/抗２５－ＯＨビタミンDモノクローナル抗体の免疫複合体とアルカリホスファターゼ標識抗２５－ＯＨビタミンD免疫複合体モノクローナル抗体（酵素標識抗体）による免疫複合体が形成されます。
酵素標識抗体２５０μＬと抗体結合粒子が混合されます。反応液は３７℃で１０分間インキュベートされます。

洗浄
再び反応液除去の後、抗体結合粒子の洗浄が行われます。
** 粒子は磁石によって集められ、反応液が除去されます。洗浄液または洗浄液－Ｎの注入と除去が繰り返され、粒子が洗浄されます。

酵素反応
基質液２００μＬを粒子に加え撹拌後、３７℃で５分間反応させます。

測光
波長４７７ｎｍに発光極大を持つ光の発光量を測定します。
基質液に含まれるＡＭＰＰＤは、粒子に間接的に結合したアルカリホスファターゼの触媒作用により分解します。分解に伴って放出される光は、粒子に結合した２５－ＯＨビタミンD量を反映するため、これを測定することによって２５－ＯＨビタミンD濃度の測定を行うことができます。

■操作上の注意

1. 測定検体の性質、採取法
*(1) 検体の採取は使用する採血管の電子添文をよく確認し、指定された方法（採血量、遠心分離方法など）により採取してください。
(2) 検体は血清、血漿いずれでも測定できます。
(3) 検体は２～１０℃に保存した場合は７日間、－１０℃以下に保存した場合は２ヵ月間安定です。
可能な限り新鮮な検体を用い、保存する場合は－１０℃以下で凍結保存してください。
(4) 検体を繰り返し凍結融解することは避けてください。
(5) 赤血球・その他の有形成分、沈殿物、浮遊物が含まれている検体では、測定値に影響を与える場合があります。正しい結果が得られるように遠心または除去した後に使用してください。
(6) 検体間の汚染が生じないように検体は注意して取扱ってください。
(7) 検体に抗凝固剤（ＥＤＴＡ－二カリウム、ＥＤＴＡ－二ナトリウム、ヘパリンリチウム、ヘパリンナトリウム）を添加して試験した結果、それぞれ２ｍｇ/ｍＬ、２ｍｇ/ｍＬ、２０U/ｍＬ、２０U/ｍＬまで測定値に影響は認められませんでしたが、液状の抗凝固剤を用いる場合は、検体の希釈率にご注意ください。クエン酸ナトリウム血漿については測定値に影響を与える場合がありますので、抗凝固剤としてクエン酸ナトリウムは使用しないでください。
(8) 検体は希釈しないでください。検体を希釈して測定した場合は、測定結果の信頼性を保証できません。
2. 妨害物質・妨害薬剤
(1) 検体にビリルビンＦ、ビリルビンＣ、ヘモグロビンを添加して試験した結果、それぞれ１８.３ｍｇ/ｄＬ、２０.６ｍｇ/ｄＬ、１０.０ｇ/ｄＬまで測定値に影響は認められませんでした。また、トリグリセリドに関しては１０００ｍｇ/ｄＬまで測定値に影響は認められませんでした。
(2) 薬剤については下記の濃度まで測定値に影響は認められませんでした。

薬剤名	添加濃度
・Acetaminophen	1455 µmol/L
・Acetylsalicylic acid	3.65 mmol/L
・Alendronate	350 mg/L
・Ampicillin	344 µmol/L
・Ascorbic Acid	375 µmol/L
・Caffeine	309 µmol/L
・Chloramphenicol	155 µmol/L
・Digoxin	8.7 µmol/L
・EinsAlpha	3633 µg/L
・Hydrochlorothiazide	22.2 µmol/L
・Ibandronate	52 mg/L
・Ibuprofen	2486 µmol/L
・Indomethacin	103 µmol/L
・Lidocaine	57.9 µmol/L
・Lovastatin	1932 µmol/L
・Metoprolol	18.7 µmol/L
・Naproxen	2247 µmol/L
・Pamidron	90 mg/L
・Risedronate	175 mg/L
・Theophylline	243 µmol/L
・Warfarin	37.5 µmol/L
・Zometa	4 mg/L

3. 交差反応性
交差反応性について検討した結果、以下に示す成績が得られました。

添加物質(濃度)	交差率
Vitamin D_2 (1018 ng/mL)	0.1%
Vitamin D_3 (1012 ng/mL)	0.0%
1, 25-$(OH)_2$ vitamin D_2 (104 ng/mL)	46.3%
1, 25-$(OH)_2$ vitamin D_3 (102 ng/mL)	54.7%
3-epi-25-OH vitamin D_3 (100 ng/mL)	19.9%
24, 25-$(OH)_2$ vitamin D_3 (101 ng/mL)	5.6%
Paricalcitol (25 ng/mL)	33.6%

4. その他
本試薬は全自動化学発光酵素免疫測定システム
（代表例：ルミパルス　Ｇ１２００）用試薬です。

■用法・用量（操作方法）

1. 試薬の調製法
(1) 抗体結合粒子および酵素標識抗体
免疫反応カートリッジには抗体結合粒子および酵素標識抗体が充填されています。カートリッジケースの透明フィルムを剥がし、そのまま使用します。
・免疫反応カートリッジを取扱う際に、振動を加えたり、逆さまにしたりしないでください。
・免疫反応カートリッジを装置にセットする際は、カートリッジケースの透明フィルムを必ず剥がしてください。剥がし忘れや剥がし残りがある場合、装置の動作異常の原因となります。
・試薬はカートリッジケースの二次元コードによって管理されています。カートリッジケース間の免疫反応カートリッジの入れ替えは試薬の誤認識に繋がる可能性がありますので行わないでください。
(2) 標準２５－ＯＨビタミンＤ溶液
常温（１５～２５℃）に戻してから軽く転倒混和して使用します。
デッドボリュームを考慮して、サンプルカップに必要量を滴下します。
・溶液１滴あたりのおよその滴下量は４５μＬです。滴下量は容器を押す強さや気泡の混入によって変動します。滴下の際に液滴の中に気泡が多量に混入する場合は、残量が僅かですので新しい試薬を使用してください。サンプルカップに泡が残りますとサンプリング不良の原因になる場合があります。
・デッドボリュームはご使用の測定システムによって異なりますので各測定システムの取扱説明書をご覧ください。一例としてルミパルス　Ｇ１２００でサンプルカップをご使用の場合、デッドボリュームは１００μＬとなります。
(3) 基質液
冷蔵庫から出してそのまま使用します。
・基質液の漏れがないように装置にセットしてください。
・基質液を装置にセットした後は、基質液交換時まで取外しは避けてください。基質液の注ぎ足しはしないでください。基質液がアルカリホスファターゼ（ＡＬＰ）に汚染されますと使用できません。手指が直接基質液に触れた場合は、廃棄してください。
**(4) 洗浄液または洗浄液－Ｎ
濃縮液のため精製水で１０倍に希釈し、よく撹拌します。希釈した後は、常温（１５～２５℃）に戻してから使用します。
(5) 検体希釈液
本試薬は、１５～３０℃に戻してからそのまま使用します。
ルミパルス　Ｇ１２００にセットする場合は、冷蔵庫から出してそのまま使用してください。
2. 必要な器具・器材
(1) マイクロピペット、サンプリングチップおよびサンプルカップ
(2) 全自動化学発光酵素免疫測定システム
*(3) Ｓｅｒｏ　Ｌｕｍｉｐｕｌｓｅ　ＩＡ　Ｃｏｎｔｒｏｌ（別売品）
精度管理用試料として、Ｓｅｒｏ　Ｌｕｍｉｐｕｌｓｅ　ＩＡ　Ｃｏｎｔｒｏｌを推奨いたします。使用に際しては、Ｓｅｒｏ　Ｌｕｍｉｐｕｌｓｅ　ＩＡ　Ｃｏｎｔｒｏｌの取扱説明書を参照してください。
3. 測定法
(1) 測定システムの取扱説明書を参照し、検体および測定に必要な試薬を所定の位置にセットしてください。（サンプルの最少必要量は、使用する容器や測定システムによって異なりますので、各測定システムの取扱説明書をご覧ください。）
(2) 標準２５－ＯＨビタミンＤ溶液の測定依頼内容と、検体の測定依頼内容をそれぞれ入力します。
**(3) 測定を開始する前に、免疫反応カートリッジ、基質液、洗浄液または洗浄液－Ｎ、検体希釈液、サンプリングチップの残量を確認します。
(4) スタートキーを押し、測定を開始します。装置内で自動的に実行される動作については測定原理の「反応プロトコール」の項をご参照ください。
4. 濃度の算出法
検体中の２５－ＯＨビタミンＤ濃度は、標準２５－ＯＨビタミンＤ溶液の発光量をもとに作成された検量線から自動的に算出されます。また複数装置をお使いの場合は１台ごとに検量線を作成してください。

標準２５－ＯＨビタミンＤ溶液の測定は以下の場合に行います。
・免疫反応カートリッジが、新しいロットに切り替わった場合。
・キャリブレーションデータを更新後、３０日が経過した場合。
上記以外においても必要が生じた場合は、標準２５－ＯＨビタミンＤ溶液を測定し検量線を更新してください。

分析項目として“Ｖｉｔ　Ｄ”を選択した場合は、測定結果はｎｇ/ｍＬで出力されます。単位をｎｍｏｌ/Ｌへ変換する場合は、以下の変換式を使用してください。
ｎｍｏｌ/Ｌ＝２.５×ｎｇ/ｍＬ

■測定結果の判定法

1. 測定結果の判定法
(1) ビタミンＤ欠乏症くる病・低カルシウム血症の診断の手引き[1]によれば、
ビタミンＤ欠乏症：２０ｎｇ/ｍＬ以下
１５ｎｇ/ｍＬ以下であればより確実です。
(2) ビタミンＤ不足・欠乏の判定指針[2]によれば、
ビタミンＤ充足状態：３０ｎｇ/ｍＬ以上
ビタミンＤ不足：２０ｎｇ/ｍＬ以上、３０ｎｇ/ｍＬ未満
ビタミンＤ欠乏：２０ｎｇ/ｍＬ未満

2. 判定上の注意
(1) 基準範囲は、測定条件や検体によって多少異なることがありますので、各施設に適した基準範囲を設定してください。
(2) 検体中に存在する未同定の非特異反応性物質の影響により、まれに測定値が正確に得られない場合がありますので、他の検査結果や臨床症状等もあわせて考慮し、総合的に判断してください。

■性能

1. 性能
(1) 感度
標準２５－ＯＨビタミンＤ溶液を所定の操作で測定するとき、標準２５－ＯＨビタミンＤ溶液　濃度２と標準２５－ＯＨビタミンＤ溶液濃度１の発光量の比は２.５以上になります。
(2) 正確性
自家管理検体３例を所定の操作で測定するとき、測定値は各管理理値に対して±２０％以内になります。
**(3) 同時再現性
自家管理検体３例を所定の操作で６回繰り返し測定するとき、変動係数（ＣＶ％）は１０％以下になります。
(4) 測定範囲
本試薬の測定範囲は４.０～１５０.０ｎｇ/ｍＬです。
(5) 血清検体と血漿検体の相関性に関する試験成績
1) 同一人から採取した血清・血漿ペア検体６５例（抗凝固剤：ＥＤＴＡ－二ナトリウム）を使用し、本試薬にて測定値を比較検討した結果、以下に示す成績が得られました。
測定例数：ｎ＝６５
相関係数：ｒ＝１.００
回帰式　：ｙ＝１.００ｘ－０.３
（ｘ：血清、ｙ：ＥＤＴＡ－二ナトリウム血漿）
2) 同一人から採取した血清・血漿ペア検体８４例（抗凝固剤：ＥＤＴＡ－二カリウム）を使用し、本試薬にて測定値を比較検討した結果、以下に示す成績が得られました。
測定例数：ｎ＝８４
相関係数：ｒ＝１.００
回帰式　：ｙ＝０.９９ｘ－０.３
（ｘ：血清、ｙ：ＥＤＴＡ－二カリウム血漿）
3) 同一人から採取した血清・血漿ペア検体８４例（抗凝固剤：ヘパリンナトリウム）を使用し、本試薬にて測定値を比較検討した結果、以下に示す成績が得られました。
測定例数：ｎ＝８４
相関係数：ｒ＝１.００
回帰式　：ｙ＝０.９９ｘ－０.２
（ｘ：血清、ｙ：ヘパリンナトリウム血漿）

4) 同一人から採取した血清・血漿ペア検体８４例（抗凝固剤：ヘパリンリチウム）を使用し、本試薬にて測定値を比較検討した結果、以下に示す成績が得られました。
測定例数：ｎ＝８４
相関係数：ｒ＝１.００
回帰式　：ｙ＝１.０１ｘ－０.５
（ｘ：血清、ｙ：ヘパリンリチウム血漿）

2. 相関性試験成績
(1) 血清検体１１７例を使用し、既存ＣＬＩＡ法試薬（対照品）との相関性を検討した結果、以下に示す成績が得られました。
測定例数：ｎ＝１１７
相関係数：ｒ＝０.９８
回帰式　：ｙ＝０.９８ｘ－１.３
（ｘ：既存ＣＬＩＡ法試薬、ｙ：本品）
(2) 血清検体９１例を使用し、既存ＥＣＬＩＡ法試薬（対照品）との相関性を検討した結果、以下に示す成績が得られました。
測定例数：ｎ=９１
相関係数：ｒ=０.９９
回帰式：ｙ=１.０６ｘ－３.６
（ｘ：既存ＥＣＬＩＡ法試薬、ｙ：本品）

■使用上又は取扱い上の注意

1. 取扱い上（危険防止）の注意
(1) 検体はＨＩＶ、ＨＢＶ、ＨＣＶ等の感染の恐れがあるものとして取扱ってください。
(2) 検査にあたっては感染の危険を避けるため使い捨て手袋を着用し、また口によるピペッティングを行わないでください。
(3) 基質液はアルカリ性溶液（ｐＨ１０）です。使用に際しては、液が皮膚についたり、目に入ったりしないように注意してください。
(4) 試薬が誤って目や口に入った場合は、水で十分に洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば、医師の手当等を受けてください。

2. 使用上の注意
*(1) 使用に際しては本書、使用する測定システムの電子添文および取扱説明書に従ってください。
**(2) 免疫反応カートリッジ（抗体結合粒子・酵素標識抗体）、標準２５－ＯＨビタミンD溶液、基質液、洗浄液、洗浄液－Ｎ、検体希釈液は個別に包装されていますので、ご使用の測定システムに合わせ、組み合わせて使用してください。
(3) 使用期限を過ぎた試薬は使用しないでください。各構成試薬外箱および容器の表示をご確認のうえ使用してください。
(4) サンプリングチップ、サンプルカップは、使用する測定システム指定のものを使用してください。
(5) サンプリングチップ、サンプルカップは常に新しいものを使用してください。
(6) 試薬は保存条件を守って使用してください。特に凍結しないように注意してください。
(7) 保管に冷蔵庫をご使用の場合、庫内のファンからの風が直接あたる場所および庫内最下部での保管は、温度変化により水分蒸発の原因となりますので避けてください。
(8) 検体、標準２５－ＯＨビタミンD溶液は蒸発による濃縮を考慮し、サンプルの準備後は速やかに測定を開始してください。
(9) 正確な測定を行うために、精製水は常に新しいものを使用してください。
(10) ソーダライムは交換せずに長期間使用を続けると、二酸化炭素の吸収力が低下します。また、基質キャップパッキンも交換せずに長期間使用を続けると密閉性が失われ基質液を劣化させる原因となります。ソーダライムと基質キャップパッキンの交換時期についてはご使用の測定システムの取扱説明書をご覧ください。

3. 廃棄上の注意
**(1) 各試薬には保存剤として以下のとおりアジ化ナトリウムが含まれています。廃棄する際は爆発性の金属アジドが生成されないように多量の水とともに流してください。また、酸と反応して有毒性のガスを発生する恐れがありますので、酸との接触を避けて廃棄してください。
洗浄液、洗浄液－Ｎ：１.０％（希釈調製前）　基質液：０.０５％
抗体結合粒子、酵素標識抗体、標準２５－ＯＨビタミンD溶液、
検体希釈液：０.１％
(2) 試薬および容器等を廃棄する場合は、廃棄物に関する規定に従って、医療廃棄物または産業廃棄物等区別して処理してください。
(3) 廃液の廃棄にあたっては、水質汚濁防止法などの規制に従って処理してください。
(4) 使用した器具（ピペット、試験管等）、廃液、サンプリングチップ等は、次亜塩素酸ナトリウム（有効塩素濃度１０００ｐｐｍ、１時間以上浸漬）、グルタールアルデヒド（２%、１時間以上浸漬）等による消毒処理あるいは、オートクレーブ（１２１℃、２０分以上）による滅菌処理を行ってください。
(5) 検体、廃液等が飛散した場合には次亜塩素酸ナトリウム（有効塩素濃度１０００ｐｐｍ、１時間以上浸漬）、グルタールアルデヒド（２%、１時間以上浸漬）等によるふき取りと消毒を行ってください。
(6) 消毒処理に使用する次亜塩素酸ナトリウム溶液、グルタールアルデヒド溶液が、皮膚についたり、目に入らないように注意してください。

■貯蔵方法・有効期間

	抗体結合粒子	２～１０℃に保存	有効期間：１年
	酵素標識抗体	２～１０℃に保存	有効期間：１年
	標準２５－ＯＨビタミンD溶液	２～１０℃に保存	有効期間：１年
	基質液	２～１０℃に保存	有効期間：９ヵ月
	洗浄液	２～１０℃に保存	有効期間：９ヵ月
**	洗浄液－Ｎ	室温（１～３０℃）に保存	有効期間：１年
	検体希釈液	２～１０℃に保存	有効期間：９ヵ月

使用期限については、各構成試薬の外箱および容器の表示をご参照ください。

■包装単位

個別包装
ご使用の測定システムに合わせてご用意ください。

	コードＮｏ.	品名	包装
	２３４０１３	ルミパルス　２５－ＯＨビタミンD 免疫反応カートリッジ （抗体結合粒子・酵素標識抗体）	１４テスト×３
	２９８３３６	ルミパルス　２５－ＯＨビタミンD 標準２５－ＯＨビタミンD溶液	６濃度×１ （各１.５ｍＬ×１）
	２１９９７３	ルミパルス　基質液　（共通試薬）	１００ｍＬ×６
	２９２６００	ルミパルス　基質液　（共通試薬）	５０ｍＬ×６
	２１９９４２	ルミパルス　洗浄液　（共通試薬）	１０００ｍＬ×１
**	２６１６１３	ルミパルス　洗浄液－Ｎ　（共通試薬）	１０００ｍＬ×１
**	２６１６０６	ルミパルス　洗浄液－Ｎ　（共通試薬）	２０００ｍＬ×１
	２１９９３５	ルミパルス　検体希釈液 （共通試薬）	３００ｍＬ×４
	２９２６１７	ルミパルス　検体希釈液 （共通試薬）	８０ｍＬ×４

*その他
Ｓｅｒｏ　Ｌｕｍｉｐｕｌｓｅ　ＩＡ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
２濃度×６（各３ｍＬ×６）（コードＮｏ．２０６８０５）

**■主要文献

1. ビタミンD欠乏性くる病・低カルシウム血症の診断の手引き（日本小児内分泌学会、2013年）
2. ビタミンD不足・欠乏の判定指針（日本内分泌学会雑誌　Vol.93 Suppl. Mar. 2017）

■問い合わせ先

富士レビオ株式会社　お客様コールセンター
TEL：0120-292-832

■製造販売元

富士レビオ株式会社
*神奈川県相模原市中央区田名塩田１丁目３番１４号

FUJIREBIO