HC-I03031-003

**2017 年 9 月（第 3 版　新記載要領に基づく改訂）
*2008 年 3 月（第 2 版）

届出番号：13B1X00218474003


機械器具 74 医薬品注入器
一般医療機器　単回使用インライン逆流防止バルブ　34099001

# ロープレッシャー・バックチェックバルブ

再使用禁止

**【禁忌・禁止】**
- **再使用禁止**
- **血管造影検査や高速輸血時など、206 kPa を超える圧力下では使用しないこと。［液漏れの可能性がある］**
- **抗てんかん薬などは使用しないこと。［ひび割れを起こす可能性がある］**
- **併用医療機器**
  **オスアダプターとポリ塩化ビニル製のメスアダプターを接続する場合は注意すること。［外れなくなる可能性がある］**
  **（「相互作用の項を参照」）**

**【形状・構造及び原理等】**
**＜構造図（代表例）＞**

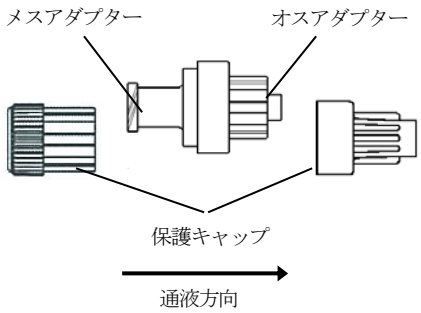


**＜材質＞**
- 本体：ポリカーボネート

**【使用目的又は効果】**
液体の逆流を防止するため、医用チューブ等に用いる器具をいう。
本品は単回使用である。

**【使用方法等】**
**＜使用方法＞**
- 包装より無菌的に取り出し、できるだけ早く輸液セット等へ接続し、薬液等を流す。

**＜使用方法等に関連する使用上の注意＞**

1．使用前
- ライン交換時の締め直し、過度の締め付け又は、増し締めなどは、本品のひび割れの発生を助長する要因となるため注意すること。
- 脂肪乳剤及び脂肪乳剤を含む医薬品、ヒマシ油などの油成分、界面活性剤又はアルコール等の溶解補助剤などを含む医薬品を投与する場合及びアルコールを含む消毒剤を使用する場合は、本品のひび割れについて注意すること。
  ［薬液により本品のメスコネクターにひび割れが生じ、血液及び薬剤漏れ、空気混入などの可能性がある。特に、全身麻酔剤、昇圧剤、抗悪性腫瘍剤及び免疫抑制剤などの投与では、必要な投与量が確保されず患者への重篤な影響が生じる可能性がある。
- 一度取り外した保護キャップは再使用せずに、新しい滅菌済みキャップ（コンビキャップ等）を使用すること。
- 接続部を汚染させないこと。

2．使用中
- 使用中は本品の破損、接続部のゆるみ及び薬液漏れ等について、絶えず確認すること。
- 本品は 24 時間毎の交換を推奨する。

3．使用後
- 使用後は感染防止に留意し、廃棄すること。

**【使用上の注意】**
**相互作用**
**併用禁忌（併用しないこと）**
- オスアダプターとポリ塩化ビニル製のメスアダプターを接続する場合は注意すること。［外れなくなる可能性がある］

**【保管方法及び有効期間等】**
**＜保管方法＞**
- 水濡れに注意し、直射日光および高温多湿を避けて保管すること。

**＜使用期限＞**
- 本品は滅菌品で、使用期限は外箱に記載。［自己認証による］

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**
製造販売元：ビー・ブラウンエースクラップ株式会社
問い合わせ窓口：マーケティング部 TEL (03) 3814-2704
製造元：ビー・ブラウン　メディカル社　アメリカ合衆国
B.Braun　Medical　Inc.　USA