2015 年 3 月 18 日改訂（第 2 版）（新記載要領に基づく改訂）　　医療機器製造販売届出番号 13B1X00249SM0002
2007 年 1 月 26 日作成（第 1 版）

機械器具　２５　医療用鏡

一般医療機器　内視鏡用送気子　35800000

送気球

【警告】

１．使用方法

（１）本品は天然ゴムを使用しているため、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがある。
このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、適切な処置を施すこと。

（２）天然ゴムと接触する機会の多い患者及び医療関係者は、天然ゴムアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、使用に関しては十分注意すること。

【禁忌・禁止】

１．適用対象（次の場合には使用しないこと）

（１）過去にアナフィラキシー症状様の経験がある医療関係者及び患者には使用しないこと。


２．使用方法

（１）高圧蒸気滅菌は施さないこと。［素材の性質上溶けることがある］


【形状・構造及び原理等】

１．形状

（１）単球　Ｋ－Ｓ１１

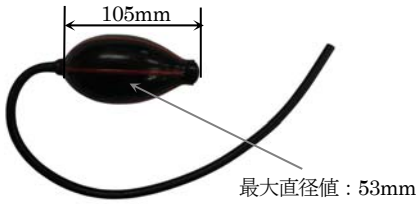

（２）二連球　ＫＡ－８６０

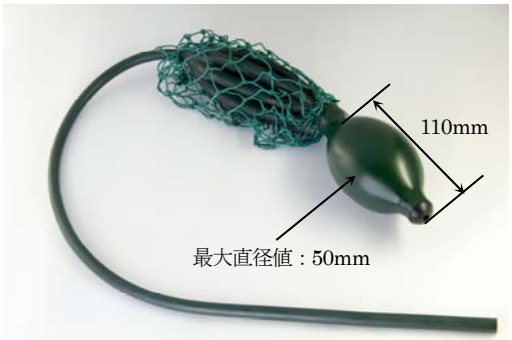

２．原材料（接触部の組成）

天然ゴム、ナイロン

３．動作原理

本品を直腸鏡に取り付けた後、球状部分を手で圧迫することにより空気を送入し、直腸鏡視野を確保する。

【使用目的又は効果】

本品は直腸鏡及びその直接アプリケーションとともに用い、直腸鏡視野を得るため、直腸鏡を介して空気を送入するのに用いるゴム球型の専用機器である。

【使用方法等】

１．使用前の確認

本品が十分に洗浄、滅菌されていることを確認する。

２．準備・操作

（１）本品の直腸鏡接続口を直腸鏡に取り付ける。

（２）本品の球状部分を手で圧迫し空気を送り込み、直腸鏡視野を確保する。

３．使用後

【保守・点検に係る事項】１に示すように洗浄、滅菌する。

【使用上の注意】

１．重要な基本的注意

使用後は速やかに汚れを拭き取り、アルコールで消毒した後清潔に保管すること。

【保管方法及び有効期間等】

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿、殺菌灯等の紫外線を避けて清潔に保管すること。

【保守・点検に係る事項】

１．洗浄方法

速やかに汚れを拭き取り、アルコールで消毒した後清潔に保管する。

２．使用者による保守点検事項

（１）使用後は汚れが付着したままで放置しないこと。

（２）使用後は出来るだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去しアルコールで消毒し、清潔に保管すること。

（３）使用前に汚れ、傷がないか点検し、異常がある場合には使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者・製造業者

ユフ精器株式会社
〒113-0034
東京都文京区湯島２丁目 31 番 20 号
ＴＥＬ：03-3811-1131
ＦＡＸ：03-3811-1727