

器01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ (70469000)

軽量脚板用延長ボード

【警告】



患者の任意の体位を確保するために手術台アクセサリで支持するときは常に患者の状態を監視すること。[長時間の体位は神経麻痺や褥瘡の原因になります。]

【禁忌・禁止】

- 【使用方法等】2. 使用可能なアクセサリに示す機種以外では使用しないこと。[他機種での使用は確認していません。]
- 【形状・構造及び原理等】の項目3. に示す許容荷重を超えた使用をしないこと。[破損するおそれがあります。]
- 他社製手術台・アクセサリでは使用しないこと。[他社製手術台・アクセサリでの使用可能は確認していません。]


【形状・構造及び原理等】

1. 外観図

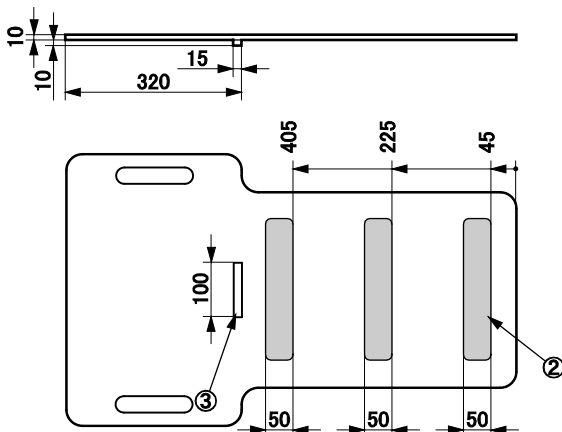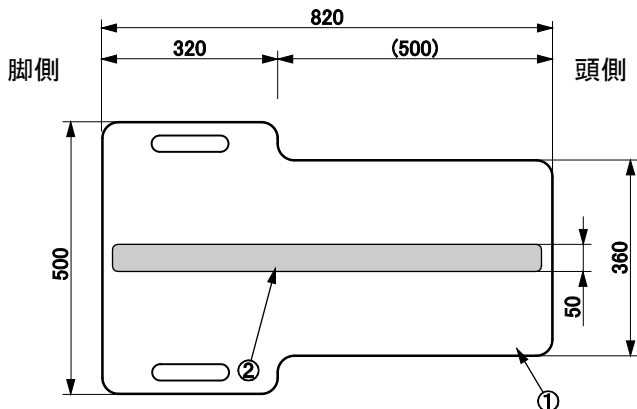

単位：mm

軽量脚板用延長ボード

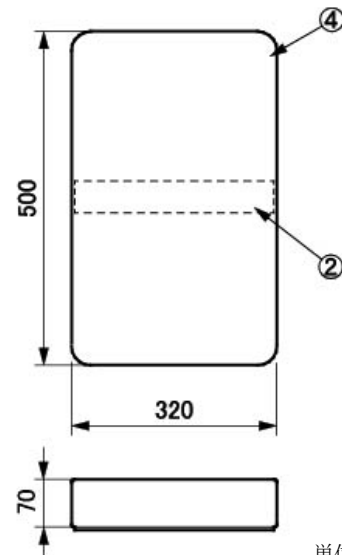

マットレス

単位：mm

商品コード	商品名	構成
08-075-80	軽量脚板用延長ボード	①②③④
08-075-81	軽量脚板用延長ボード 本体	①②③
08-075-82	軽量脚板用延長ボード マットレス	②④

注：番号は1. 外観図の番号に対応

2. 質量

本体：1.5kg マットレス：0.6kg

3. 許容荷重

20kg

4. 材質

①ボード：炭素繊維強化プラスチック

②固定用テープ：ナイロン樹脂

③ストッパー：熱硬化性樹脂積層板

④マットレス：低反発ウレタンフォーム

注：番号は1. 外観図の番号に対応


【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリ。軽量脚板に固定して、患者の脚部を乗せるためのボード。


【使用方法等】

1. 使用方法

- 1-1 軽量脚板用延長ボード①裏面のストッパー②を軽量脚板③の脚側先端に合わせて固定します。

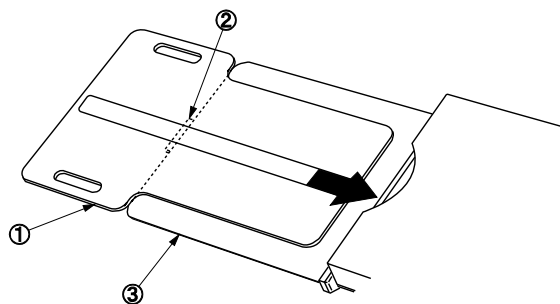

- 1-2 軽量脚板用延長ボード①及び軽量脚板③に軽量脚板用延長ボード用マットレス④及び軽量脚板用マットレス⑤を取り付けます。

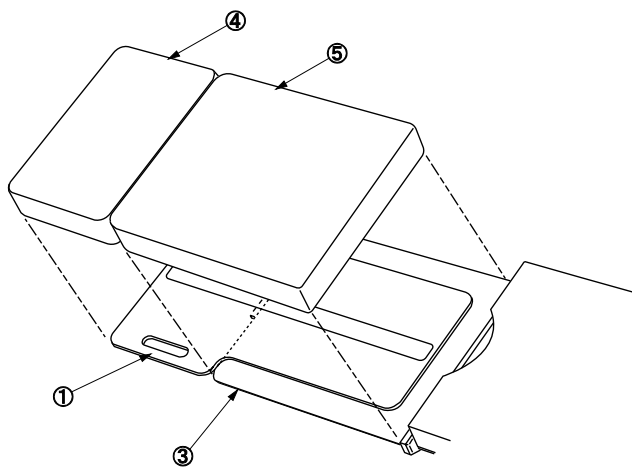

2. 使用可能なアクセサリー

販売名：軽量脚板 製造販売届出番号：13B1X00306N10288

【使用上の注意】

1. 警告

締結部の固定は必ず確認してください。ゆるんだ状態では機器が外れたり、動いたりして患者に障害が起きるおそれがあります。

2. 重要な基本的注意

手術台を作動するときには他の手術台アクセサリーやテーブルトップとの接触・干渉に注意してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管してください。

2. 耐用期間

適切な保守点検及び適切な保管をした場合：7年（注）
〔自己認証による〕

注：耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品（マットレスも含む）の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。

【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検事項＞

1. 使用前・使用後の点検

使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認してください。

2. 清掃・消毒

血液・薬剤・汚染等の汚れは水で拭き取り、さらに消毒用アルコール・ガーゼで清拭してください。

3. 故障時のお願い

本装置が故障したと思われるときは、本装置に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に連絡してください。

＜業者による保守点検事項＞

弊社及び弊社が認めた業者のみが実施可能です。それ以外の業者による保守・点検は、有害事象の発生、性能・機能低下の事態を招くおそれがあります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ミズホ株式会社

TEL 03(3815)3097

製造業者：ミズホ株式会社 千葉工場

【保証期間に係る事項】

本品は納品/設置してから1年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。