**2024 年 7 月改訂（第 5 版 成分を詳細に記載）　　医療機器届出番号 13B1X10049IV0032
*2023 年 11 月改訂（第 4 版 文言の明確化）　　歯科材料 5 歯科用接着充填材料
一般医療機器　　歯科技工用セラミックス表面処理材料　　（70918000）

IPS e.max プレス インベックスリキッド

【形状･構造及び原理等】

[形状]

透明な液体

[成分]

**フッ化水素酸：0.25～0.5%

**硫酸：2.5%

【使用目的又は効果】



[使用目的]


歯科用セラミックス表面の接着性を付与・強化する ために用いる技工用表面処理材

【使用方法等】

反応層の除去

1. インベックスリキッドをプラスチックのカップに入れ､準備する。
2. 掘り出しの終わった修復物をインベックスリキッドに浸し､超音波洗浄器で決められた時間清掃する｡必ず修復物が完全にインベックスリキッドに浸された状態でこの作業を行うこと。
3. 修復物を流水で十分に洗浄し、エアーで乾燥させる。
4. 反応層を 1～2 気圧のアルミナ (Al2O3)でブラスティングし、完全に取り除く。

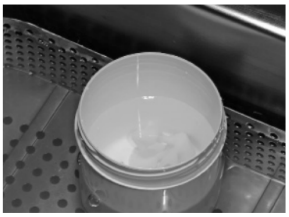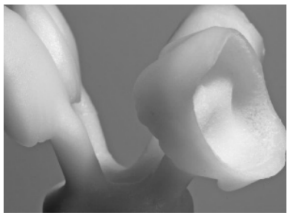

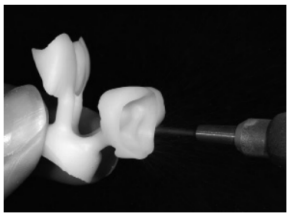5. 修復物の窩洞側、外側前面より反応層を完全に取り除く。必要に応じてこの手順を繰り返すこと｡反応層が完全に除去されないと、気泡が生じて、陶材築盛・焼成の際、ボンディングに支障をきたしたり、クラックが生じる原因となる。

修復物の前処理

1. 新品のインベックスリキッドで 5 分間エッチングする。
（接着面以外はワックスによりコーティングしておく。）
2. エッチング後、修復物を完全に中和させる。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 本品は強酸性なので、吸い込んだり飲み込んだり、また直接肌に触れないように注意すること。使用の際はグローブ、ゴーグルなどを着用し、防護すること。万一事故が起きた場合、大量の水で洗い流し、不調を感じたら、早急に医師の診断を仰ぐこと。
- 本品は「医薬用外毒物」に該当するので、「毒物及び劇物取締法」に従って保管すること。
- 本品の成分、フッ化水素酸は腐食性があるので、吸入、嚥下、または皮膚に触れると有害です。作業には保護衣、手袋、ゴーグルを使用すること。
- 目に入った場合はすぐに大量の水で洗い､直ちに医師の治療を受けること。
- 皮膚に触れた場合は、洗剤と大量の水で洗うこと。
- 事故が起きたり、気分が悪くなったら直ちに医師
- の治療を受けること。
- 本品は 20 回使用後、または沈殿物が生じたら、取り替えること。
- 廃棄する場合は＊ソーダ石灰（ソーダライム）などで中和し、廃棄物処理に従って廃棄すること。
- 使用後は直ちに、容器の蓋をしっかり閉め、通気性のよい場所に鍵をかけて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売元]
Ivoclar Vivadent 株式会社
電話 03-6801-1301

[製造元]
Ivoclar Vivadent AG （リヒテンシュタイン候国）

取扱説明書を必ずご参照ください。