＊2016年 9 月（第 2 版）（新記載要領に基づく改訂）
2014年 6 月（第 1 版）

届出番号 13B1X10107000055


機械器具 6　呼吸補助器
一般医療機器　単回使用人工呼吸器用ウォータトラップ　36276000

# ウォータートラップ・ドレナージバッグ

再使用禁止

**【禁忌・禁止】**
再使用禁止
〈使用方法〉
1) 陽圧換気の回路に使用しないこと。
2) 本品を高温、裸火又は他の発火源の近くで使用しないこと［酸素自体は可燃性ではないが、引火する恐れがあるため］。

**【形状・構造及び原理等】**
〈形状・構造〉
001274　ウォータートラップ・ドレナージバッグ

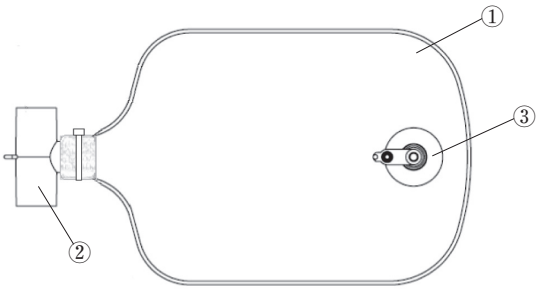


〈構成品〉

| No. | 名　　称 |
|---|---|
| ① | ドレナージバッグ |
| ② | Tコネクタ |
| ③ | ストッパプラグ |

〈原材料〉

| No. | 名　　称 | 原　材　料 |
|---|---|---|
| ① | ドレナージバッグ | ポリ塩化ビニル |
| ② | Tコネクタ | ポリプロピレン |

・未滅菌

**【使用目的又は効果】**
〈使用目的〉
加温加湿時に蓄積する復水を回収するため、人工呼吸器の呼吸回路に用いる。

**【使用方法等】**
1. 内径22mmの蛇管をTコネクタの左右どちらか一方に接続します。
2. 他方を内径22mmの蛇管（患者側）に接続します。
3. バッグに溜まった復水を排出するには、ドレナージバッグのストッパプラグを外して、排出瓶等に排出します。バッグの中が空になったら、ストッパプラグをはめます。

**【使用上の注意】**
〈重要な基本的注意〉
1) 使用前及び使用中は、どの部分にもリークや閉塞、よじれ及びキンクがないこと、異物が付着していないこと、適切な酸素流量で投与されていること、本品と酸素供給源との接続が確実であることを絶えず確認すること。
2) 本品は患者の顔より低い位置で使用すること［復水が患者ではなくバッグに流れるようにするため］。
3) ドレナージバッグ内に復水を1／3以上貯めないこと。必要に応じて頻繁に空にすること。
4) ドレナージバッグのストッパプラグは使用前及びバッグを空にした後は確実に閉じること［復水飛沫を避けるため］。

**【保管方法及び有効期間等】**
〈保管方法〉
本品を保管するときは次の事項に注意すること。
・水濡れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。
・保管時（運搬時も含む）は、過度な振動・衝撃等に注意すること。
〈有効期間・使用の期限〉
・本品の包装に記載されている「有効期間」までに使用すること［自己認証（当社データ）による］。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**
＊〈製造販売業者〉
smiths medical
スミスメディカル・ジャパン株式会社
http://www.smiths-medical.com/jp/
＊〈問合せ先〉
フリーダイヤル　0120-582-855
〈製造業者〉
スミス　メディカル　インターナショナル　Ltd.
Smiths Medical International Ltd.
〈国名〉
英国

〈被包に記載されているシンボルの説明〉

| シンボル | 定　　義 |
|---|---|
| | 再使用禁止 |
| | 注意 |
| LOT | ロット番号 |
| | 製造年月 |
| | 有効期間 |
| REF | 品番 |
| LATEX | 天然ゴムラテックスは使用していません |
| NON STERILE | 未滅菌 |
| | 高温および直射日光を避けて保管すること |
| | 多湿および水濡れを避けて保管すること |
| | 包装破損時使用不可 |
| | 数量 |

IOAJI046B