2024年2月(第3版　製品名・製品番号の変更)
2017年8月(第2版　新記載要領に基づく改訂)

製造販売届出番号：13B3X00138000054

医04　整形用品
一般医療機器　熱傷用ラップ　36093000

WJドレッシング

再使用禁止

禁忌・禁止

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

製品名	5x15	10x10	10x40
製品番号	WJD0206	WJD0404	WJD0416
サイズ	5x15cm	10x10cm	10x40cm
重さ	41g	64g	103g
			
製品名	20x45	ﾊﾝﾄﾞ	ﾌｪｲｽﾏｽｸ
製品番号	WJD0818	WJD0820	WJD1216
サイズ	20x45cm	20x55cm	30x40cm
重さ	283g	410g	386g
			

・　熱伝導の作用により熱傷の熱を下げる。


【原材料】

・　主成分：純水
・　成　分：不織布
　　キサンタンガム
　　グリセリン
　　ヒアルロン酸

【使用目的又は効果】

・　熱傷部の熱を下げる。
・　熱傷の拡大を防止する。
・　熱傷の痛みを和らげる。
・　熱傷部の湿潤を保つ。
・　感染を防止する。

【使用方法】

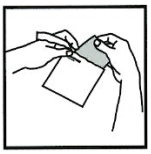


熱傷のサイズに応じたドレッシングを選ぶ。
(TBSA マークに成人 / 子供別に適用範囲%が表示されている。)

パウチを開き、ドレッシングを取り出す。



ドレッシングを拡げ、すぐに熱傷部分にあてる。
パウチに残ったジェルをドレッシングや熱傷の付着した衣類の上に注ぐ。

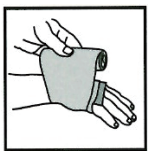

ドレッシングをそのまま置いておく。ウォータージェルのドレッシングは一旦患部に適用したらそれ以上なにもしなくて良い。

処置時に水を加えないこと。



ドレッシング適用後は出来るだけ早く、専門医の診察をうけること。

ドレッシングを除去するには水で洗い流す。

【使用上の注意】

・化学物質による熱傷にはウォータージェルを使用前に該当の化学物質を予め除去しておくことが望ましい。
・水反応性化学物質には適用しないこと。
・通電している電気機器に接触している傷病者には適用しないこと。
・パウチが開いていたり損傷していたら、使用しないこと。

【保管方法及び有効期間】

・　直射日光及び高温多湿を避け室温にて保管
・　有効期間：パッケージに表示

【包装】1個単位

【主要文献及び文献請求先】

アコードインターナショナル株式会社

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：アコードインターナショナル株式会社
151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷1-9-4
TEL:03-3299-6751　FAX: 03-3299-6752

製 造 業 者 ：ウォータージェル テクノロジーズ社
Water-Jel Technologies,LLC
(アメリカ・ニュージャージー州)