医療機器製造販売届出番号：13B3X10179000002

2015 年 7 月 1 日作成（第 1 版）

2021 年 5 月 20 日作成（第 2 版）

機械器具　74　医薬品注入器


一般医療機器　　浣腸用キット　　ＪＭＤＮコード：11582000

スリムエネマ

【禁忌・禁止】

・　ベンゼン、トルエン、キシレン、ソルベントナフサ、工業用ガソリン類を使用して機器を洗浄しないでください。

【形状・構造及び原理等】

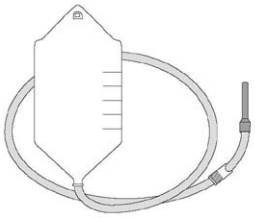

1）各部の名称および成分

構成部名称	原材料
本体	シリコーンゴム
ホース	シリコーンゴム
挿入パイプ	シリコーンゴム
ジョイント	ポリプロピレン
ストッパー	
Wフック	ナイロン
S字フック	鉄・塩ビ被服

【使用目的、効能又は効果】

本品を使用して腸内をぬるま湯又は洗浄液で洗浄することにより、腸内に滞留する便を取り除き、腸の機能向上、活性化を目的とします。

【品目仕様】

本品の容量は、最大１３００ｃｃです。

【操作方法又は使用方法等】

使用前に必ず、水道水で洗浄してください。

別に添付の取扱説明書を、十分にお読みの上ご使用ください。

【使用上の注意】

別に添付の取扱説明書を、十分にお読みの上ご使用ください。

＊　重要な基本的注意

（1）　傷がつくと亀裂が広がりやすいので、鋭利なものなどで傷つけないようにしてください。
（2）　体調がすぐれないときは使用を控えてください。
（3）　未滅菌です。必要に応じて煮沸消毒をしてください。
（4）　漂白剤の原液で機器を漂白すると、ゴムの劣化を促進します。必ず希釈して使用してください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

貯蔵・保管方法

(1)　気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気等により悪影響の生ずる恐れのない場所に保管してください。
(2)　化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないでください。

【包装】

１個／１箱

＊【製造業販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元
株式会社　オンリースタイル
〒165-0031　東京都中野区上鷺宮 3-16-9 オーエスビル 2F
TEL03-4455-7426　FAX 03-4579-0665
MAIL:info@onlystyle.jp