

医療用品 04 整形用品  
一般的名称 医療ガーゼ 13700000

## CVN フレックスバンデージ

再使用禁止

### 【警告】

1. 救急救命の専門家から訓練を受けた上で使用すること
2. 血液体液で汚染された場合は廃棄すること

### 【禁忌・禁止】

1. 製品を改造・分解しないこと
2. 再使用禁止

### 【形状・構造及び原理】


#### 1. 外観図

##### 1) 収納時



左：レスポンスフレックスバンデージ  
右：ファーストエイドバンデージ

##### 2) 展開時

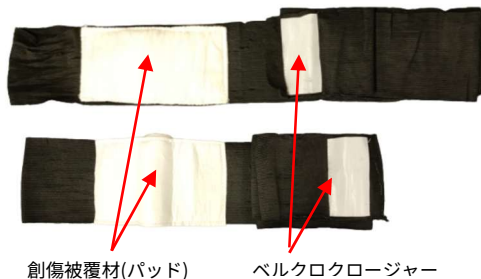

上：レスポンスフレックスバンデージ  
下：ファーストエイドバンデージ



ファーストエイドバンデージは、創傷被覆材（パッド）の裏にプレッシャーパッドが入っている。

#### 2. 原材料

部位名	材質
伸縮包帯	ゴム、ポリエステル、コットン
創傷被覆材（パッド）	フラップパルプ、ポリプロピレン

#### 3. 寸法

種類	包帯部 (cm)	パッド (cm)	重量 (g)	
レスポンスフレックスバンデージ	4 インチ	10x143	10x18.5	66
ファーストエイドバンデージ	4 インチ	10x127	10x16	60

包帯部の寸法：幅 x 長さ（展開時）

最大伸長：480cm

#### 4. 原理

出血部分を創傷被覆材（パッド）で覆い、圧力をかけて包帯を巻くことにより、損傷部位を保護し止血を促す。

### 【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする主としてガーゼから成る器具。

### 【使用方法】

- (1) 傷口に創傷被覆材（パッド）を乗せ、伸縮包帯を巻いていく。
- (2) 伸縮包帯を圧力バーの中に完全に通し、反対方向に巻き戻す。ない場合はそのまま圧力をかけ巻いていく。
- (3) 伸縮包帯をプレッシャーバー（パッド）の上から巻き、パッドの端が隠れるようにしっかりと巻く。
- (4) 最後にベルクロクローゼージャーでしっかりと固定する。

### 【使用上の注意】

- (1) 血液、体液等で汚損の場合は廃棄すること。
- (2) 本体に悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 1. 保管方法

水濡れに注意して、直射日光及び高温多湿をさけて常温で保管すること。

#### 2. 有効期限

製造後未開封で 8 年又は\*10 年（ガンマ線滅菌 包装に記載）

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

**1. 製造販売業者**

株式会社オーストリッチインターナショナル  
神奈川県横浜市港北区新横浜 1-14-20  
電話：045-470-9041（代） FAX:045-470-9043

**2. 製造業者**

Anji Hengfeng(中華人民共和国) 又は  
\*CVN Medical Solutions（フィンランド）