2006年11月15日作成（新様式第1版）　　医療機器承認番号：15700BZZ01748000

機械器具１８血圧検査又は脈波検査用器具
管理医療機器　単回使用静脈ライン用マノメータセット　70046002


ニプロ静脈圧測定セット
（ＤＥＨＰ可塑剤フリー）

再使用禁止

【禁忌・禁止】
○再使用禁止

【形状・構造及び原理等】


本品は、中心静脈圧の測定に用いられる滅菌済みのディスポーザブル製品である。

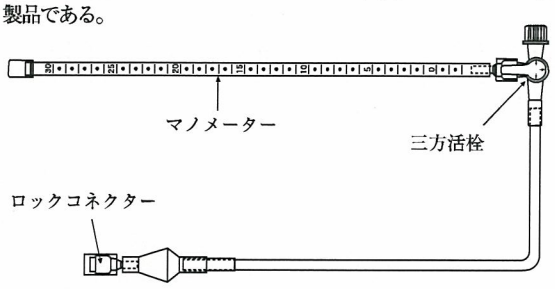

本品はポリ塩化ビニル（可塑剤：トリメリット酸トリ-2-エチルヘキシル）を使用しております。

【使用目的、効能又は効果】
本品は滅菌済みであるので、そのまま直ちに使用できる。

【操作方法又は使用方法等】
1．静脈圧測定セットの三方活栓を図Ⅰの位置にし、輸液ラインにつなぎ、チューブ先端まで液を充たして下さい。
2．先端のロックコネクターを静脈カテーテルに接続して下さい。
3．三方活栓を図Ⅱの位置にし、マノメーター中に液を入れて下さい（10cm高さ程度）。
4．静脈圧測定の際は、三方活栓を図Ⅲの位置にして下さい。
［注意］目盛を読むときはマノメータの零点を中腋下線上（傾臥位）又は胸骨（上体を起こした体位）に合わせること。
5．引き続き、輸液を行う場合は、三方活栓を図Ⅰの位置に戻して下さい。

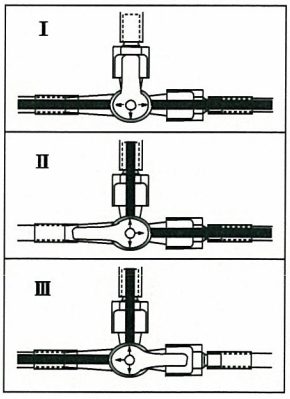

【使用上の注意】
重要な基本的注意
○使用中は本品の破損、嵌合部のゆるみ及び薬液漏れ等について、定期的に確認すること。
○脂肪乳剤及び脂肪乳剤を含む医薬品、ヒマシ油等の油性成分、界面活性剤又はアルコール等の溶解補助剤などを含む医薬品を投与する場合及びアルコールを含む消毒剤を使用する場合は、三方活栓のひび割れについて注意すること。（薬液により三方活栓にひび割れが生じ、血液及び薬液漏れ、空気混入等の可能性がある。特に全身麻酔剤、昇圧剤、抗悪性腫瘍剤及び免疫抑制剤等の投与では、必要な投与量が確保されず患者への重篤な影響が生じる可能性がある。なお、ライン交換時の締め直し、過度な締め付け及び増し締め等は、ひび割れの発生を助長する要因となる。）
○ひび割れが確認された場合は、直ちに新しい製品と交換すること。
○使用は１回限りとし、使用後は直ちに廃棄すること。
○万一、包装が破損している場合、または製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
○使用後は感染防止に留意し、安全な方法で廃棄すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】
貯蔵・保管方法
水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

使用期限
包装の使用期限を参照のこと（自己認証による）。

【包装】
１箱　２０本入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】
製造販売（お問い合わせ先）
ニプロ株式会社
大阪市北区本庄西３丁目９番３号
電話番号：06-6372-2331（代表）

製造
ニプロ医工株式会社

NIPRO　ニプロ株式会社