機械器具　47　注射針及び穿刺針
管理医療機器　歯科用注射針　12740000

ニプロジェクト歯科用注射針


再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】
本品は、カートリッジ専用注射器に装着し、歯科において局所麻酔用として用いられる滅菌済みの歯科用ディスポーザブル注射針である。

［構造］
本品は、針管、針基、コンテナー、キャップからなる。

ニプロジェクト歯科用注射針の形状・構造

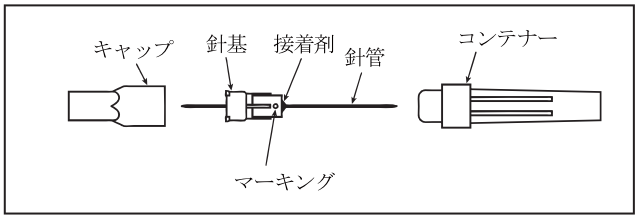

【品目仕様等】
○弾性
針管の外径をDとしたとき、固定した任意の一点から25D°mm離れた点に力を加え、8° 曲げて1分間保った後放すと、もとの位置に復元する。
○曲げ強さ
針管の長さが12mm以上のものにあっては、針管を5mmの曲率半径で90° 曲げたとき、折れない。
○引き抜き強さ
針基から針管を引き抜く方向に19.6Nの力を加えたとき、針管は針基から抜けない。

【操作方法又は使用方法等】
1. コンテナーを回し封紙を切り、キャップを外します。
2. 針基をカートリッジ専用注射器にねじ込み固定します。
3. コンテナーを抜き取り使用します。

【使用上の注意】
重要な基本的注意
○本品は歯科用のみに使用すること。
○針を繰り返し折り曲げて使用すると、針管が破折するおそれがあるので十分注意すること。
○使用直前に注射器を装着すること。
○針刺し事故を避けるため、リキャップの際に注意すること。
○ケースが破損していたり、シールが破れているものは使用しないこと。［滅菌が損なわれているおそれがある。］
○使用後の針は、適切な方法で処分すること。
○針が腐食するおそれがあるので、長時間薬液と接触させたままにしないこと。
○使用時、針先のめくれ等の損傷が発生した場合は使用を中止すること。
○針を（注射器に）装着する際に、カートリッジのゴム片を切り落とし、針が詰まることがあるので試射等で確認すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】
1. 貯蔵・保管方法
水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間・使用の期限
箱の使用期限欄を参照のこと（自己認証による）。

【包装】
100、300本／箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】
製造販売（お問い合わせ先）
ニプロ株式会社
大阪市北区本庄西3丁目9番3号
電話番号：06-6375-6709(医療推進部)

製造
ニプロ医工株式会社

NIPRO　ニプロ株式会社