** 2009 年 6 月 23 日改訂　（第 3 版）
* 2005 年 12 月 21 日改訂

医療機器承認番号　20100BZZ00820000


機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
管理医療機器 子宮用カテーテル 16431000

子 宮 内 カ テ ー テ ル

再使用禁止

【禁忌・禁止】
・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】
＜構造図（代表図）＞

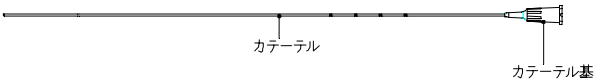

・該当する型式、サイズ等については、包装表示で確認すること。

** **＜構成品＞**

構成品	一般的名称	JMDN コード
カテーテル	子宮用カテーテル	16431000
スタイレット	オブチュレータ	70323102

【使用目的、効能又は効果】

** 本品は、子宮内圧及び羊水圧の検知及び測定に用いる。

【品目仕様等】

** ・接合部強度:19.6N(2kgf)で引張ったとき抜けない。

【操作方法又は使用方法等】

本品は、手技に精通した医師の管理下で使用すること。
1) 汚染に充分注意し、包装から取り出す。
2) 接続するコネクターまたはシリンジの筒先と確実に接続する。

＜使用方法に関連する使用上の注意＞
・カテーテル基の接続は確実に行なうこと。
・挿入する部位の粘膜損傷に注意すること。

【使用上の注意】
＜重要な基本的注意＞
・包装が破損、汚損している場合や、製品に異常が認められる場合は使用しないこと。
・使用直前に開封して使用すること。

＜その他の注意＞
・使用後は感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。
・本品はエチレンオキサイドガス滅菌済み。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】
＜貯蔵・保管方法＞
・水ぬれ、直射日光、高温多湿を避け保管すること。

＜有効期間・使用の期限＞
・箱に記載している使用期限を参照のこと。（自己認証による）

【包 装】
・10 セット／1 箱
・50 セット／1 箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

*＜製造販売業者＞
株式会社八光
長野県千曲市大字磯部 1490
TEL 026-275-0121

＜製造業者＞
株式会社八光

販売窓口： 東京都文京区本郷三丁目 42-6
TEL 03-5804-8500